

Bruksanvisning

City



Innhold

Garanti	4
Før bruk.....	5
Beskrivelse.....	5
Sete og styre.....	7
Bruk av din CITY.....	9
Vedlikehold	10
Reparasjon og garanti	10



**Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC
Samsvarserklæring**

For

Klasse 1 medisinsk utstyr

Produsentens navn: Huka B. V.

Produsentens adresse: Munsterstraat 13, 7575 ED Oldenzaal, Nederland

Produkt: 3-hjulssykkel

Navn på produkt: CITY

Undertegnede erklærer herved at utstyret spesifisert ovenfor er i samsvar med de grunnleggende kravene til medisinsk utstyr 93/42/EEC. Produktet er merket med CE-merket i henhold til direktivet.

Navn: Bas Kamp, CEO Huka B. V.

Signatur:

Garanti

CITY har 2 års garanti.

Garantien dekker ikke skader eller feil som oppstår ved uansvarlig bruk av sykkelen.

Den dekker ei heller slitasjedeler ved normal bruk.

Huka BV

Huka er et Nederlandsk selskap som produserer sykler, spesielt designet til bruk for folk med nedsatte funksjonsevner. Om du har noen spørsmål knyttet til produktene, kontakt din leverandør i Norge,

Bardum AS
Håndverksveien 8
1405 Langhus
Tlf. 64918060
post@bardum.no

Før bruk

- Se til at sykkelen er i god stand før du sykler
- Kontroller lufttrykket i dekkene
- Sjekk at bremsene fungerer som de skal
- Pass på at setet sitter godt festet
- Sjekk at styre er korrekt innstilt og sitter godt festet
- Bruk parkbremsen ved av- og påstigning
- Følg trafikkreglene og vær aktsom
- CITY er designet for kjøring på asfalt eller grus



Vær aktsom og tilpass farten etter ferdigheter og forhold

Beskrivelse

Rammen

CITY er laget av materialer i høy kvalitet. Rammen er laget av aluminium og stål

Skjermer

Skjermene er laget av slagfast plast og er motstandsdyktige mot steinsprut, grus og vann.

Hjul og dekk

Hjulene er laget av høykvalitets aluminiumsfelger og ståleiker. Topp kvalitetsdekk sikrer godt grep og minimal rullemotstand.



Riktig lufttrykk i dekkene er avgjørende for minimal slitasje og godt grep på veien

Brems

Sykkelen er utstyrt med trommelbrems bak og felgbrem foran. Bremsene aktiveres ved hjelp av bremsehendlene på styre.



Gode brems er veldig viktig for sikkerheten under sykling. Se alltid til at bremsene fungerer som de skal før du sykler.

Parkbrems

CITY er utstyrt med en parkbrems. Den sikrer at sykkelen står i ro under av- og påstigning. Se bildet.



Kjedebeskytteren

Kjedebeskytteren er laget i slagfast plast. Den hindrer kjede fra å bli skitten og våt, og sikrer således at kjede ikke skitner til klær og sko.

Gir

CITY leveres med et innvendig 8 girsystem. Dette håndteres ved en gripshift som sitter på høyre hendel på styret. Om ønskelig kan det også monteres pedalbrems på din CITY.

Hjelpemotor

CITY er også utstyrt med en elektrisk hjelpemotor av typen Heinzmann Direct Power. Den har en kraft på 250W og et Li-Ion batteri på 36V og 11Ah.



Kontrollenheten

Display




Motor i framhjulet

Batteriet er montert i bagasjebrettet

(Se egen bruksanvisning for hjelpemotoren)

Sete og styre

Justere setehøyden

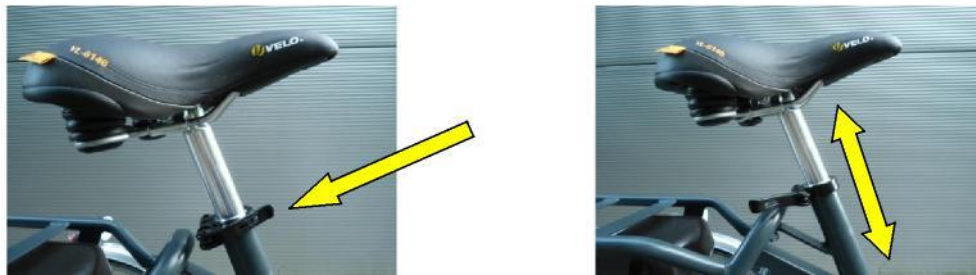

Løsne hurtihendelen som vist på bildet. Juster setet til ønsket posisjon. Stram hendelen etter justering.

MERK: Minimum setehøyde vil bli økt med ca 3 cm ved bruk av vinkelsadelpinne som må brukes ved kroppsstøtte.



Pass på at setepinnen er minst 6 cm ned i rammerøret.

Justere setedybden



Løsne mutteren med en fastnøkkel 13mm som vist på bildet. Juster setet til ønsket posisjon.

Skru mutteren på plass og stram til.



ADVARSEL! Husk å stramme til skruene etter endt justering.

Justere setevinkel



Løsne mutteren med en fastnøkkel 13mm som vist på bildet. Juster setet til ønsket posisjon.
Skru mutteren på plass og stram til.



ADVARSEL! Husk å stramme til skruene etter endt justering.

Høydejustering av styret



Vinkeljustering av styret



Styret kan justeres både i vinkel og høyde. For å justere benytt en 5mm unbraconøkkel.



ADVARSEL! Husk å stramme til skruene etter endt justering

Bruk av din CITY

- Se alltid til at din CITY er i god stand før sykkelturen. Gå over skruer på styret og sete. Kontroller at bremsen fungerer som de skal og sjekk at dekkene har tilstrekkelig lufttrykk.
- CITY er beregnet for bruk på veier med asfalt eller grus og kan brukes i all slags vær.
- Unngå saltvann da dette kan føre til rust på sykkelen.



Respekter følgende:

- Sørg alltid for at det er rett lufttrykk i dekkene
- Sjekk bremsene hver gang før du sykler
- Respekter trafikkreglene og vær aktsom
- Bremselengden kan være lengere på glatt føre

Vedlikehold

Rengjøring.

Aluminiums rammen, plasten og andre deler på sykkelen kan rengjøres med en myk og våt klut.

Sykkelen bør spyles fri for salt, sand og grus ved jevne mellomrom.



Regelmessig rengjøring forlenger levetiden av din CITY. Ikke bruk høytrykksspyler ved rengjøring da trykket er så kraftig at du vil spraye vekk fett fra lagrene.

Reparasjon og garanti

For reparasjon av din CITY kontakt en autorisert forhandler. Bruk alltid originaldeler. Sykkelens garanti dekkes av din forhandler i Norge, Bardum AS.

Bardum AS
Håndverksveien 8
1405 Langhus
Tlf. 64918060
post@bardum.no



Bardum

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus