

**neat**  
A brand of  **legrand**



**SMILE**  
Brukermanual  
NE41 21001-04 V3.0



①



②



③

## Innholdet i SMILE-settet

Listen nedenfor viser de inkluderte delene i pakken. Kontakt forhandleren eller distributøren hvis noen av delene mangler eller er defekte.

### # Benevnelse

#	Benevnelse
1	SMILE-enhet
2	Halskjede med holder
3	Armbånd

Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel.

NEAT Electronics AB forbeholder seg retten til å utvikle sine produkter eller endre innholdet uten å meddele personer eller organisasjoner om slike endringer.

NEAT Electronics AB er ikke ansvarlig for data- eller inntektstap eller noen påfølgende skade.

For mer informasjon, detaljer eller beskrivelser, besøk vår hjemmeside:

[www.neat-group.com](http://www.neat-group.com)

© 2014 Legrand

Alle rettigheter forbeholdes.

Dokumentnummer: NE41 21001-04 v3.0

Revisjonsdato: 2021-04-12

NEAT Electronics AB

Varuvägen 2

SE-246 42 Löddeköpinge

Sweden

Phone: +46 (0)46 70 70 65

Fax: +46 (0)46 70 70 87

[www.neat-group.com/se](http://www.neat-group.com/se)

[infosweden@neat-group.com](mailto:infosweden@neat-group.com)

### Samsvarserklæring (DoC)

NEAT Electronics AB erklærer med dette at radioutstyret av typen SMILE, er i overensstemmelse med nødvendige krav i direktivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten angående EU-erklæringen kan lastes ned fra Internett- adressen:

[www.neat-group.com/es/en/downloads](http://www.neat-group.com/es/en/downloads)



# Innhold

<b>1</b>	<b>Om SMILE</b>	<b>4</b>
1.1	SMILE	4
1.2	Tiltenkt bruk	4
1.4	Generell bruk	4
<b>2</b>	<b>SMILE</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>LED-indikasjoner</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SMILE-tilbehør</b>	<b>5</b>
4.1	EPA (Easy Press-adapter)	5
4.2	ANHENG	5
<b>5</b>	<b>Montering</b>	<b>6</b>
5.1	Holder/halskjede	6
5.2	Armbånd	6
5.3	KLIPS	6
5.4	Montere EPA	6
5.5	ANHENG	7
5.6	Skifte skall	7
<b>6</b>	<b>Bruk og vedlikehold</b>	<b>8</b>
6.1	Sikkerhetsmerknader	8
6.2	Rengjøring	8
6.3	Batteri	8
6.4	Gjenvinning	8
<b>7</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>9</b>

## 1 Om SMILE

SMILE-serien er produkter som er ment for omsorgssektoren, enten hjemme, i hjemmesykepleien eller på et behandlingssted. SMILE-serien består av tre bærbare utløsere: SMILE, SMILE ID og SMILE FALL.

Begrepet SMILE eller SMILE-enhet vil bli brukt for utløseren generelt, og hvis ikke annet er angitt, henviser den til standard SMILE-enhet.

### 1.1 SMILE

SMILE er en bærbar alarmutløser som må kobles til en mottaker (f.eks. NOVO Homecare Phone, TREX 2G bærbar mottaker, D-TECT eller D-SERVER-system) for å kunne sende alarmer.

### 1.2 Tiltenkt bruk

SMILE er ment for bruk i hjemmet eller på et behandlingssted for å gi en følelse av trygghet med mulighet til å sende alarm hvis en nødsituasjon oppstår.

### 1.3 Generell bruk

SMILE skal bæres av brukeren, enten i halskjede eller armbånd. En alarmknapp gjør det mulig å utløse en alarm manuelt. Alarmen utløses ved å trykke på alarmknappen. Rødt lys indikerer at alarmen er sendt. Grønt lys indikerer at alarmen er bekreftet.

## 2 SMILE



### # Benevnelse

1	LED
2	Alarmknapp

### 3 LED-indikasjoner

LED-indikatoren indikerer status når alarmknappen trykkes.


Når du trykker på alarmknappen, lyser LED-indikatoren rødt under overføringen til den mottar et bekreftessignal fra mottakeren. Når en bekreftelse er mottatt, lyser LED-lampen grønt i 2 sek.

Hvis LED-indikatoren blinker raskt under sending (rødt) og bekreftelse (grønt), indikerer dette at batterinivået er lavt (og at alarmen for lavt batterinivå også er sendt). Enheten må da skiftes ut.

Blink	Tiltak
1 rødt blink	Alarmknappen sender en alarm
1 grønt blink	Alarmen er bekreftet
Blinker rødt eller grønt	Lavt batterinivå, skift ut enheten

### 4 SMILE-tilbehør

#### 4.1 EPA (Easy Press-adapter)

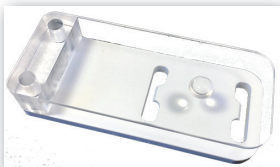

I noen tilfeller kan brukeren ikke bruke fingeren til å trykke på alarmknappen på utløseren. EPA kan hjelpe siden den gjør det mulig for brukeren å bruke håndflaten eller albuen til å utløse en alarm med SMILE, SMILE ID eller SMILE FALL.

#### 4.2 ANHENG



Anhendet er et tilbehør som kan lindre følelsen av stigmatisering hos brukeren.

## 5 Montering

### 5.1 Holder/halskjede



Før holderen inn i hullene og trykk til låsen klikker på plass.  
Frigjør holderen ved å trykke på låsen (1) og deretter trekke den oppover (2).

### 5.2 Armbånd

Før armbåndet gjennom hullene og fest det på armen.

### 5.3 KLIPS

Fest klipsen på baksiden av SMILE, og før holderen gjennom hullene på SMILE til låsen klikker på plass.



Hvis du vil løsne klipsen, trykker du på holderens lås og fjerner holderen.

### 5.4 Montere EPA

Trykk forsiktig EPA-en foran på SMILE.

Løsne ved å bruke et tynt blad (f.eks. en bordkniv eller lignende) under EPA og bøye krokene forsiktig fra SMILE.

Ikke bruk overdreven kraft, sidene krokene lett kan knekke.

## 5.5 ANHENG

Anhenget monteres på samme måte som klipsen.

Du fjerner anhenget ved å stikke en binders i hullet nærmest halskjedet og løsne holderen

## 5.6 Skifte skall

SMILE -designen gjør det mulig å skifte skallet. Fjern det øverste skallet ved å trekke hullene på armbåndet forsiktig utover.



Fest det nye skallet og trykk til du hører et tydelig “klikk”



---

*Et fjernet skall kan ikke brukes igjen og må kastes!*

---

## 6 Bruk og vedlikehold

### 6.1 Sikkerhetsmerknader

- Les instruksjonene før bruk.
- Test alltid systemet i henhold til instruksjonene før bruk.
- Produktet er kanskje ikke egnet for alle personer.
- Kontroller enheten regelmessig, og skift den ut ved behov.
- Kontroller alltid produktets funksjon etter at du har foretatt justeringer.
- SMILE er ikke ment som livsnødvendig utstyr.
- Bruk bare originale deler.
- Må ikke utsettes for direkte sollys.
- Holdes unna støv, fuktighet og smuss.
- Ikke mist, bank, vri eller rist enheten.
- Må ikke åpnes, ingen deler kan repareres av brukeren.
- Hold apparatet borte fra varme og ild.
- Kontakt distributøren for å få utført reparasjoner.

### 6.2 Rengjøring

- Rengjør enheten med en myk klut fuktet lett med mildt såpevann.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, fett eller andre sterke stoffer ved rengjøring eller håndtering av delene i produktsettet. Etter rengjøring må du kontrollere at produktet fungerer som det skal ved å utløse en alarm.

### 6.3 Batteri

- Dette produktet inneholder et knappebatteri. Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige innvendige brannskader på bare 2 timer, og det kan føre til dødsfall.
- Batteriet må ikke svelges. Fare for kjemisk forbrenning.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
- Hvis batterirommet ikke lukkes skikkelig, må du slutte å bruke produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn.
- Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller satt inn i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart.

### 6.4 Gjenvinning

Enheten inneholder et knappebatteri. Kasseres på riktig måte. Det utslitte produktet må returneres til en gjenvinningsstasjon for riktig kassering eller returneres til NEAT.



## 7

## Tekniske data

Størrelse	34 x 42 x 15 mm
Vekt (inkl. batteri)	14 g
Frekvens <sub>RF</sub> - EU	869.2 (trygghetsalarmer) kategori 1 869.4 (trygghetsalarmer) kategori 2
Frekvens <sub>RF</sub> - Ikke EU*	866, 868, 906, 916, 921 MHz
Frekvens <sub>RF</sub> - US	916,2 MHz
Sendeeffekt <sub>maks.</sub> - EU	869,2 MHz 10 mW (EIRP) 869,4 MHz 500 mW (EIRP)
Sendeeffekt <sub>maks.</sub> - Ikke EU	I henhold til lokale forskrifter
Sendeeffekt <sub>maks.</sub> - US	I henhold til lokale forskrifter
RFID-frekvens	125 KHz
Batteritid >	5 år
IP-klasse	IP67
Temperaturområde	+5 - +55 °C

\* I henhold til lokale forskrifter for trygghetsalarmer..

**neat**  
A brand of  **legrand**

[www.neat-group.com](http://www.neat-group.com)