

# **CLOVER 7 S**

Håndholdt Videoforstørrer

## **Brukerguide**

Rev F

---

## Innhold

**Forholdsregler** 1

**Hurtigstart** 3

Oversikt 3

Komposisjoner 5

Tilbehør 8

Batteri lading 9

Stativ 11

**Betjene enheten** 13

Strømknapp 13

---

---

<b>Pipetype</b>	14
<b>Pipekontroll</b>	14
<b>Kamerabryter</b>	14
<b>Forstørring</b>	15
<b>Fargemodus</b>	16
<b>Lysstyrke</b>	18
<b>Lys</b>	19
<b>Frys av bilde</b>	20
<b>Lagring av bilder</b>	21
<b>Avspilling av bilder</b>	21

---

---

<b>Linjer og masker</b>	23
<b>Finn</b>	24
<b>Sanntidsnavigering</b>	25
<b>Auto strømsparing</b>	28
<b>Gjenopprette</b>	28
<b>Tilbakestill maskinvare</b>	29
<b>Feilsøking</b>	<b>30</b>
<b>Enheten skrur seg ikke på</b>	30
<b>Svart skjerm eller hvit skjerm</b>	30
<b>Bildet vil ikke endre seg</b>	31

---

## Spesifikasjoner

32



## Forholdsregler



Før du bruker Clover 7 for første gang, må du lade batteriet. Se avsnittet Batterilading for mer informasjon.



Bruk alltid enheten på et sted der temperaturen er mellom 10 ° og 35 ° C (50 ° og 95 ° F).



Hold enheten vekk fra våte områder, regn og andre væskekilder. Ikke senk enheten.



Ikke prøv å reparere enheten. Ethvert uautorisert forsøk annullerer produktgarantien. Kontakt distributøren din.



Bruk den medfølgende strømadapteren og batteriet.

## Hurtigstart


### Oversikt

Takk for ditt kjøp av Clover 7.


Clover 7 er en bærbar 10-tommers videoforstørrelse med utmerket Full HD-bildekvalitet, og den sikrer det skarpe bildet i sanntid mens du flytter eller endrer forstørrelse kontinuerlig fra 2,5X til 18X. Det integrerte dobbelkamera-systemet gir tre måter å se på den daglige bruken. For eksempel nær utsikt for å lese bøker eller aviser; avstandsvisning for å se plakater eller tavler; Speilvisning for å kle seg opp.



Foruten den vanlige zoomingen og fargemodusfunksjonen, er det også forskjellige praktiske funksjoner som leselinje & maske, bildefrysing og lagring, finne og navigering

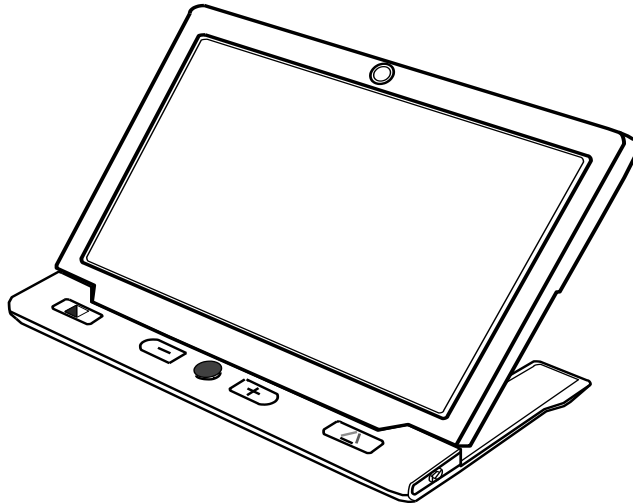

## Komposisjoner

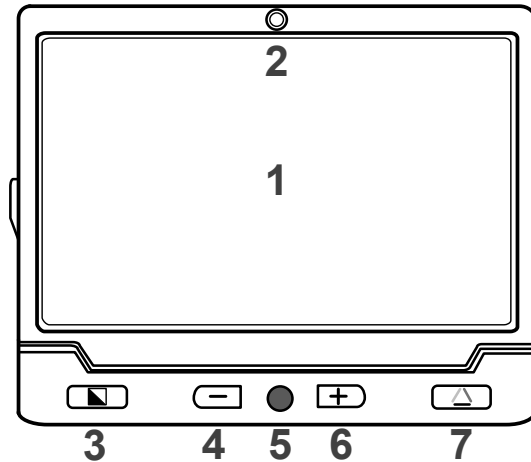

1. LCD Skjerm

4. Zoom ut


7. Ekte farge

2. Front kamera

5. Joystick

3. Forbedret farge



6. Zoom Inn

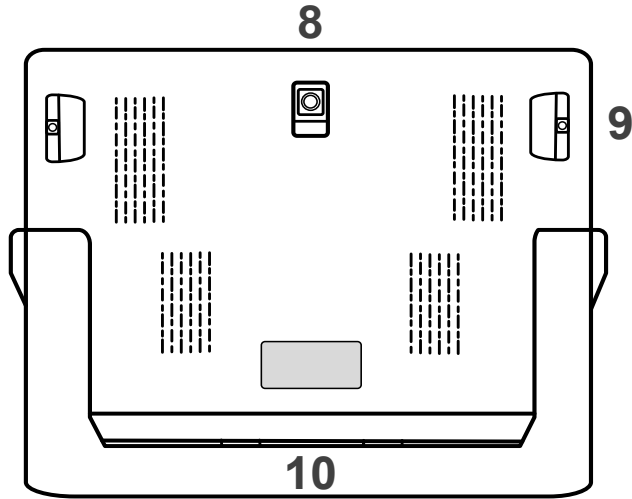

8. Bakkamera

9. LED lys

10. Stativ

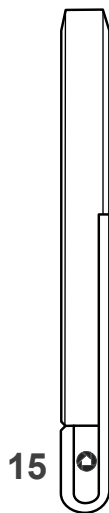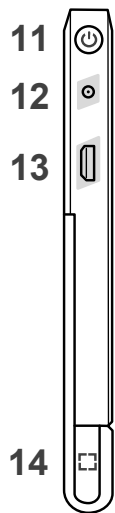

11. Strømknapp

12. Strømport


13. HDMI Port

14. Finnknapp

15. Frysknapp

16. Kamerabryter

17. USB Port

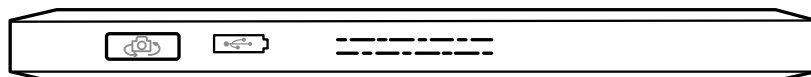


16

17


## Tilbehør



Brukermanual

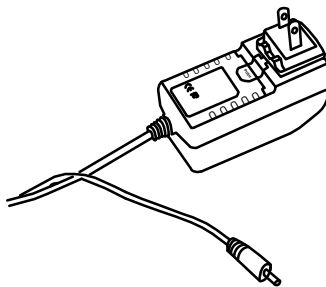


Strømadapter

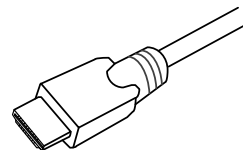

HDMI kabel




Vaskeklut

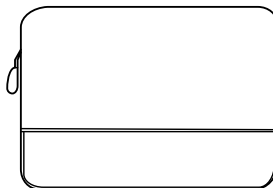

Bæreveske

## Batteri lading

1. Koble den medfølgende strømkabelen til strømadapteren.
2. Koble den medfølgende strømkabelen til enhetens strømport.
3. Plugg strømadapteren til en stikkontakt og begynn å lade.

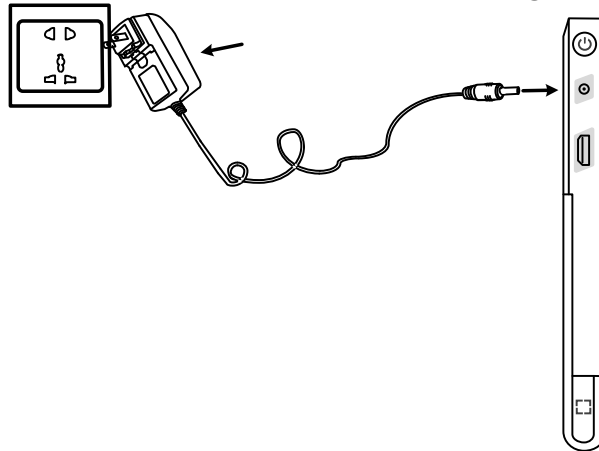

## Strøm LED

- Ved lading når enheten er slått av, vil strømlampen lyse grønt og slås deretter av automatisk når den er fulladet. Det vil ta omtrent 5 timer å lade enheten helt opp, og vil støtte enheten som jobber i omtrent 3 timer.
- Ved lading når enheten er på, lyser strømlampen grønn.
- Når enheten er på uten lading, lyser lysdioden grønt når batterinivået er høyt og blir rødt når batteriet dør. Når den røde lampen begynner å blinke, er det derfor et signal om å lade batteriet.


- Du kan også sjekke batteristatusen ved å trykke på strømknappen. Se instruksjonene nedenfor for mer informasjon.

## **Stativ**

Med integrert nedfellbar skrivestativ i en ergonomisk synsvinkel, kan Clover 7 tilfredsstillende brukernes ønske om å lese mer og lang tid i en behagelig posisjon. Det er også nok plass under kameraet til å jobbe med en penn. Brett ut stativet slik figuren nedenfor viser.



Kameraet bak er designet for å rotere automatisk i henhold til stativet på stativet, slik at både Nærvisning og Fjernvisning støttes på denne enheten.

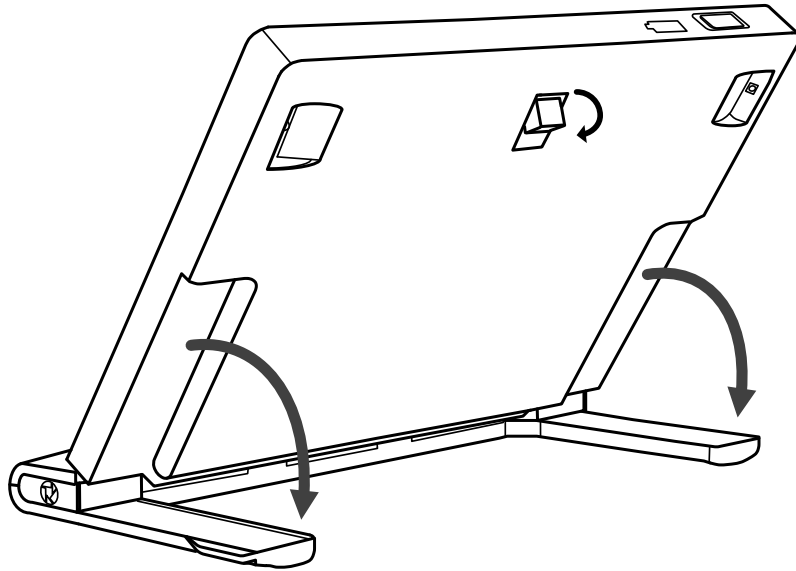



## Betjene enheten



### Strømknapp

- Trykk og hold på strømknappen  i 5 sekunder for å slå av / på enheten.
- Når enheten er på, trykk på strømknappen  for å sjekke gjeldende status for batterikapasitet, frysemodus, fokusstatus og pipetone
- Trykk på andre knapper når du holder på strømknappen for å gjøre kombinasjonsfunksjoner. Se instruksjonene nedenfor for mer informasjon.

## Pipetype


- Enhet på / av pip
- Knappe pip
- Terskel pip
- Pip for lavt batteri

## Pipekontroll


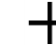


- Trykk og hold på av / på-knappen  og trykk på ekte farge-knappen  for å slå av / på pipetonen.

## Kamerabryter

- Snu kamerabryteren   til venstre for å åpne bakkameraet for nærvisnings og fjernvisning

- ❑ Snu kamerabryteren  → til høyre for å åpne frontkameraet for speilvisning

## Forstørring



- ❑ Trykk på Zoom inn-knappen  for å øke forstørrelsen, og hold Zoom inn-knappen  for kontinuerlig økning.
- ❑ Trykk på zoom ut knappen  for å redusere forstørrelsen, og hold inne Zoom ut-knappen  for kontinuerlig reduksjon.

Forstørrelsesområde når den står på bordet: Bak / foran kamera: 2,5x - 18x

## Fargemodus

En fargemodus er en forhåndsdefinert fargekombinasjon. Modus i full farge er egnet for visning av bilder eller kart.

Forbedret kontrastmodus er kombinert med forskjellige forgrunner og bakgrunnsfarger som kan bidra til å lese tydeligere.

- Trykk på forbedret farge-knappen  for å gå gjennom kombinasjonen av Enhanced Color-kombinasjonen
  
- Trykk på ekte farge-knappen  for å gå tilbake til fullfargemodus

Hold inne forbedret farge-knappen i 5 sekunder for å veksle mellom den forenklete forbedret fargekombinasjonsliste og den integrerte Forbedret fargekombinasjonsliste (fabrikkstandard).

Den forenklete forbedrede fargekombinasjonslisten (5 modus):





- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på hvit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gul på svart  | <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på blå   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gul på blå    |   |

Den integrerte forbedrede fargekombinasjonslisten (18 modus)



- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på svart    | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på hvit    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gul på svart     | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på gul     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på Blå      | <input checked="" type="checkbox"/> Blå på hvit      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gul på blå       | <input checked="" type="checkbox"/> Blå på gul       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grønn på svart   | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på grønn   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fiolett på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på fiolett |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blå på svart     | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på blå     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på grønn    | <input checked="" type="checkbox"/> Grønn på hvit    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på rød      | <input checked="" type="checkbox"/> Rød på svart     |

## Lysstyrke

Lysstyrken på skjermen kan justeres i både fullfargemodus og forbedret kontrastmodus.




- ❑ Trykk og hold på av / på-knappen  og trykk på Zoom inn-knappen  for å øke lysstyrken. Fabrikkens standardverdi blir uthevet grønt.
- ❑ Trykk og hold på strømknappen  og trykk på og Zoom ut-knappen  for å redusere lysstyrken.

## Lys


- ❑ Trykk og hold på strømknappen  og trykk på Frys-knappen  for å slå av / på LED-belysningen manuelt.




## Frys av bilde






- Å fryse et bilde på LCD-skjermen kan være nyttig for videre lesing. På denne statusen er forstørrelse så vel som fargeendring fortsatt tillatt for en bedre opplevelse.
  
- Trykk på Frys-knappen  for å låse det aktive bildet.
- Trykk på Frys-knappen  igjen for å åpne bildet.
  
- For det låste bildet med økt forstørrelse kan du bruke styrespaken  til å navigere rundt fritt.




## Lagring av bilder

- Trykk lenge på fryseknappen  i 3 sekunder for å lagre det gjeldende bildet. Du kan lagre opptil 18 bilder.
- Merk: Når de lagrede bildene når maksimal verdi (18 bilder, vil et minne fullt ikon vises), må du slette noen bilder først i avspillingsmodus før neste vellykkede lagring.


## Avspilling av bilder

- For å gå til avspillingsmodus, trykk lenge på ekte farger-knappen  i 3 sekunder.



- ❑ Skyv styrespaken  or å velge målbildet fra miniatyrbildegalleriet med ni rutenett. Trykk på ekte farger-knappen  or å se målbildet. Du kan se og navigere i bildet med de samme operasjonene som er beskrevet i frys bildet-delen. Trykk på fryseknappen  or å gå tilbake til miniatyrbildet for ni net
  
- ❑ Når du er i Miniatyrnett-miniatyrbilde, trykker du på Finn-knappen  for å velge målbildet som må slettes. Trykk på Finn-knappen  igjen for å bekrefte, eller på andre knapper for å avbryte.

- ❑ Når du er i miniatyrnett-miniatyrbilde, holder du Finn-knappen  i 5 sekunder for å slette alle bildene. Trykk på Finn-knappen  igjen for å bekrefte, eller på andre knapper for å avbryte.
- ❑ Trykk lenge på ekte farger-knappen  i 3 sekunder for å avslutte avspillingsmodus.


## Linjer og masker


Trykk på Finn-knappen  for å veksle mellom forskjellige leselinje- og maskemodus.

- En horisontal linje
- En vertikal linje

- Horizontal maske
  - Normal, ingen linje & maske
  - Skyv joysticken  for å endre plasseringen av leselinjen eller avstanden mellom maskene. Sanntidsnavigasjonen er ubrukelig i Linje og maskemodus.
- Trykk på av / på-knappen  for å avslutte Linje & Maske-modus.


## Finn

- Trykk lenge på Lokalisering/finn-knappen  i 2 sekunder og hold den for ikke å frigjøre den. En posisjonsboks vises.

- ❑ Flytt og endre innholdet i posisjonsboksen, sikt det mot delen du vil vise, og slipp deretter Finn-knappen , så vil bildet gå tilbake til forrige forstørrelse med det oppdaterte innholdet.

For eksempel ser du på en del av kartet med en viss forstørrelse. Da vil du se en annen del uten å endre den gunstige forstørrelsen. Da vil funksjonen være praktisk og nyttig for deg.

## Sanntidsnavigering

- ❑ I forsterkningstilstand kan brukere skyve styrespaken  når de er i sanntids videomodus for å navigere i bildet for å se mer uten å flytte enheten.


- ❑ Trykk på Zoom inn  $\oplus$  og Zoom ut  $\ominus$  knappene samtidig for å hjelpe deg med å sentrere bildet på nytt (Rød prikk vises).

## Minne

Enheten lagrer automatisk de nyeste innstillingene, for eksempel fargemodus, forstørrelse, lydsignal når strømmen er slått av normalt, og bruker dem når enheten er på neste gang.

## HDMI utgang

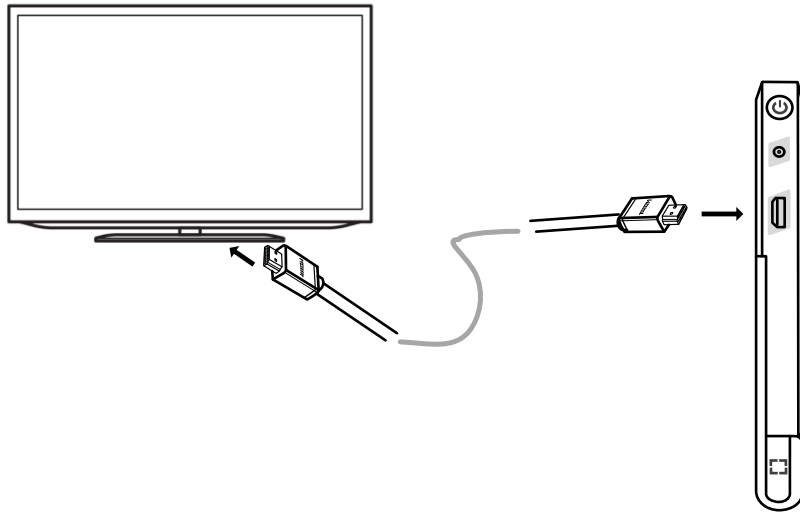

Koble enheten til den eksterne skjermenheten din med HDMI-kabel for bedre og større visning.







## Auto strømsparing




Hvis ingen drift og ingen bevegelse i over 3 minutter, slås enheten av automatisk.

- ❑ Trykk og hold på strøm-knappen  og klikk på forbedret farge-knappen  for å slå av / på Auto strømsparings-funksjonen manuelt (fabrikkstandard er på).

## Gjenopprette

Trykk lenge på Frys-knappen  og Finn-knappen  samtidig i 5 sekunder for å tilbake stille til standard fabrikkinnstillinger. Slå av automatisk når tilbakestillingen er fullført.

## Tilbakestill maskinvare

Når enheten er hengt opp eller ikke kan slås av normalt, trykker du på strøm  + Frysknappen  + ekte farger-knappen  samtidig for å utløse maskinvare-tilbakestilling.

## Feilsøking

### **Enheten skurrer seg ikke på**

- Koble til strømadapteren
- Bytt batteriet
- Gjennomfør en tilbakestilling av maskinvare

### **Svart skjerm eller hvit skjerm**

- Hvis enheten sitter på en flat, ren overflate, kan skjermen være svart eller hvit. Løft av enheten for å sikre at endring skjer
- Juster forstørrelsen
- Juster fargemodusen som er valgt.
- Restart din Clover 7 enhet

- Reset din maskinvare

## **Bildet vil ikke endre seg**

- Hvis enheten går inn i frysemodus eller avspillingsmodus, endres ikke bildet
- Trykk på strømknappen for å sjekke gjeldende status
- Restart din Clover 7 enhet
- Reset din maskinvare

## **Flekker eller pletter på skjermen**

- Juster lysstyrken
- rengjør LCD-skjermen og kameraet

Kontakt den lokale distributøren hvis problemet ikke løses.

## Spesifikasjoner

- **skjerm:** 7 tommers bred LCD-skjerm, HD
- **kamera:** Auto Fokus, HD
- **Størrelse:**  $\leq 245*200*22\text{mm}$
- **vekt:**  $\leq 450$  gram
- **Fargemodus:** Ekte farge, 5 Forenklet forbedrede fargemodus;  
18 Integrerte forbedrede fargemodus
- **Forstørrelse** 2.5x – 18x
- **Batteri:** Integrert oppladbart Li-batteri; 3 timers  
kontinuerlig bruk etter 5 timers lading
- **Strøm Adapter:** Inngang: 110-240V; Utgang: 5V/3A