



Somna Kjedevest Balance

Somna Vest Balance

Brugervejledning / Brukerveiledning / Gebrauchsanweisung

600910 600915 600920 600922 600925

DK NO DE 3.0



ABILIA

The logo for ABILIA, featuring a stylized red hand icon with fingers spread, positioned above the brand name 'ABILIA' in a bold, black, sans-serif font.

Somna Vest Balance


Somna Vest Balance bruges om dagen for at berolige sanserne og styrke kropsopfattelsen, så det er lettere at koncentrere sig om aktiviteter i hverdagen. Det hjælper med at holde fokus og si unødvendige indtryk fra.

Brug vest så tæt på kroppen som muligt. Du kan bruge den under en sweater eller jakke.


Brug



1. Luk den ene side op.

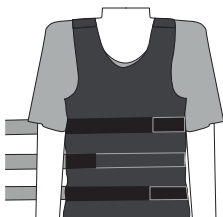

2. Tag vesten på.

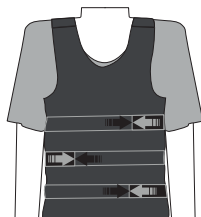

3. Luk og spænd remmene.



4. Justér skuldrene.

Somna Vest Balance er i overensstemmelse med alle nødvendige krav, bestemmelser og direktiver vedrørende medicinsk udstyr. Kasser produktet på et egnet sted.

For mere information og tilbehør, gå til www.abilia.com eller scan QR-koden.



Scan mig!

Vedligeholdelse



Tekstil: 70 % Polyester, 30 % Bomuld

Fyldning: 100 % Stålkæder

Anvend medfølgende vaskepose.

Vigtig information



ADVARSEL: Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet.

- Kontakt din læge, før du bruger produktet i tilfælde af svag lungekapacitet, svag muskelkapacitet eller kirurgisk udstyr, som kan blive påvirket af kæderne.
- Pas på at Somna Vest Balance ikke bliver fanget i noget når den er i brug.

Alvorlige hændelser

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land. En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført eller kunne have medført en patients, brugers eller en anden persons død, midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en anden persons helbredstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.

Somna Kjedevest Balance


Somna Kjedevest Balance brukes om dagen for å roe sansene og øke kroppsoppfatningen slik at det er lettere å konsentrere seg om aktiviteter i hverdagen. Vesten hjelper da med å opprettholde fokus og sile ut unødvendige inntrykk.

Bruk vesten så nær kroppen som mulig, du kan bruke den under en genser eller jakke.


Bruk



1. Åpne en side

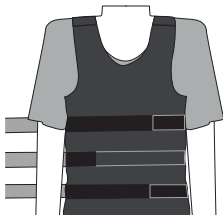

2. Ta på vesten

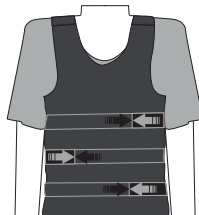

3. Lukk og
stram
remmene



4. Juster
skuldrene

Somna Kjedevest Balance oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for medisinskteknisk utstyr. Kasser produktet på et egnet sted.

For mer informasjon og tilbehør, gå til www.abilia.no eller skann QR-koden.



Skann meg!

Vedlikehold



Tekstil: 70% Polyester, 30% Bomull

Fylling: 100% Stålkjeder

Bruk den medfølgende vaskeposen.

Viktig informasjon



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Kontakt lege før du bruker produktet dersom du har redusert lungekapasitet, redusert muskelkapasitet eller kirurgisk utstyr som kan bli påvirket av kjedene.
- Forsikre deg om at Somna Kjedevest Balance ikke blir fanget i noe under spill.

Alvorlige hendelser

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til produsenten og myndighetene i ditt land. En hendelse anses som alvorlig hvis den direkte eller indirekte kan ha ført til, eller kan føre til dødsfall til en pasient, bruker eller annen person, midlertidig eller permanent alvorlig svekkelse av pasientens, brukers eller andres helsetilstand eller en alvorlig trussel mot folkehelsen.

Somna Vest Balance


Somna Vest Balance wird tagsüber verwendet, um die Sinne zu beruhigen und die Körperwahrnehmung zu verbessern, sodass Sie sich leichter auf Aktivitäten im Alltag konzentrieren können. Sie hilft dann, den Fokus zu behalten und unnötige Eindrücke auszufiltern.

Schnallen Sie die Weste so fest wie möglich, aber nur so fest, dass der Tragekomfort erhalten bleibt. Sie können die Weste unter einem Pullover oder einer Jacke tragen.

Verwendung



1. Eine Seite öffnen.

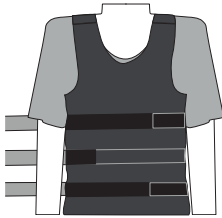

2. Die Weste anziehen.



3. Die Weste schließen und festziehen.



4. Die Länge anpassen.

Somna Vest Balance erfüllt alle notwendigen Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien für Medizinprodukte. Eine fachgerechte Entsorgung ist zu gewährleisten.

Mehr Informationen und Zubehör finden Sie unter www.abilia.com oder scannen Sie den QR-Code.



Wartung



Textil: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle

Füllung: 100 % Stahlketten

Den enthaltenen Waschbeutel verwenden.

Wichtige Informationen



WARNUNG: Lesen Sie die Warnungen, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Bei schwachen Lungen oder Muskeln sowie bei Implantaten, die von den Ketten beeinflusst werden können, konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie daran, dass sich die Somna Vest Balance nicht beim Spielen verfängt.

Schwere Vorfälle

Tritt im Zusammenhang mit dem Produkt ein schwerwiegender Vorfall auf, muss dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden. Ein Vorfall gilt als schwerwiegend, wenn er direkt oder indirekt geführt hat, geführt haben könnte oder hätte führen können zu Tod eines Anwenders oder einer anderen Person, vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Anwenders oder einer anderen Person oder eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit.



600910 600915 600920 600922 600925_User manual_Somma Vest Balance_DK NO DE March, 2021



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Phone +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com



ABILIA