


permobil

SEATING + POSITIONING

ROHO® DRY FLOATATION® Wheelchair Cushions Operation Manual

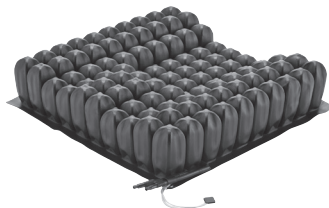

Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y®



SEATING + POSITIONING

ROHO® DRY FLOATATION®-rullestolputer Bruksanvisning

Leverandør: Denne håndboken skal gis til brukeren av dette produktet.

Operatør (individ eller omsorgsyter): Før bruk av dette produktet, bør du lese bruksanvisninger og bevare den for fremtidig referanse.

Innholdsfortegnelse

Tilsiktet bruk	94
Viktig sikkerhetsinformasjon	94-95
Deledetaljer	96
Putejustering	97-99
Ta av trekket og bytte det ut Problemløsning	100
Rengjøring av puter og trekk	101-102
Produktspesifikasjoner Lagring, avhending og resirkulering Begrenset garanti	103



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.
USA: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Kundeservice : orders.roho@permobil.com
Utenfor USA: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com
permobilus.com

ROHO-produkter kan være dekket av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og varemerker, inkludert ROHO®, DRY FLOATATION®, ISOFLO®, Yellow Ropev, shape fitting technology®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, QUADTRO SELECT®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE™, og LOW PROFILE®.

ROHO, Inc. har en politikk for kontinuerlig produktforbedring og forbeholder oss retten til å endre dette dokumentet. En gjeldende versjon av dette dokumentet er tilgjengelig på permobilus.com.

© 2007, 2018 ROHO, Inc.

Rev. 05/04/2018

Tilsiktet bruk

Hvert ROHO® DRY FLOATATION®-produkt i denne bruksanvisningen er en justerbar, luftfylt støttepute med cellulær design for rullestoler. Det er ingen vektgrense, men puten må være riktig dimensjonert for pasienten.

ROHO, Inc. anbefaler evaluering av en terapeut som har erfaring innen sitting, posisjonering og mobilitet: 1) for å fastslå hvorvidt puten er egnet for brukeren; og 2) for å fastslå hvorvidt en solid setepattform er anbefalt hvis man bruker puten på en rullestol med bæresele.

Hvert av følgende produkter bruker DRY FLOATATION®-teknologi og er konstruert for å tilpasse seg brukerens sittende form og gi hud/bløtvev beskyttelse, posisjonering, og et miljø som forenkler sårheling.

- ROHO® LOW PROFILE-pute med to kamre (LOW PROFILE-pute med to kamre)
- ROHO® MID PROFILE-pute med to kamre (MID PROFILE-pute med to kamre)
- ROHO® HIGH PROFILE-pute med to kamre (HIGH PROFILE-pute med to kamre)
- ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®-pute (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
- ROHO® QUADTRO SELECT MID PROFILE®-pute (QUADTRO SELECT MID PROFILE)
- ROHO® QUADTRO SELECT HIGH PROFILE®-pute (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
- ROHO® CONTOUR SELECT®-pute (CONTOUR SELECT)
- ROHO® ENHANCER®-pute (ENHANCER)

Hvert av følgende produkter bruker DRY FLOATATION®-teknologi og er konstruert for å tilpasse seg brukerens sittende form og gi hud/bløtvev beskyttelse, posisjonering og et miljø som forenkler sårheling.

- ROHO® LOW PROFILE®-pute med ett kammer (LOW PROFILE-pute med ett kammer)
- ROHO® MID PROFILE®-pute med ett kammer (MID PROFILE-pute med ett kammer)
- ROHO® HIGH PROFILE®-pute med ett kammer (HIGH PROFILE-pute med ett kammer)

ROHO-medisinske produkter er ment å være en del av en generell behandling. En lege bør gjøre produktanbefalinger basert på en vurdering av individets medisinske og terapeutiske behov og generelle tilstand. En lege bør også vurdere for visuell, lesing og kognitiv svekkelse for å bestemme behovet for omsorgsassistent med produktbruk, inkludert å gi en storhåndshåndbok.

Viktig sikkerhetsinformasjon



Advarsler

- Skader i hud/bløtvev kan oppstå av flere grunner, som kan variere fra person til person. Kontroller huden jevnlig, minst én gang om dagen, og spesielt områder som dekker benfremspring. Rødhet, blåmerker eller mørkere områder (sammenlignet med normal hud) kan indikere overfladisk eller dypere vevskader som bør bli kontrollert. Dersom hud/bløtvev blir misfarget på noen som helst måte, må **ALL BRUK** stanses umiddelbart. Kontakt helsepersonell umiddelbart dersom misfargingen ikke forsvinner innen 30 minutter etter avsluttet bruk.
- Puten og trekket **MÅ** samsvare i størrelse og **MÅ** brukes som anvist i denne bruksanvisningen. **HVIS DE IKKE ER DET** kan: 1) Fordelene puten gir reduseres eller elimineres, noe som øker risikoen på hud eller annet mykvev, og 2) brukeren bli ustabil og være utsatt for å falle.

Viktig sikkerhetsinformasjon, fortsettelse




Advarsler, fortsettelse

- **BRUK IKKE** puten oppå, eller sammen med, noen andre produkter eller materialer, med mindre det er anvist i denne håndboken. Uriktig bruk kan føre til at brukeren kan bli sittende ustabil og utsettes for fallfare.
- **IKKE** plasser noen form for mellomlegg (bortsett fra et ROHO-putetrekk) mellom brukeren og puten. Dette vil redusere effektiviteten av produktet.
- **BRUK IKKE** puten som flyteredskap (f.eks. et livbelte). Den vil **IKKE** holde deg flytende i vann.
- Vær varsom når du håndterer puten: Det er mulig å sette fast fingrene i maljene på putehjørnene.
- Tester eller sertifiseringer, inkludert mht. antennelighet kan bli ugyldig for over madrassen om den blir kombinert med andre produkter eller materialer. Kontroller tester og sertifiseringer for andre produkter i tilfelle de blir brukt i kombinasjon med denne over madrassen.
- Puteoverflaten vil tilsvare omgivelsestemperaturen. Ta passende forholdsregler, spesielt om puten kommer i kontakt med ubeskyttet hud.
- Be om assistanse dersom du ikke klarer å utføre en eller flere av handlingene beskrevet i denne bruksanvisningen.



Advarsler


- **IKKE** bruk andre pumper, trekk eller reparasjonsutstyr enn originale ROHO produkter. Dersom andre produkter blir brukt, kan puten skades og garantien falle bort.
- Modifiser **IKKE** puten eller noen andre komponenter. Å gjøre dette kan føre til skade på produktet og vil oppheve garantien.
- La **IKKE** puten komme i kontakt med oljebaserte kremer eller lanolin. De kan bryte ned materialet.
- Langvarig eksponering for ozon kan forringe materialer brukt i puten, påvirke ytelsen til puten og oppheve produktgarantien.
- Endringer i høyde over havet kan kreve justeringer av puten din.
- Hold puten unna skarpe gjenstander.
- **IKKE** utsett puten for sterk varme, åpne flammer eller varm aske.
- Hvis puten har vært i lavere temperaturer enn 32° F (0° C) og utviser uvanlig stivhet, la puten bli like varm som romtemperaturen.
- **IKKE** bruk ventilen som et håndtak for å bære eller dra DRY FLOATATION-putesettet. Bær putesettet ditt i putebasen eller i bærehåndtaket på trekket.
- Undersøk komponentene og putetrekket for skade ved og erstatt det ved behov.
- **IKKE** bruk en inflasjonsventil eller ISOFLO Memory Control som et håndtak; Produktet kan bryte. Løft med putebasen eller med bærehåndtaket på dekslet.

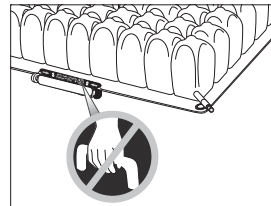

Dette symbolet betyr "IKKE bruk ISOFLO Memory Control som et håndtak, produktet kan bryte."

Deledetaljer

Pakkeinnhold:

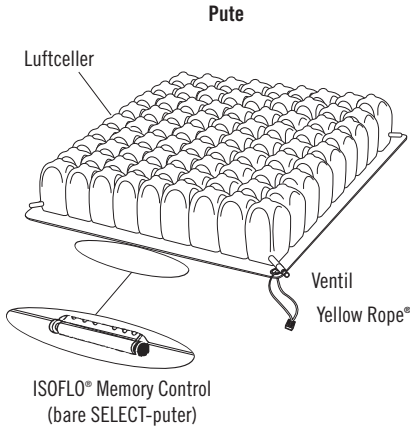

Bruksanvisning



Produktregistreringskort





Reparasjonssett



Håndpumpe

Serienummeretiketten er plassert i bunnen av puten.

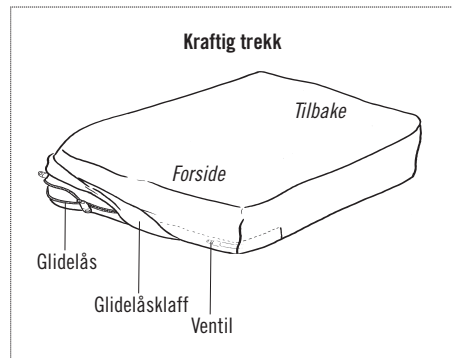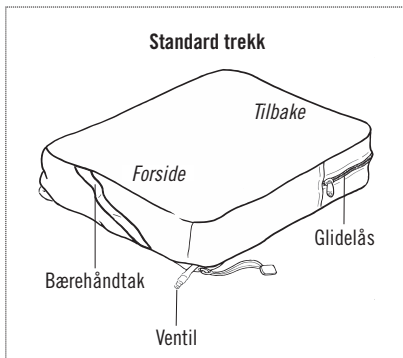

For å bestille reservedeler kontakter du utstyrsleverandør eller ROHO, Inc.

Materialer:

Pute: neoprengummi: uten latex

Ventil: forniklet messing

ISOFLO Memory Control: polypropylen, polykarbonat, aluminium

Standardtrekk: 2 sidig elastisk overside, sider med spacer-tøy, med en glidelås på baksiden av trekket; og en sklisikker bunn med borrelåser for å feste puten til stolen. Se etiketten på trekket for materialinnhold og for å overholde kravene til brennbarhet.

Kraftig trekk: 2 sidig elastisk, væskebestandig topp og sider, med en glidelås foran på trekket; og en sklisikker bunn med borrelås for å feste puten i stolen. Se etiketten på trekket for materialinnhold og for å overholde kravene til brennbarhet.

Putejustering





Viktig sikkerhetsinformasjon:



- Sjekk luftmengde ofte, minst en gang om dagen!
- **BRUK IKKE** en pute med for lite luft eller pute med for luft fordi putens egenskaper vil reduseres eller elimineres, noe som igjen resulterer i økt risiko for skade på hud og annet bløtvev. Hvis det virker som puten ikke holder på luften, eller hvis du ikke klarer å pumpe opp eller slippe ut luften, se i Feilsøking. Ta umiddelbart kontakt med din terapeut, forhandler eller ROHO, Inc. dersom problemet vedvarer.
- Når det er mulig, bør du bruke stroppe- eller borrelåsfestene til ytterligere å feste puten til sitteflaten.

1. Pump opp pute:

- a. Plasser puten i rullestolen med luftcellene vendt opp og den sklisike overflaten vendt nedover. Hør mer personen som foreskrev puten om alternative posisjoner for ventilene og ISOFLO Memory Control (for SELECT-puter).

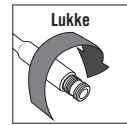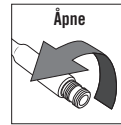

- b. For **SELECT-puter**: Før du pumper opp puten, må du åpne ISOFLO Memory Control slik at alle luftcellene blåses opp. Trykk den grønne ISOFLO-knappen mot den ulåste posisjonen.
- c. Skyv håndpumpens munnstykke over ventilen. Klem på munnstykket, vri for å åpne ventilen og blås opp luftcellene.
- d. Når alle luftcellene er blåst opp og puten begynner å bule litt utover, klem håndpumpens munnstykke og vri for å lukke ventilen helt.
- e. Fjern håndpumpen.
- f. Gjenta oppblåsningen av putene for alle ventiler.

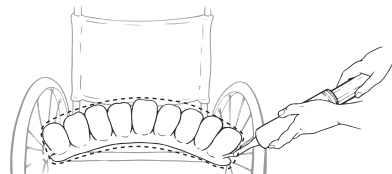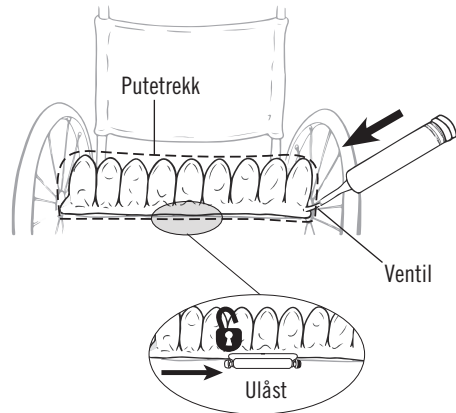


Putejustering, fortsettelse

2. Juster pute:


Etter at puten har blitt overfylt med luft, juster til riktig luftmengde i puten:


- Brukeren bør sitte i stolen i sin vanlige posisjon. Puten skal ligge rett under brukeren.
- Skyv hånden mellom puten og brukeren. Løft beinet litt og kjenn etter det laveste beinfremspringet, og senk deretter beinet til sittende posisjon.
- Åpne ventilen for å fjerne luft, og hold hånden din under brukerens laveste benfremspring.
- Slipp ut luft til du så vidt kan bevege fingertuppene. Lukk ventilen.
- Gjenta putejustering for alle ventiler.

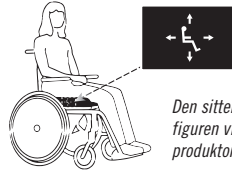

Den sittende figuren viser produktorientering.

Riktig inflasjonsinnstilling for puten

 = ½" - 1" (1.5 cm - 2.5 cm)

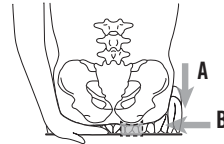


A) Senk deg ned på puten og
B) "Flyt" over putegrunnlaget.

For å justere ENHANCER:

Etter at puten har blitt overfylt med luft, juster til riktig luftmengde i puten:



- Ytre celler/abduksjonsceller: Åpne den indre ventilen og reguler luftmengde til en komfortabel nivå. Lukk ventilen.
- Bakre konturseksjon: Palper sitteknuten. Åpne den ytre ventilen og juster luftmengde til fingertuppene såvidt kan bevege seg mellom sitteknuter og bunnen på puten. Lukk ventilen.

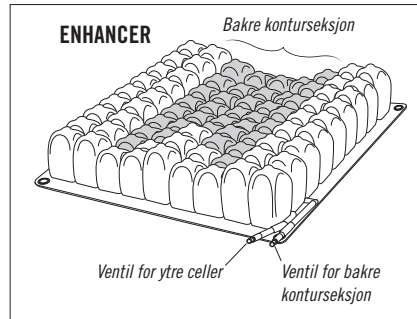

For å justere to-roms puter: For personer med en bekkenskjevhet, er det viktig å først justere det dybeste benfremspringet. For posisjonering foran og bak, juster den bakre delen først. Dobbeltsjekk alltid justeringen for hver del.

For å justere UTVALGTE puter: se neste side.

Putejustering, fortsettelse

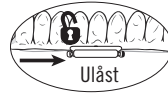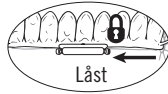

For å justere QUADRO SELECT puten eller CONTOUR SELECT puten for å imøttekomme fast skjevhet i bekkenet, eller en fastlåst bakre bekkenbøyle:

1) Følg alle instruksjoner for justering av pute i denne betjeningsmanualen for å forsikre deg om at puten er justert til riktig inflasjonsinnstilling. 2) Personen skal sitte i sin normale stilling når luften overføres gjennom ISOFLO minnekontroll. 3) Når luftoverføringen er fullført, dytt den røde knappen mot låst stilling. 4) Kontroller på nytt alle rom på puten for å forsikre riktig inflasjonsinnstilling for puten.

For å justere QUADRO SELECT puten for å korrigere en fleksibel skjevhet i bekkenet eller en fleksibel bakre bekkenbøyle:

- Følg alle standard instruksjoner i denne bruksanvisningen for regulering av puten for å sikre at det er en tilstrekkelig luftmengde i puten.
- Kontroller at ISOFLO Memory Control er i ulåst posisjon
- Følg instruksjonene nedenfor.

Fleksibel (korrigerbar) bekkenskevhet:

Juster bekkenet manuelt til ønsket stilling. (For eksempel, hvis venstre side av bekkenet er lavere enn høyre side, la enten brukeren lene mot høyre, eller korriger manuelt til ønsket bekkstilling er oppnådd.)

Trykk inn den røde knappen mot låst posisjon.

Sjekk putens luftsegmenter for å sikre at det er tilstrekkelig luftmengde i hver av dem.

Fleksibel (korrigerbar) bekken tilt bakover:

Kontroller at det er ca (2,5 cm) luft mellom brukerens benfremspring og sitteoverflaten. Øk luftmengden ved behov.

Løft brukerens knær for å presse bekkenet nedover bakerst i puten, og for å presse luft til de fremre segmenter i puten. Dette vil skape en brønn (et lavere, dypere område) for bekkenet, og vil bidra til å forhindre at bekkenet sklir fremover.

Trykk inn den røde knappen mot låst posisjon.

Sjekk putens luftsegmenter for å sikre at det er tilstrekkelig luftmengde i hver av dem.

Ta av trekket og bytte det ut

⚠ Undersøk putetrekket for skade og erstatt det ved behov.

Et putetrekk vil bidra til å beskytte putekomponentene. Et trekk vil også bidra til å holde luftcellene samlet, som kan forenkle overføring med glidebrett.

Fjerne trekket: Åpne glidelåsen og fjern trekket fra puten.

Sette på trekk: Vend trekket og puten opp-ned: Det sklisikre materialet skal være vendt opp og åpningen med glidelås skal være vendt mot deg. Luftcellene skal være vendt ned. Sett puten inn i trekket ved å følge instruksjonene nedenfor.

Hensvis til etiketten på undersiden av puten og til bildet på trekket for å orientere puten og trekket riktig.



Instruksjoner for standardtrekk	Instruksjoner for kraftig trekk
Baksiden av puten skal være vendt mot glidelåsen.	Forsiden av puten (ventilen) bør være vendt mot glidelåsen.
Pass på at alle fire hjørner av puten strekker seg gjennom hjørneåpningene i trekket. Dra forsiktig inflasjonsventilen og det gule tauet gjennom åpningene.	Legg ventilen og Yellow Rope inn i trekket.
Lukk glidelåsen helt. Snu puten over slik luftcellene vender opp. Puten skal ligge flatt på innsiden av trekket med det sklimateriale på bunnen og alle cellene dekket.	

Problemløsning

Ved behov for ytterligere hjelp, kontakt leverandøren, distributøren eller ROHO, Inc.

Holder ikke på luften	Pump opp puten. Kontroller ventilen(e) og slangen(e) for skade. Påse at ventilen er helt lukket. Se etter hull i puten. Hvis hullene er veldig små eller det ikke finnes noen synlige hull, følg instruksene i reparasjonssettet som fulgte med produktet. For skade på ventil eller slange, eller store hull eller lekkasje i puten, se vedlegget Begrenset Garanti eller ta kontakt med kundeservice.
Kan ikke pumpe opp eller slippe luften ut av puten	Bekreft at ventilen er åpen. Kontroller ventilen(e) og slangen(e) for skade. Når du blåser opp SELECT-puter: Bekreft at den grønne knappen på ISOFLO Memory Control er skjøvet mot midten av ISOFLO i den ULÅSTE posisjonen slik at alle kamrene blåses opp.
ukomfortabel eller ustabil	Bekreft at: <ul style="list-style-type: none"> - puten har ikke for mye luft (se putejustering.) - putecellene og toppen av trekket vender opp. - puten er sentrert under brukeren. - puten er tilpasset brukeren og rullestolen Gi brukeren minst en time til å venne seg til puten
Puten sklir på rullestolen	Påse at den sklisikre bunnen av putetrekket vender vekk fra brukeren. Bruk retningsmerkene på puten og trekket for å innrette puten. Bruk borrelåser for ytterligere å feste puten til rullestolen.

Rengjøring av puter og trekk



Advarsel:

- Vasking og desinfisering er to separate prosesser. Vasking må skje før desinfisering. Før bruk av annen person: vask, desinfiser, og sjekk at produktet fungerer skikkelig.
- Følg produsentens retningslinjer for blekemidler og bakteriedrepende desinfiseringsmiddel.
- MERKNAD om sterilisering: Høye temperaturer fremskynder aldring og skader produktets sammensetning. Produkter fra ROHO er ikke pakket i steril tilstand, og det er ikke ment at de skal steriliseres før bruk. Dersom regelverket krever sterilisering: Først følger du instruksjonene for rengjøring og desinfisering; deretter åpner du oppblåsningsventilen og bruker lavest mulig steriliseringstemperatur, men ikke mer enn 70 °C, i så kort tid som mulig. IKKE autoklaver.

Stell av trekket

Pleie av trekket: Fjern krok-festestykkene fra bunnen av trekket før du vasker og desinfiserer. Vask med like farger.

Rengjøring av trekket: Fjern trekket. Vask i maskin i kaldt vann (30 °C) med mildt vaskemiddel, på skånsom vask eller tørk det rent med et nøytralt vaskemiddel og varmt vann.



Desinfisering av trekket: Vask for hånd i kaldt vann (30 °C) og bruk 1 del flytende blekemiddel per 9 deler vann. Hold produktet vått med blekemiddelet i 10 minutter, og skyll grundig. Du kan også vaske i maskin i varmt vann (60 °C). Tørk i tørketrommel på lav temperatur..



Putehåndtering



Advarsel: Ventilene MÅ være lukket for å forsikre at vann ikke kommer inn i produktet under vasking eller desinfisering.



Forsiktig: Bruk av følgende stoffer kan skade puten: slipemidler (stålull, skuresvamp); etsende, maskinoppvaskemiddel; rengjøringsmidler som inneholder petroleum eller organiske løsemidler, inkludert aceton, toluen, metyletylketon (MET), nafta, dry cleaning væske, lim fjerningsmiddel; oljebaserte kremer, lanolin eller fenolbaserte desinfeksjonsmidler; ozongass; rengjøringsmetoder der det brukes ultrafiolett lys.

Håndvask og desinfiser av puten (Foretrukket metode)

Håndvask av puten: Fjern trekket, lukke ventilen(e) og plasser i en vask. Vask for hånd med en mild flytende håndsåpe, håndoppvaskemiddel, vaskemiddel eller et universalt vaskemiddel (følg anvisningene på blekemiddel flasken). Skrubb forsiktig alle putens overflater med en myk plastbørste, svamp eller klut. Skyll med rent vann. Lufttørk. Må IKKE utsettes for direkte sollys.



Forsiktig: Skyll nøye. Vaskemiddelrester kan føre til at luftceller kleber seg sammen.

Desinfiser puten for hånd: Følg håndvask instruksjonene, og bruk 1 del flytende blekemiddel per 9 deler vann. Hold produktet vått med blekemiddelløsningen i 10 minutter. Skyll deretter grundig med rent vann. Lufttørk.



Rengjøring av puter og trekk, fortsettelse

Rengjøring av puten, fortsettelse

Maskinvask og desinfisering av puten



Advarsler:

- Ventilene **MÅ** være lukket for å forsikre at vann ikke kommer inn i produktet under vasking eller desinfisering.
- Maskinvask kan føre til slitasje og skade, inkludert kutt og rifter i puten og at produktinformasjonen løsnar fra puten. Vask og desinfisering av pute for hånd og lufttørking anbefales på det sterkeste.
- Høy vanntemperatur kan også forårsake avfarging og ødelegge etiketten.
- Utsett ikke puter til temperaturer over 70 ° C, dette kan skade puteelementene.
- For maskinvask eller desinfisering må du huske å kontrollere at vaskemaskinens kapasitet er tilstrekkelig. En vaskemaskin som ikke er stor nok, må ikke fjerne all jord eller forurensninger fra en pute.
- Hvis du bruker en skadet pute, reduseres eller elimineres fordelene av pute, og det vil øke risikoen for hud og andre myke vev.

Forbered puten for maskinvask:

- 1) Fjern trekket fra puten og steng luftventil(e).
- 2) Se etter skader på puten, og reparer alle hull (henvis til reparasjonsettets anvisninger som følger med produktet).
- 3) Fjern flekker eller lukter ved behov: Legg puten i varmt vann og en desinfiserende rengjøringsmiddel. Skrub forsiktig, ved bruk av en myk plast børste og skyll med rent vann.
- 4) Slipp luften ut av puten: Åpne opp ventilen og rull sammen puten, start i hjørnet på motsatt side av ventilen. Etter at du har fått ut så mye luft som mulig, lukk ventilen.
- 5) Vær obs på skarpe kanter i vaskemaskinen som kan skade puten.

Maskinvask av puten:

- 1) Plasser puten i en vaskepose og deretter i vaskemaskinen. Når du bretter puten, pass på at luftcellene peker utover.
- 2) Bruk varmt vann (30° - 40°C) og vaskemiddel eller en maskin- og pute-sikkert rengjøringsmiddel/biocid, plassert i vaskemiddelbeholderen.
- 3) Rolig sykklus: Bruk en maskinnstilling som ikke bruker høy omdreiningshastighet.



Forsiktig: Skyll nøye. Vaskemiddelrester kan føre til at luftceller kleber seg sammen.

Desinfiser puten i maskin: Følg maskinens vaskeanvisning ja du bør bruke varmt vann 60 ° C (140 ° F). Bruk en Biocid (se produsentens anvisninger). Vær forsiktig med blekemiddel: Bruk kun en fortykning av 1 del blekemiddel per 9 deler vann. Skyll med rent vann.



Fjern puten fra vaskeposen og lufttørk. For raskere tørking, bruk en håndholdt hårføner, som du ikke holder nærmere enn 15 cm fra puten, og hold den i bevegelse.



Advarsler: Overoppheting av neoprengummi kan forårsake permanent skade på produktet.



= "Bruk en håndholdt hårføner."

Produktspesifikasjoner

Dimensjoner og vekt for standardpute:

pute	Høyde	Gjennomsnittlig vekt*
LOW PROFILE-pute med ett kammer	2¼" (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
LOW PROFILE-pute med to kamre	2¼" (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
QUADTRO SELECT LOW PROFILE	2¼" (5,5 cm)	2,5 lbs. (1,1 kg)
MID PROFILE-pute med ett kammer	3¼" (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
MID PROFILE-pute med to kamre	3¼" (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
QUADTRO SELECT MID PROFILE	3¼" (8,5 cm)	3,0 lbs. (1,4 kg)
HIGH PROFILE-pute med ett kammer	4¼" (10,5 cm)	3,25 lbs. (1,5 kg)
HIGH PROFILE-pute med to kamre	4¼" (10,5 cm)	3,25 lbs. (1,5 kg)
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE	4¼" (10,5 cm)	3,25 lbs. (1,5 kg)
CONTOUR SELECT	2¼" til 4¼" (5,5 til 10,5 cm)	3,5 lbs. (1,6 kg)
ENHANCER	2¼" til 4¼" (5,5 til 10,5 cm)	3,5 lbs. (1,6 kg)

* Merk: Gjennomsnittlig vekt er basert på puter med 9 x 9 celler ((16½" x 16½" x 42,0 cm x 42,0 cm).

pute	Minste bredde			Minste dybde			Største bredde			Største dybde		
	celler	tommer	cm	celler	tommer	cm	celler	tommer	cm	celler	tommer	cm
LOW PROFILE-pute med ett kammer	6	11½	29,0	6	11½	29,0	13	23½	59,5	11	20	50,5
LOW PROFILE-pute med to kamre	6	11½	29,0	6	11½	29,0	11	20	50,5	11	20	50,5
QUADTRO SELECT LOW PROFILE	5	11	28,0	6	11¾	30,0	13	24½	62,5	12	22	56,0
MID PROFILE-pute med ett kammer	7	13¼	33,5	7	13¼	33,5	11	20	50,5	11	20	50,5
MID PROFILE-pute med to kamre	8	14¾	37,5	9	16½	42,0	8	14¾	37,5	9	16½	42,0
QUADTRO SELECT MID PROFILE	8	16	41,0	8	15¼	38,5	10	19½	49,5	10	18½	47,0
HIGH PROFILE-pute med ett kammer	6	11½	29,0	6	11½	29,0	15	26¼	68,0	14	23½	59,5
HIGH PROFILE-pute med to kamre	6	11½	29,0	6	11½	29,0	11	20	50,5	12	21¾	55,0
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE	6	12¾	32,5	6	11¾	30,0	14	26¼	67,0	14	23¾	60,0
CONTOUR SELECT	7	14½	36,5	8	15¼	38,5	13	24½	62,5	12	22	56,0
ENHANCER	8	14¾	37,5	8	14¾	37,5	11	20	50,5	11	20	50,5

Merk: Kontakt kundestøtte for spesifikke putestørrelser.

Forventet levetid til puten: 5 år

Lagring, avhending og resirkulering

Lagring: Rengjør og desinfiser produktet før lagring. Knepp segmentene fra hverandre, åpne ventilene og la luft slippe ut av produktet. Oppbevar produktet i en boks som beskytter det mot fuktighet, forurensninger eller skader.

Avhending: Når produktet er avhendet og håntert i overensstemmelse med tiltenkt bruk, er det ingen kjente miljøfarer tilknyttet noen av produktdelene nevnt i denne brukerhåndboken. Kast produktet og/eller delene iht. gjeldende lokale lovmessige retningslinjer. Ved forbrenning må det utføres av et kvalifisert, lisensiert anlegg for avfallshåndtering.

Material resirkulering: Kontakt det lokale renholdsverket for alternativer til resirkulering av produktet. For mer informasjon om resirkulering, kontakt ROHO, Inc.

Begrenset garanti

Begrenset garantiperiode fra produktets opprinnelige kjøpsdato: UTVALGTE puter: 36 måneder; Alle andre TØRR FLotasjon produkter: 24 måneder. Garantien gjelder ikke punkteringer, rifter, forbrenning, missbruk og gjelder heller ikke det avtakbare trekket. Se også det begrensede tillegget som følger med produktet, eller ta kontakt med kundeservice.

permobil | SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

permobilus.com



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.

T20200
Print Date:

Rev. 05/04/2018
Qty:



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

