

MemoAssist

BRUKSANVISNING

MemoAssist, den og enkle bilde og lyd basert kalender som er designet til mennesker med særlige behov.

Funksjoner

Dagsplan	2
Opprette nye hendelser	3
Redigere eksisterende hendelser	4
Ukeplan	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Visning av hendelser	6
Innstillinger	7

Dagsplan

14:01 man. 25. feb.

61%

Trykk her for å gå til en hvilken som helst dag

Mandag

25. feb. 2019

Trykk her for å gå til neste dag

Lunsj
09:40 - 10:10

Frokost
09:40 - 10:10

Pakke bae
09:40 - 10:10

Trykk på hendelse for å se alle detaljer

Dag

14:01

Opprette nye hendelser ved å trykke her

På Dagsplanen viser dagens hendelser. Planen er delt inn i morgen, dag og kveld seksjoner. En tidslinje på venstre side viser hvor langt man er på dagen.

Opprette nye hendelser

Klikk på den runde røde ring med et hvitt kryss og Velg "Nytt Punkt".


En hendelse må ha minst et starttidspunkt. I tillegg kan hendelsen bestå av følgende valgfrie elementer: et bilde, en innspilt lyd, en tittel, en varighet, en repetisjon, en beskrivelse, en veiledning eller en alarm lyd.

The screenshot shows the 'New Event' screen in an iPhone calendar app. The background is a calendar grid for Monday, February 25th, with events like 'Lunsj', 'Frokost', and 'Pakke baggen'. The foreground is a form for creating a new event. Callouts point to various fields:

- Trykk Her når du er ferdig**: Points to the 'Ferdig' (Done) button in the top right corner.
- Trykk Her for å velge et bilde**: Points to the image selection icon (a camera icon) next to the 'Bilde' field.
- Trykk Her for å spille inn en lydmelding**: Points to the 'Opptak' (Record) button in the 'Opptak lydbeskjed' section.
- Angi starttid og evt varighet.**: Points to the 'Tidspunkt og varighet' section, which includes fields for start time (man. 13:15) and duration (30 minutter).

The form fields include: 'Tittel', 'Bilde', 'Opptak lydbeskjed' (with 'Spill av' and 'Opptak' buttons and a progress bar), 'Tidspunkt og varighet', 'Gjentakelse' (set to 'Aldri'), and 'Beskrivelse'. A red plus sign button is visible at the bottom right of the calendar grid.


Redigere eksisterende Hændelser

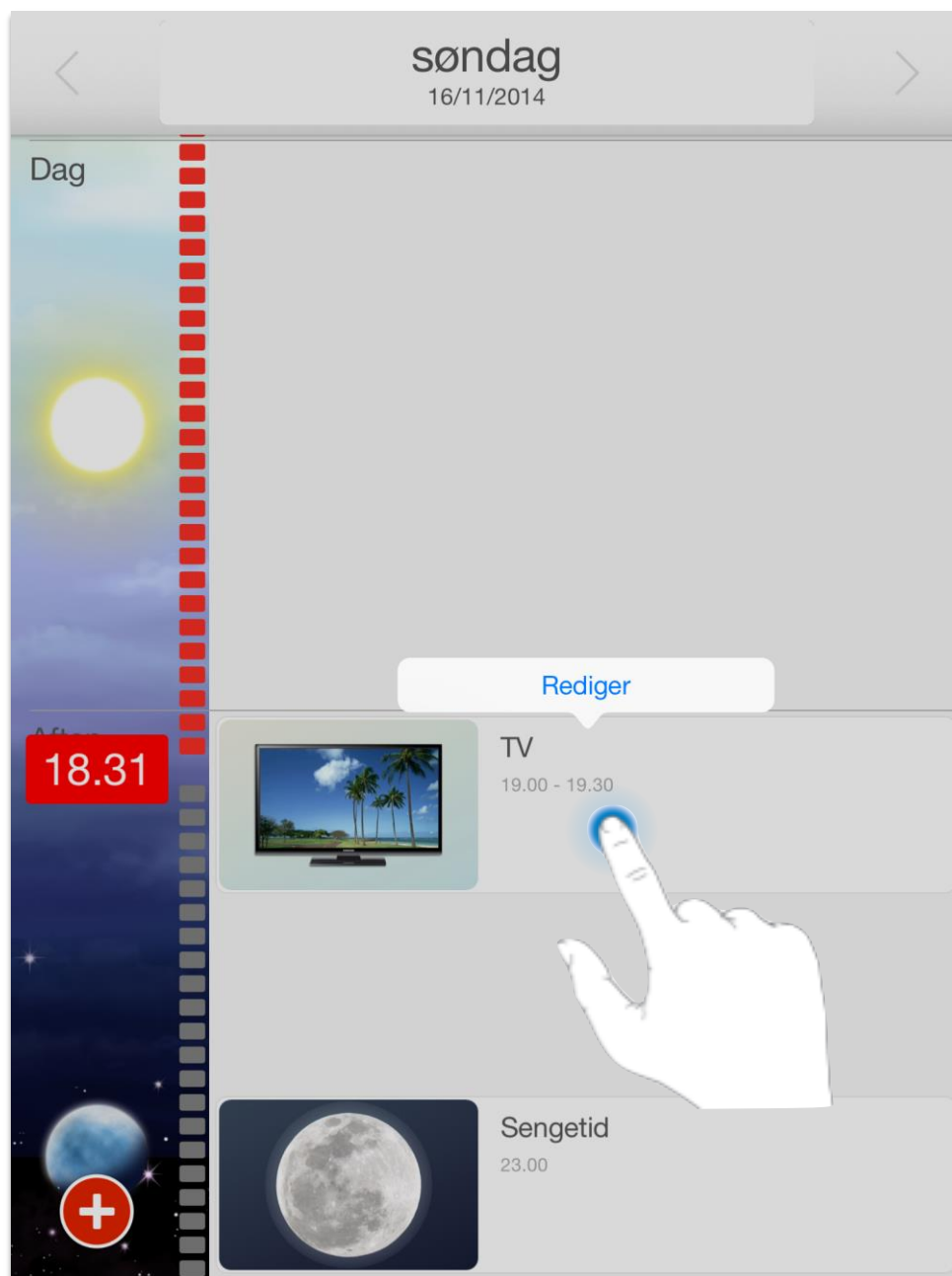

Tryk og Hold fingeren 1-2 sekunder på hændelsen du ønsker å redigere. Deretter vises "Rediger"-knappen, som du må trykke for å redigere hændelsen.

Ukeplan

På ukeplanen er alle hendelser som er opprettet med "Vis Uke» under rød knapp med plusstegn. Hvis du vil skjule bestemte hendelser i den ukentlige tidsplanen, fjerner du haken "Ukeplanen" når du redigerer hendelsen.

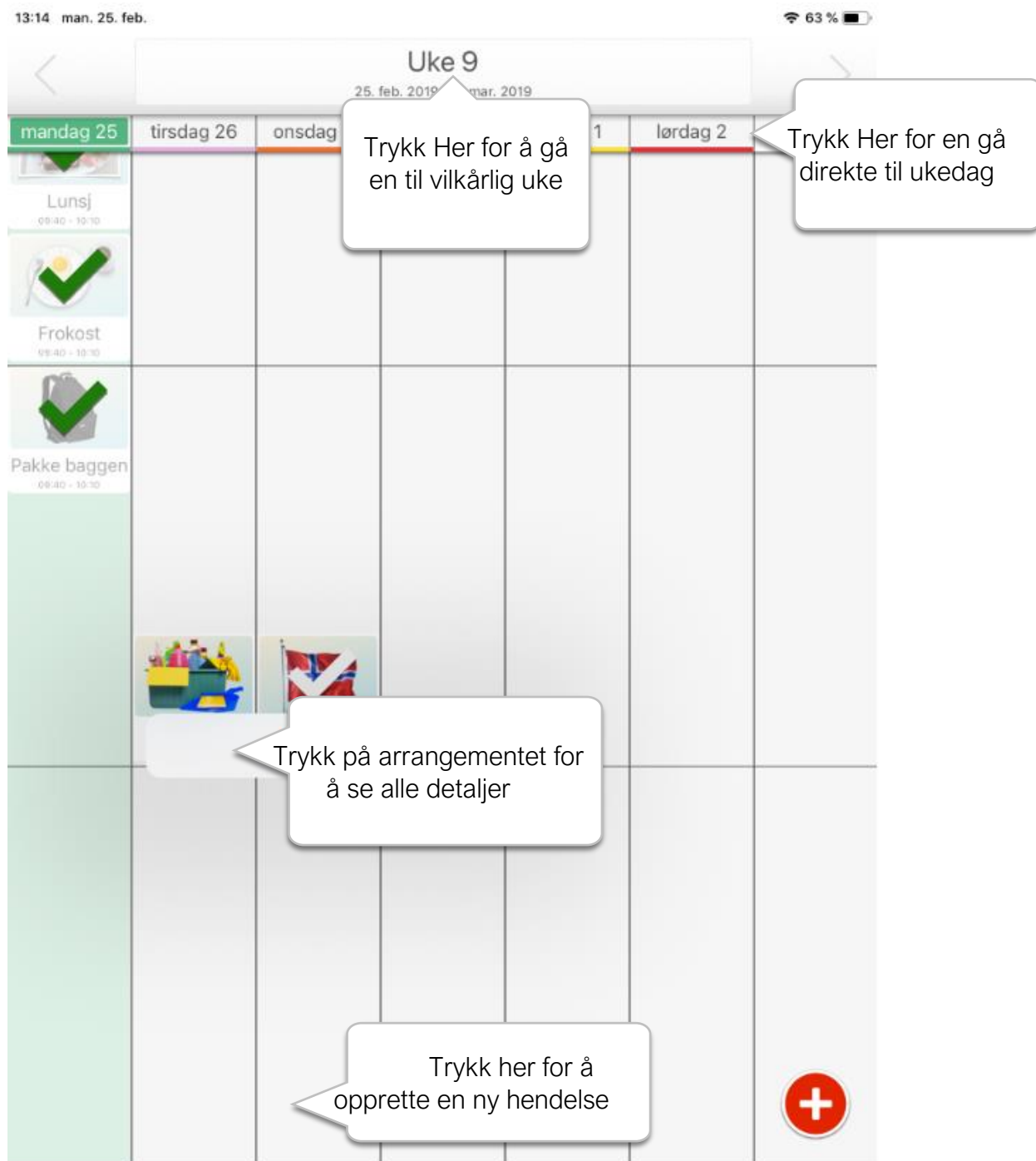

Visning av hendelser



The screenshot shows a TV event interface. At the top, a Samsung TV displays a tropical beach scene with palm trees. Below the TV is a circular progress indicator with a red segment and the text "5:41". A callout box points to the indicator with the text "Viser hvor lang tid som gjenstår for hendelsen". Below the TV, the text "TV" and "21.35 - 22.05" is displayed. At the bottom, there are two buttons: a green button with a white checkmark and a red button with a white 'X'. Callout boxes point to these buttons with the text "Trykk her for å markere hendelsen som utført." and "Trykk her for å gå tilbake" respectively.

5:41

Viser hvor lang tid som gjenstår for hendelsen

TV

21.35 - 22.05

Trykk her for å markere hendelsen som utført.

Trykk her for å gå tilbake

Når en hendelse starter, vil Memoassist automatisk gå til hendelsesvisningen. Memoassist vil prøve å minne deg om hendelsen til du merker det som utført.

Innstillinger

Mine symboler

Under 'Mine Symboler' kan du holde og organisere dine egne symboler og bilder i MemoAssist. Du kan gi navn til dine symboler ved å holde fingeren på symbolet i 1-2 sekunder og deretter velge rediger. Med søk du kan enkelt finne tilbake ønsket bilde. Symboler du ikke lengre bruker kan fjernes med funksjonen "Fjern".

Utseende

Under menupunktet "Utseende" kan du tilpasse MemoAssists utseende. Sett dine egne farger for uke, velg mellom digital eller analog klokke og velg mellom forskjellige utseender av MemoAssist. Du kan også her velge timer på hendelsen og tidsintervall.

Alarm

Under punktet 'Alarmer' kan du tilpasse MemoAssists Alarmer. For en periode, ønsker du ikke å motta alarmer, for eksempel fordi du skal på ferie, så slå av alarmer her. Du kan også endre hvor ofte alarmer skal gjentas, samt hvilken standard-lyd du vil bruke når du opprette nye hendelser.

Maler

Under punktet «Maler» kan du tilpasse MemoAssists Maler. Du kan opprette en-dagers hendelser og enkelt gjenbruke dem på andre dager. F.eks.helligdager eller andre spesielle dager.



Poeng system

Slå på poengsystemet for å motivere brukeren av kalenderen, og opptjene "stjerner" når hendelser markeres som utført. Man får poeng for hvert punkt som markeres som utført. Jo nærmere det fastsatte tidspunktet som hendelsen utføres, desto flere poeng får man.

Premier

Opprett en «premie» som brukeren kan forsøke å oppnå ved å markere hendelsen som utført. En «premie» består av et bilde av det som brukeren oppnår, samt en kort beskrivelse. En «premie» tilknyttes de hendelser som utløser et trinn av «premien».

Manuel Timer

Slå på denne funksjonen for å selv kunne starte hendelses-timeren i stedet for at de starter automatisk. Du starter hendelses-timeren ved å trykke på den.

Betjeningsfri

Aktiver Betjeningsfri for å stille inn MemoAssist slik at den ikke krever noen betjening av brukeren. Det betyr blant annet at man ikke trenger å markere et punkt som fullført og at påminnelser kun gjøres én gang.

Beacons

Slå for funksjonen «Beacons» for å gjøre det mulig å kjøre lokasjonsbestemte guider. Ved hjelp av en liten fysisk sender (Beacon), kan MemoAssist vise nøyaktig hvor man er plassert. Når MemoAssist er i nærheten av senderen, så kan MemoAssist vise en bestemt guide. Dette kan brukes for eksempel for å vise en «kveldsrutine» på badet, automatisk når MemoAssist-brukeren er på badet.

Fjernstyring

MemoAssist kan fjernstyres av App'en MemoRemote som er i AppStore. Med MemoRemote kan andre se innholdet fra MemoAssist, nøyaktig som du selv ser det, og følge med på om hendelser blir utført og evt. opprette hendelser for deg. De kan også få informasjon hvis du glemmer valgte hendelser.

For å aktivere fjernkontrollen, må du kontrollere at Ipad/Iphone benytter iCloud - som er en gratis tjeneste fra Apple, innebygd og for Ipad/Iphone. Du kan se under Ipads Innstillinger om du allerede har slått på iCloud.

Når iCloud er påslått på Ipad, kan du aktivere fjernstyring under Innstillinger I MemoAssist.

Hos brukeren av MemoAssist:

- 1) Slå for fjernstyring i Innstillinger i MemoAssist (Må lyse grønt)
- 2) Klikk på legg personer (blå penn)
- 3) Velg hvordan du vil sende invitasjon for å fjernstyre MemoAssist
- 4) Sende Invitasjon til den bruker som skal kunne fjernstyre deg. Brukeren må ha en iCloud-konto og du en bruker for MemoAssist.

Hos den brukeren som skal fjernstyres:

- 1) Slett alle kopier av MemoAssist fra den enheten du må bruke for å fjernstyre med
- 2) Last ned App'en MemoRemote fra Appstore
- 3) Klikk lenken/koblingen i meldingen du får fra MemoAssist brukeren.

MemoRemote åpner nå automatisk og legger til brukeren. Du vil kunne se brukerens navn i listen.