

Feilsøking

Hvis	Prøv dette
LED-lys blinker rødt	Batterinivået er lavt. Lade Vibio med medfølgende ladekabel.
LED-lysene lyser ikke	Batteriene er tomme. Lad Vibio i ca. 1,5 time.
Vibio kan ikke kobles til mobiltelefonen min	<p>Start med å kontrollere Bluetooth-tilkoblingen på appens startside. Hvis Vibio -ikonet er rødt og overstreket kan du prøve følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Beveg deg innen rekkevidde. Flytt mobilen nærmere Vibio.2 Slå Bluetooth av og på. Sveip for å åpne kontrollcenteret / hurtiginnstillingspanelet på mobilen og trykk på Bluetooth-ikonet. Hvis den fremdeles ikke virker, må du nullstille og starte Vibio bed shaker og appen manuelt. Prøv følgende:1 Tving appen til å avslutte. Merk at det er ikke nok å bare lukke den.2 Koble fra Vibio. Gå til Innstillinger > Bluetooth. Trykk på ⓘ / ⓘ og Glem denne enheten for å koble fra "Vibio". Sørg for at Bluetooth er på.3 Nullstill Vibio. Trekk og hold i stroppen til LED-lysene begynner å flimre. Slipp og trekk på nytt til LED-lysene begynner å pulseri i blått.4 Konfigurering Vibio. Start Vibio -appen igjen og følg instruksjonene.

Tiltenkt bruk

Personlig vibrerende alarmentet som kan brukes med en mobiltelefon-applikasjon til vekking.

Strøm og batteri

Batteristrom: 1 × 3,7 V AA Litium-ion
Strømforbruk: Aktiv med sterk vibrasjon: < 1000 mA, Dvale: < 100 µA
Driftstid: Opptil 10 dager / lading
Ladetid: Opptil 1,5 time @ 500mA
Ladestrom: Opptil 500 mA, 5V DC

Kompatibilitet

iOS11 / Android 4.4 og nyere,
iPhone 5s og nyere /
Moderne androide enheter

Mål og vekt

Størrelse: 27 × 94 × 94 mm
Vekt: 153 g, 5,4 oz.

Frekvens og rekkevidde

Bluetooth-frekvens: 2402 – 2480 MHz
Utgangsstrøm: Maks 2,5 mW (4 dBm)
Rekkevidde: Opptil 30 m, 33 fot, fritt felt.
Konnektivitet: Bluetooth 4.2

Kabler og tilkoblinger

Kabellengde: 1 m, 39"
Kontakter: USB type-A til USB Micro-B

Vedlikehold og rengjøring

Vedlikeholdsfrf Rengjøres med en tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolspray, alkohol eller slipemidler.

Juridiske krav

samsvar med CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE,
Der Grüne punkt

Miljøkrav

Bare til innendørs bruk
Temperatur: 0°– 35° C, 32°–95° F
Relativ fuktighet: 5 % – 95 %

Sikkerhet og garantiforhold

Se egen brosjyre

Bellman & Symfon AB

Södra Långebergsgatan 30, 436 32
Askim, Sverige. Telefon +46 31 68 28 20
E-post: info@bellman.com
© og TM 2019, Bellman & Symfon AB,
kopiering forbudt.

BE1221_019ANNO02




NORSK

Du trenger

- En mobiltelefon med iOS11 / Android 4.4 eller nyere.
- En USB-strømadapter

I esken


- 1 Ladekabel
- 2 Vibio sengevibrator

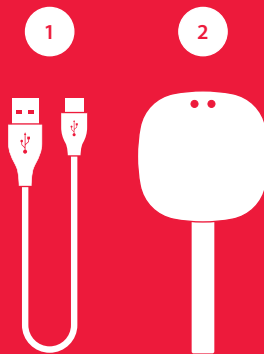

Vibio sengevibrator, BE1221

Se etter de blinkende LED-lysene

- **Hvitt** betyr at den er aktivert av en alarm eller kommuniserer med mobiltelefonen.
- **Blått** betyr at den er klar til å pares.
- **Grønt** betyr at den lader.
- **Gult** betyr at du har et innkommende anrop eller en melding.
- **Rødt** betyr at batterinivået er lavt.

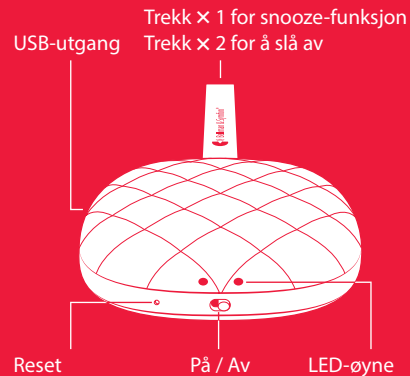


Installer Vibio

1 Koble til strøm

Koble ladekabelen til Vibio og koble kontakten til en USB-strømadapter eller en USB-utgang på datamaskinen.

2 Slå den på

Skyv av/på-bryteren mot høyre og hold Vibio nær telefonen.

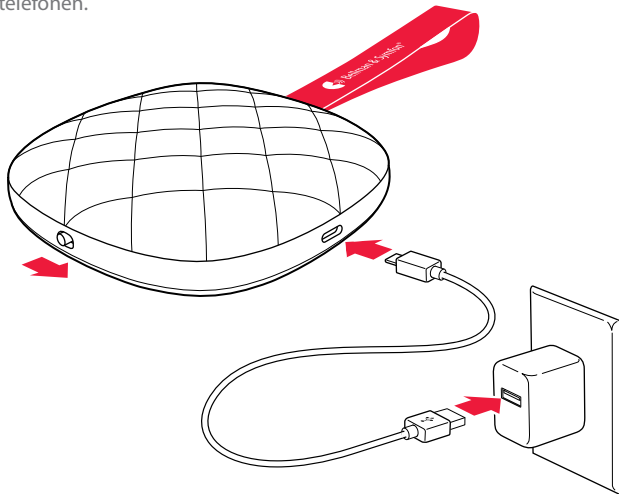

3 Installer appen







Last ned **Vibio** app fra App Store® eller Google Play™ og følg konfigurasjonsinstruksjonene.





Bruke appen


Administrere alarmer

-  **Legge til.** Trykk på pluss-knappen for å legge til en ny alarm.
-  **Redigere.** Trykk på blyant-knappen for å endre en alarm.
-  **Slett.** Trykk på minus-knappen for å slette en alarm.
-  **På / Av.** Trykk på av/på-knappen for å aktivere eller deaktivere en alarm.

Overvåking Vibio

-  **Tilkobling.** Vibiosymbolet viser tilkoblingsstatus.
-  **Batteri.** Batterisymbolet viser Vibios batterinivå.

Lære mer

-  **Hjelp.** Trykk på Meny > Hjelp for å lære mer om Appen.

