



QUICKIE®

HELIUM

AKTIV, LETT,
PERSONLIG,
EFFEKTIV OG
SMART!

QUICKIE®

SOPUR®

RGK

zippie®

≡ JAY®

Breezy®

STERLING®

GEMINO

15. desember 2019

LIVE WITHOUT LIMITS


QUICKIE[®]
Live without limits.

HELIUM



reddot design award
winner 2010



Quickie Helium i
post 1 er godkjent i
kollisjonstest.

Quickie Helium

Avbildet modell kan avvike fra standard i Norge.

Helium er den letteste av våre edelgasser, men også en av de letteste aktive rullestoler for voksne! Ved å benytte den nyeste teknologi innen rammeproduksjon fra sykkel-industrien, har vi nå gleden av å introdusere et unikt produkt på det norske markedet! Selv om stolen er svært lett, har den også mange justeringsmuligheter slik at den kan tilpasses den enkeltes behov!

AVANSERT TEKNOLOGI - LAV VEKT:

Helium bygger på den aller siste teknikken som benyttes for morgendagens sykkel- og motorsportsindustri. Den er designet og produsert gjennom en aluminiumsteknikk og spesialutforming som gir et ultralett resultat. (Hydroform-teknologi).

JUSTERINGSMULIGHETER I BEHOLD:

Store justerings- og tilpasningsmuligheter betyr ikke lenger at du må gi avkall på stabilitet, kjøreegenskaper eller lav vekt. Helium beholder hele skalaen av ergonomiske justeringsmuligheter og styrken/stabiliteten i fastrammen.

ERGONOMI

Løfting og forflytning handler om teknikk og vekt. Helium er en ultralett stol og veier kun 5,2kg*) når hjulene er tatt av. Nøkkelen til enklere løft er 2 ergonomiske håndtak med gummigrep. Disse er plassert slik at rullestolen balanseres lett under løft. Dette reduserer risiko for overbelastning i skuldre og armer.

Ønsker du en enda lettere stol? Se **Helium Lett** på side 14-17.

LIVE WITHOUT LIMITS



Aktiv fastramme: **Quickie Helium**

Som standard leveres Quickie Helium med:

- Setetrekk med 1 lomme
- Rygg nedfellbar og dobbeltlåsbar
- Ryggør med korte kjørehåndtak, høydejusterbare
- Velkrorygg med nylon ryggtrekk
- Klesbeskyttere plast avtagbare
- Fotplate rørmøddell lettvekt med plate
- Svinghjul 5" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" lettvekt
- Dekk 24" Right Run
- Drivring 24" alu søveloksert
- Brems høy kompositt



Quickie Helium artikkelnumre hovedprodukt:

Våre artikkelnumre er bygget opp slik: HLMsbsd: HLM=Helium sbsd= setebredde setedybde.

Eks: HLM4042 = Helium i post 1, setebredde 40 og setedybde 42. HMS art.nr står foran våre art.nr.

HMS .nr:	Lev art.nr:	HMS.nr:	Lev art.nr:	HMSnr:	Lev art.nr:	HMSnr:	Lev art.nr:
179120	HLM3234	179136	HLM3634	179152	HLM4034	179168	HLM4434
179121	HLM3236	179137	HLM3636	179153	HLM4036	179169	HLM4436
179122	HLM3238	179138	HLM3638	179154	HLM4038	179170	HLM4438
179123	HLM3240	179139	HLM3640	179155	HLM4040	179171	HLM4440
179124	HLM3242	179140	HLM3642	179156	HLM4042	179172	HLM4442
179125	HLM3244	179141	HLM3644	179157	HLM4044	179173	HLM4444
179126	HLM3246	179142	HLM3646	179158	HLM4046	179174	HLM4446
179127	HLM3248	179143	HLM3648	179159	HLM4048	179175	HLM4448
179128	HLM3434	179144	HLM3834	179160	HLM4234	179176	HLM4634
179129	HLM3436	179145	HLM3836	179161	HLM4236	179177	HLM4636
179130	HLM3438	179146	HLM3838	179162	HLM4238	179178	HLM4638
179131	HLM3440	179147	HLM3840	179163	HLM4240	179179	HLM4640
179132	HLM3442	179148	HLM3842	179164	HLM4242	179180	HLM4642
179133	HLM3444	179149	HLM3844	179165	HLM4244	179181	HLM4644
179134	HLM3446	179150	HLM3846	179166	HLM4246	179182	HLM4646
179135	HLM3448	179151	HLM3848	179167	HLM4248	179183	HLM4648

Velg farge:

Det finnes over 25 mulige farger uten pristillegg. Se fargekart på side 42 og mulige farger på bestillingsskjemaet.



Ryggen gir god plass til montering av fast JAY rygg.



Quickie Helium med sin innovative 'ovale' formede ramme. Sammenslått er Helium enkel å plassere samt løfte inn/ut av bilen.



Innovativ lettvekt ryggvinkel innstilling -31° til +15°. Ryggen kan låses i nedfelt posisjon.



Skjult justering av svinghjulsgafler. En patentert mekanisme for enkel justering av gafler. Gaffelen er justerbar i „alle“ ledd.



Visuelt hjelpemiddel for optimal tilpassning av drivhjulsinnstilling (toe in / toe out).



Gjennom distansestykker kan setehøyde bak justeres for å etterkomme brukers behov.



Ryggen kan fås som fast, nedfellbar eller nedfellbar med lås.



Rask, enkel og lett tyngdepunktsjustering. Akselbraketten flyttes trinnløst.



Det finnes mange typer svinghjul og gafler som standard tilbehør. Her vises svinghjul softroll med aluminiumsfelg. Art.numre på gafler finnes på side 62.



Bremsen høy kompositt er ergonomisk og har lav vekt (standard på Helium).



Komfort ryggtrekk Alcantara kan fås i brunt eller grått materiale.




Snoll-On aktiv-hjul for bruk på ujevnt underlag som f.eks. snø eller grus. Kan lett tas av og på. Art.nr: se side 86.

LIVE WITHOUT LIMITS



Tekniske spesifikasjoner Quickie Helium i post 1

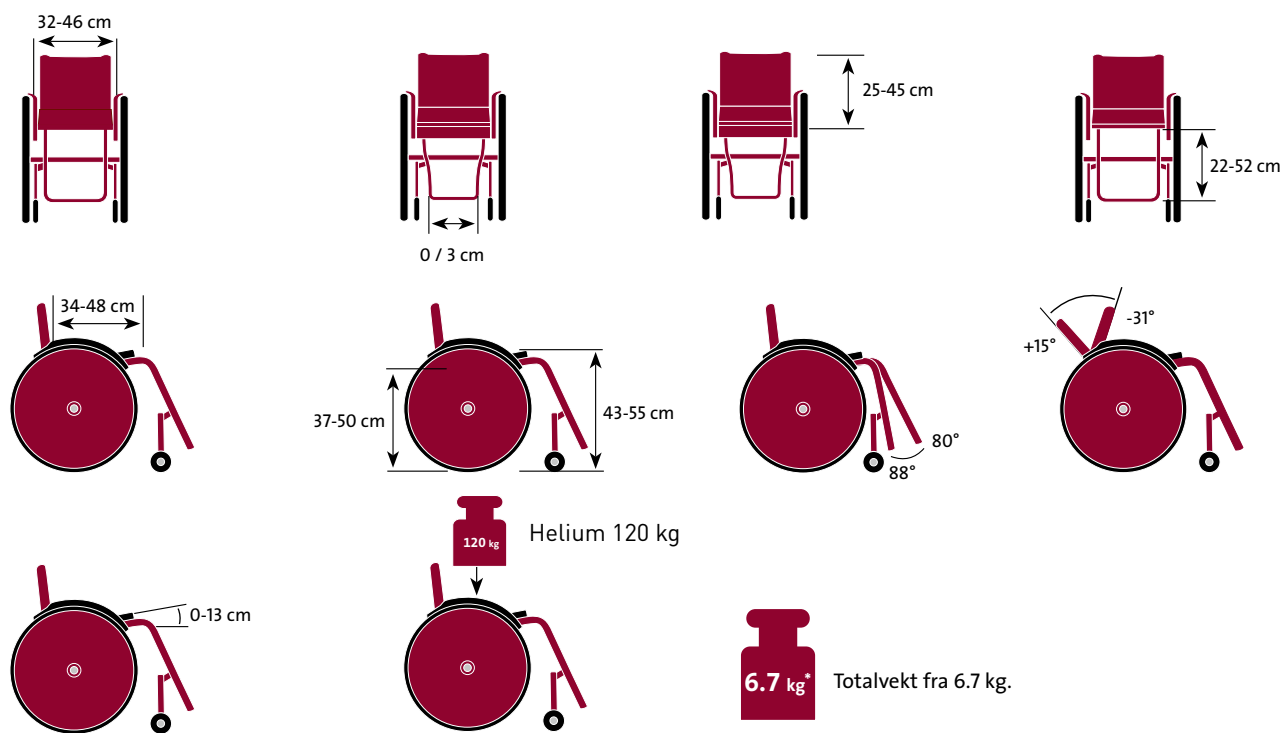

Setebredde:	32 - 46 cm	U/V-front:	0, 3 cm
Setedybde:	34 - 48 cm	Camber:	0°, 3°, 6°
Rygg høyde:	25 - 45 cm	Maks. brukervekt Quickie Helium:	120 kg
Ryggvinkling:	-31° - +15°	Helium (post 1) har godkjent kollisjonstest etter	ISO 7176-19
Legglengde:	22 - 52 cm		

For mer informasjon om valgmuligheter og tilbehør, se Bestillingskjemaet.

* Konfigurasjon: setebredde og setedybde 40 cm, inklusive fotplate, brems og klesbeskyttere, ekskl sittepute.

Utforsk Quickie Helium på: www.quickiewheelchairs.eu



Sunrise Medical AS,
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00 F: 66 96 38 80
E: post1@sunrisemedical.no





MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.tor.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Troms, Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel.
Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: +47 66 96 38 00
F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no