

**DAYLITE ER NY TØMBAR  
URINOPPSAMLINGSPOSE /FLASKE.  
DEN ER MYK OG FORMBAR OG KAN  
ANVENDES AV MENN OG  
KVINNER.**



Halsen på posen er gripevennlig og kan bøyes i alle retninger. Det gjør posen meget fleksibel. Lokket på traktene kan stenges mellom hver anvendning for å oppnå god hygiene. Tilbakeslagsventilen i overgangen mellom traktene og posen gjør at risikoen for lekkasje og lukt elimineres. Luftventilen på forsiden har et filter som også fungerer som bakteriefilter (dog i maks et døgn). Tappekranen innebærer en hygienisk håndtering for brukeren.

**Produktnavn Daylite art. nr. MAR 983100**  
**Vare nr.913303 Refusjonsberettiget**  
**Inkontinensmaterieell etter ftl.§ 5 -14**

**DAYLITE - den nye hygieniske  
urinoppsamlingsposen for menn og  
kvinner.**

### **HYGIENE**

Posen er utstyrt med et lokk. I overgangen mellom traktene og posen er det plassert en tilbakeslagsventil som hindrer urin og urinlukt å komme opp igjennom traktene. Posen har et bakteriefilter på forsiden og en tappekran. Med tappekranen kan posen tømmes uten at man kommer i berøring med urinen. Posen tar liten plass når den brettes sammen og brukte poser kan kastes sammen med ordinært avfall. Posen kan også kvernes opp til plastmasse for resirkulering.

### **ØKONOMI**

Sammenlignet med tradisjonelt urinhåndtering som bekken, urinflasker, bleier, sengekladder etc. er de økonomiske fordelene ved bruk av Daylite betydelige.


- Innsparing på personaltid, flertallet av pasientene kan håndtere Daylite selv.
- Sirkulasjon- og rengjøringskostnader for bekken, urinflasker o.l bortfaller når Daylite benyttes.
- Vesentlige besparelser i volum i forhold til bruk av bleier og sengekladder.

### **FORDELER FOR BRUKER**

Økt grad av sikkerhetsfølelse hos brukeren. Daylite er enkel å bruke og lett å ta med seg. Sammenbrettet tar den liten plass. Daylite gir brukeren økt bevegelsesfrihet fordi Daylite kan anvendes enkelt og diskret der annet avtrede ikke er mulig.

### **ANVENDINGSOMRÅDER**

Pleiekvaliteten vil øke både i hjemmesykepleien, pleieavdelinger, sykehus og institusjoner fordi Daylite kan henges ved sengen eller ligge lett tilgjengelig. Brukeren kan anvende den uten risiko for uhell. Urinen kan ikke renne ut av posen dersom denne skulle mistes. Bevegelseshemmede og eldre med ulike grader av inkontinensproblemer får en økt komfort og bedre bevegelsesfrihet. Den gjennomsiktede forsiden på posen gir mulighet for inspeksjon av urin og tappekranen gir mulighet for på en enkel måte ta prøver ved behov for laboratorieundersøkelser. Pasienter med rest urin- problemer kan stå og late vannet slik at de lettere får tømt hele blæren, samt enkelt kontrollere mengde urin ved å avlese måleskalaen. Anbefales til måling av urinvolum.

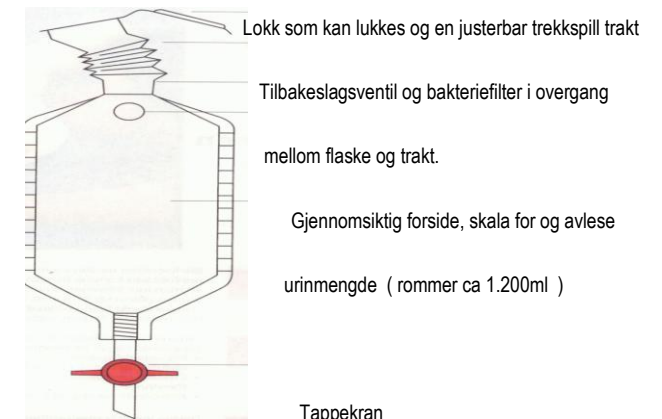

DayLite® Pat.EU 0285585 CE reg.

Daylite Varenr: 913303 MAR 983100 pkn a 30 stk.

**Importør: MedArt as Gladvollveien 24 D N-1168 OSLO,  
tlf 22 750121, faks 22 750170**

**[www.medart.no](http://www.medart.no), email:[firmapost@medart.no](mailto:firmapost@medart.no)**

**FORHANDLER:**

