

## Svan Bidette R3

Automatisk bidette med tørkefunksjon

Post 20  
Rangering 3



Med fysisk eller kognitiv svikt kan intimhygiene være spesielt utfordrende, og hjelp kan bli nødvendig for å opprettholde gode hygienevaner.

Vår automatiske Svan Bidette R3 er en gjennomtenkt og lett anvendelig løsning som rengjør og tørker etter toalettbesøk. Med en pendlende bevegelse kommer vannstrålen fra undersiden – noe som garanterer skånsom og effektiv intimhygiene for både menn og kvinner. Trykket på vannstrålen er en av mange innstillingsmuligheter som tilpasser løsningen til dine forutsetninger og behov.


Ferdig montert og tilpasset dine behov er Bidetten enkel å anvende med en intuitiv og brukervennlig håndkontroll.

Bidette monteres direkte på ditt eksisterende toalett, og er enkel å holde ren og vedlikeholde. Når dusjfunksjonen ikke er i bruk ligger den alltid skjernet under kanten på toalettsetet for å opprettholde hygien. Dusjfunksjonen er også enkelt å plukke fra hverandre for rengjøring.

Svan Bidette har et luftmunnstykke som sitter i bakkant av toalettsetet. Når viften starter, åpnes en liten luke og den varme luften tørker etter vask. Luft og tork ligger også alltid beskyttet når funksjonene ikke er i bruk.

Svan Bidette R3 passer de fleste standard toaletter og kan ellers kombineres med andre produkter fra Hepro som Svan lift, Svan Balance eller Gripo. Løsningen er robust og har en 6,5 cm høy sitering som kan belastes 380 kg. Stabilisatorer mot porselenet gjør at Bidetten tåler sideforflytning til brukere av dusj/toalettstol eller rullestol. Videre består Bidetten av en dusjarm, termostatbatteri med vannslange, viftehus med luftslange, håndkontroll og sittevakt.

Svan Bidette R3 må kobles til strøm og vann for den tas i bruk.

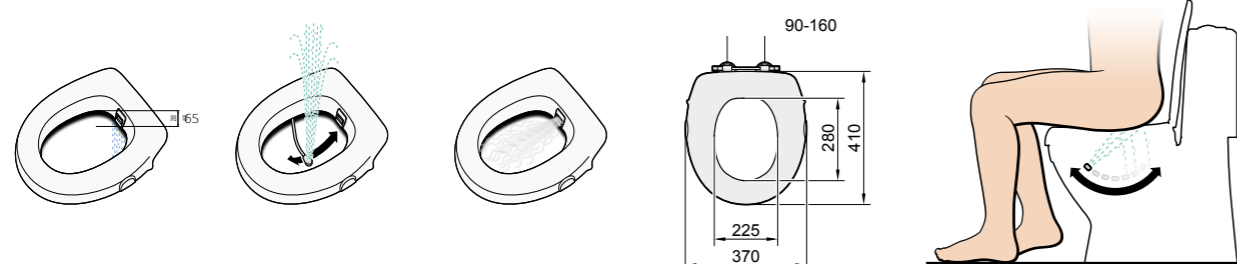

## Svan Bidette

Modell	Art. nr.	HMS-nr.	Nav-avtale	Beskrivelse
Svan Bidette R3 unisex	51756	199586	Post: 22 Rangering: 3	Separat betjening av spyl/tørk



## Tilbehør Svan Bidette



### Hel automatisk håndkontroll

Håndkontroll for helautomatisk betjening av spyl/tørk. Svært enkel å betjene, og det kreves lite kraft for å trykke den ned

Art. nr.	HMS-nr.
51769	217033



### Fotpall 5 cm

Fotputen reduserer setehøyden når du sitter, når du er på toalettet er dette spesielt viktig, da du må ha en stabil og god sittestilling.  
Mål: 32x38x5 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51915	199545



### Fotpall 10 cm

Fotputen reduserer setehøyden når du sitter, når du er på toalettet er dette spesielt viktig, da du må ha en stabil og god sittestilling.  
Mål: 32x38x10 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51916	199544



### Fotpall ekstra stor

Fotputen reduserer setehøyden når du sitter, når du er på toalettet er dette spesielt viktig, da du må ha en stabil og god sittestilling. Mål: er 75x38x5 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51916	199544



### RIK sitteplate

For bedre sittebalanse ved kateterisering.  
Mål: 170x340 mm

Art. nr.	HMS-nr.
51406	153237



### Sittering myk for hygiene sete

Sittering myk til bruk for hygiene sete med sprutskjerm. Anbefalt for dem som trenger litt trykkavlastning på toalettsete. Gir litt mer varmekomfort.

Art. nr.	HMS-nr.
51212	



### Ryggpute

For støtte og komfort  
H: 39 cm, B: 32 cm, D: 3 cm

Art. nr.	HMS-nr.
52029	199564



### Ryggpute

For støtte og komfort  
H: 25 cm, B: 36 cm, D: 10 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51038	134750



### Hygiene sete

Med sprutkant, enkel å ta av og på som gjør rengjøring enklere.

Art. nr.	HMS-nr.
51986	201404

## Tilbehør Svan Bidette



### Hullforminsker

Passer fint for barn slik at dem får et mindre hull og forholde seg til og det blir enklere å balansere. Ytre mål: 38x42,5 cm  
Indre mål: 16x26 cm

Art. nr.	HMS-nr.
52036	199548



### Fotkontroll

Fotkontroll benyttes om man har vanskelig for å betjene en Svan Bidette med en håndkontroll.

Art. nr.	HMS-nr.
51779	297558



### Varmluftslange

Varmluftslangen brukes der hvor programmeringsboksen sitter litt lenger fra toalettet.  
Lengde: 80 cm.

Art. nr.	HMS-nr.
52041	199572



### Støttearmene

For vegghengt toalett. Monteres mellom Bidette sitsen og porselenet. Brukervekt pr. armlene: 65 kg. Innvendig mål: 51 cm. Utvendig mål: 61 cm.  
Høyde over sete: 23 cm.

Art. nr.	HMS-nr.
51068	048633



### Monteringsplate

Anbefales

Denne anbefales der det er fliser for å unngå at man må bore hul i fliser og våtromsnormen. Mål: 17x39 cm

Art. nr.	HMS-nr.
51917	199555




### Monteringssats

Lang, sete

Brukes til å flytte fram Bidette-sitsen når den ikke passer med skålen på toalettet det er montert på. Den gir 33 - 80 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
52039	199556

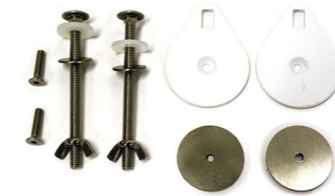

### Monteringssats

Kort, sete

Brukes til å flytte fram Bidette-sitsen når den ikke passer med skålen på toalettet det er montert på. Den gir 33 - 40 mm.

Art. nr.	HMS-nr.
52174	235204