




Immedia OneManSling

ENKEL FORFLYTNING HØYERE OPP I SENGEN

Immedia OneManSling gjør det mulig for en pleier å forflytte en bruker høyere opp i sengen. OneManSling festes til sengens hodegavl eller ramme. Ved å plassere OneManSling rundt brukers sete, kan hjelperen med minimal kraft forflytte brukeren høyere opp i sengen.

For å minimere friksjonen, anvendes OneManSling alltid sammen med et glidelaken, som i de fleste tilfeller plasseres under brukers skuldre og sete.

Immedia OneManSling gjør det mulig for én pleier å flytte en bruker høyere opp i seng.

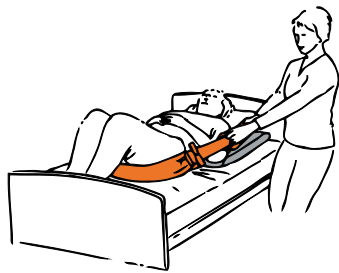

BRUKSOMRÅDE

- Assistert forflytning høyere opp i seng
- Assistert forflytning av bena inn og ut av seng

BESKRIVELSE	B X L	HMS NR.	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
Immedia OneManSling ~ 6 håndtak	CM 7,5 x 300	183813	IM460PU	STROPPER: Polyester GLIDEPUTE INNSIDE: Nylon POLSTRING: Polyester UTSIDE: Polyuretan
VASKEANVISNING Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.				