

# GRILLO



**news** from **mini** to **large** size!

 design and quality  
**MADE IN ITALY** since 1980

**ORMESA**<sup>®</sup>

ronda  
hjelpemidler

# GRILLO mini

Grillo Mini - Konvertibel ramme fra LUKKET til ÅPEN front  
eller fra ÅPEN til LUKKET front

**NEW**



Grillo Mini  
Nå også med  
ÅPEN FRONT




# Gå- og ståtreningshjelpemiddel

Grillo er et ganghjelpemiddel utviklet for å hjelpe og/eller gjøre det enklere for en bruker å kunne bevege seg.

Unikt design med patentert trinnløs høydejustering, som gir konstant senter av tyngdepunkt i alle høyder, gjør Grillo unik vedrørende sikkerhet og eleganse.

Et bredt spekter av justeringsmuligheter og støtter gjør det lett å montere og tilpasse de ulike brukers behov.

## Info Grillo mini og tilleggsutstyr

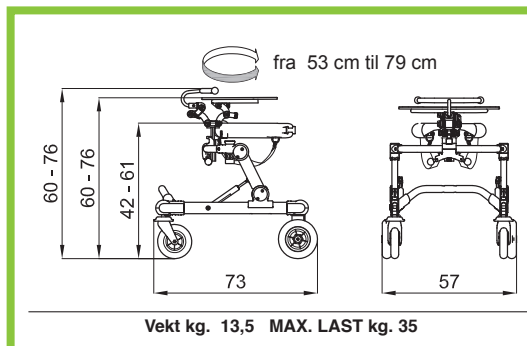


fra 53 cm til 79 cm

60 - 76  
60 - 76  
42 - 61  
73  
57

Vekt kg. 13,5 MAX. LAST kg. 35

**BRUKER HØYDE (C):**  
min cm 75  
max cm 95

**VIKTIG:**  
Sørg for at målet A angitt i figur, ikke overstiger det måle området som er angitt mellom fot - hoftestøtte (42 - 61 cm)

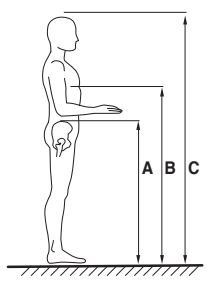

## Tilbehør Grillo mini

- 824** Bord Grillo åpen front  
**865** Hodestøtte justerbar



**809**

Armstøtter Grillo mini



**943**

Armstøtter Grillo mini



**894**

Ryggbelte  
Grillo mini lukket front



**890**

Bendeler høyde-justerbar Grillo mini



**926**

Bøylehåndtak Grillo mini



**937**

Grillo lukket front Multi-justerbare håndtak Grillo mini




**923**

Ledsagerhåndtak justerbar høyde



**937**

Pedal for parkeringsbrems

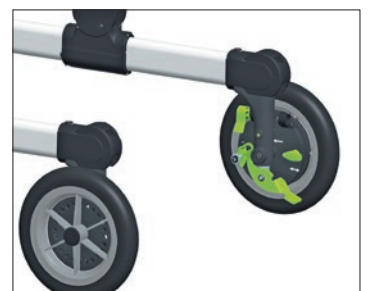



**7 versjoner**

**2 modeller: Åpen front eller lukket front**

**en og samme ramme**

**sammenleggbar ramme**

**Gå trener med stabilt senter for tyngdepunktet**

**nøyaktige og kontinuerlige justeringer**

**utskiftbare komponenter**

Grillo er et ganghjelpemiddel utviklet for å hjelpe og / eller gjøre det enklere for en bruker å kunne bevege seg.

Sitt opprinnelige design med sin patenterte høydejustering, gjør Grillo unikt vedrørende sikkerhet og eleganse.

Sitt brede spekter av justeringer og støtter gjør det lett å montere og tilpasse de ulike brukers behov.



page 4 size Zero

size OneTwo

size ThreeFour

size Five

# 6 Lukket front PT versjon med hoftestøtte og kroppstøtte

For brukere som trenger kroppstøtte og hoftestøtte og en forover referanse. To uavhengige støtter (Hofte og Kroppstøtte) gjør det lett å tilpasse kroppstilling, slik at brukeren blir oppmuntret til å gå fremover og øve opp et positivt gangmønster.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium (Threefour) og Large (Five)



## Kroppstøtte

Justeres for å gi bruker stabilitet og god balanse.

## Hoftestøtte

Støtte til bekkenet for å gi trygghet og stabilitet.

## Bøylehåndtak

Justeres for å gi brukeren et festepunkt, som gir en følelse av økt sikkerhet.

## Gåsele

Støtter bruker etter behov, behagelig i bruk uten press.



## “ Lukket front PA versjon med hoftestøtte og armstøtter

For brukere som trenger hoftestøtte og som har delvis kroppskontroll. Ved hjelp av armstøtter vil bruker lettere ha kontroll på overkroppen.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium (ThreeFour) og Large (Five)

### Hoftestøtte

Støtte til bekkenet , gir trygghet og stabilitet

### Armstøtte

Gir ergonomisk støtte til armene. Dette hjelper bruker til bedre kontroll av overkroppen.

### Gåsele

Støtter bruker etter behov, behagelig i bruk uten press.



# “Åpen front PT versjon med hoftestøtte og kroppstøtte

For brukere som trenger kropp og hoftestøtte, gir fri bevegelse fremover uten hindringer. (Åpen front)

To uavhengige støtter (Hofte og Kroppstøtte) gjør det lett å tilpasse kroppstilling, slik at brukeren blir oppmuntret til å gå fremover og øve opp et positivt gangmønster.

Tilgjengelig for Small (OneTwo), Medium (ThreeFour) og Large (Five)



## Kroppstøtte

Kan justeres for å gi bruker stabilitet og god balanse.

## Hoftestøtte

Støtte for bekkenet for å gi trygghet og stabilitet.

## Håndtak

Justeres for å gi brukeren et festepunkt, som gir en følelse av økt sikkerhet.

## Gåsele

Støtter bruker etter behov, behagelig i bruk uten press.



## “ Åpen front PA versjon med hoftestøtte og armstøtter

Gir støtte til hofte og armene. Det er for brukere som har god kontroll på overkroppen.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium (ThreeFour) og Large (Five)

### Hoftestøtte

Støtte for bekkenet , gir trygghet og stabilitet

### Armstøtte

Gir ergonomisk støtte til armene. Dette hjelper bruker til å få bedre kontroll på overkroppen.

### Gåsele

Støtter bruker etter behov, behagelig i bruk uten press.





“

## Åpen front SA versjon med armstøtte, korsryggstøtte og klappsete.

For brukere som har delvis kroppskontroll. Arm støtter hjelper brukeren til å kontrollere øvre del av kroppen og å manøvrere rullatoren.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium (ThreeFour) og Large (Five)



### Armstøtter

Gir ergonomisk støtte til armene. Dette hjelper bruker til bedre kontroll av overkroppen.

### Ryggstøtte

Oppfordrer til bedre motorisk kontroll/koordinasjon, som inspirerer til mer gange / turgåing.

### Klappsete

Gir solid støtte ved behov; det kan slås sammen mens du går.





## “ Åpen front P versjon med hoftestøtte, håndtak og gåsele

Gir støtte til hofte / bekken. Det er for brukere som har en ganske god kroppskontroll.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium (ThreeFour) og Large (Five)

### Hoftestøtte

Støtte for bekkenet , gir trygghet og stabilitet

### Håndtak

Støtter armene og gir et godt grep for styring av rullatoren.

### Gåsele

Støtter bruker etter behov, behagelig i bruk uten press.



## “ Åpen front L versjon med korsryggstøtte og håndtak

For brukere med tilstrekkelig kontroll på overkropp og hofter, som kun trenger en korsryggstøtte og håndtak for å støtte seg til oppreist stilling.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium (ThreeFour)



### Håndtak

Gir et godt grep for styring av rullatoren.

### Ryggstøtte

Oppfordrer til bedre motorisk kontroll/koordinasjon, som inspirerer til mer gange / turgåing.

“

## patentert høyde regulering system

Brukers  
tyngdepunkt  
forblir  
konstant under  
høydejustering  
av rammen.



Konstant  
senter av tyngdepunkt

Den patenterte gassfjær for høydejustering åpner for stillingskorrigering uten å endre brukerens posisjon (tyngdepunkt), både i statisk og dynamisk fase. Systemet med høydejustering med konstant tyngdepunkt, betyr at Grillo vil følge veksten av bruker i lang tid med en størrelse Grillo.



Et bredt utvalg av høyderegulering:  
35 cm størrelse Small (OneTwo)  
49 cm størrelse Medium (ThreeFour)  
54 cm størrelse Large (Five)



## 2 uavhengige støtter

regulerbar  
ergonomisk  
hofte og  
kroppstøtte

Disse allsidige støtter er komfortable og gir god kontroll. De etterligner måten en forelder vil holde et barn, som gir en følelse av støtte og sikkerhet. De er fullt justerbare i bredde, høyde og tilt både framover og bakover.



Regulerbar tilt



i høyde (hoftestøtte størrelse Fem-Large: justerbar sammen med rammen)



omkrets og bredde



forover og bakover



## **hurtig justering**

Alle justeringer er gjort med spaker eller håndtak uten behov for verktøy.

Justeringer gjøres raskt og sikkert, og kan gjøres med bruker i rullator.

Alle komponenter er utskiftbare og kan legges til eller fjernes.



## **måleskala på alle justeringer**

På alle justerbare støtter er det påført måleskala.

Dette gir informasjon om innstilling som kan noteres etter at utstyret er tilpasset for en bruker.

Dersom ny bruker skal overta utstyret, settes alle støtter til innstilling 0 (null) på skala. Med dette har man beste utgangspunkt for ny tilpasning.



åpne spaken



juster til ønsket høyde



feste spaken



## **enkel og rask å legge sammen**

Grillo kan legges sammen i en enkel operasjon.

Den reduseres til et transportvennlig format.

Den kan legges sammen uten behov for å fjerne noen komponenter.





## Ormesa designer hjul som er egnet for alle underlag

Hjulets profil gir økt stabilitet og komfort på alle underlag, og de er slitesterke.

Bakhjul med:

- Ryggesperre: enkel og rask å bruke. Hindrer hjulet for å gå bakover. Det er anbefalt for brukere som har nedsatt hode og kroppskontroll, og for pasienter som bruker hjelpemiddel for første gang.
- Slepebrems: reduserer hastigheten av bevegelsen 4 nivåer av justeringer.
- Kompatibel med håndbrems (Tilleggsutstyr)
- Parkeringsbrems: nyttig når du skal plassere brukeren inn i rullator og under transport av rullator.



Svingbare fronthjul med:

- Retnings lås: hindrer framhjulene i å svinge og garanterer en lineær stabilitet. (Unngå å gå sidelengs) Det hjelper brukeren å fokusere til å gå på en rett linje.
- Det er mulig å endre til svingbare hjul bak, og faste hjul framme.



## Ergonomisk gåsele

Har en liten abduksjonseffekt uten å legge noe press på genital-lyske nivå. Den er laget for å garantere maksimal komfort og sikkerhet. Den er justerbar, lett å fjerne og kan vaskes i maskin.





# Allsidig og justerbar

bredt spekter av utbyttbare komponenter


**824** Bord



**925** Kropstøtte



**924** Hoftestøtte

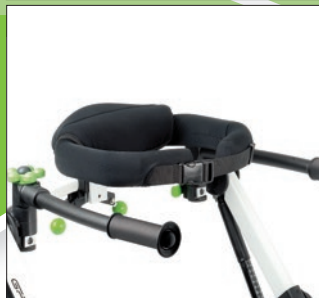

**930** Ergonomisk Gåsele



**926** Bøylehåndtak



Høyde og tilt justerbar.  
(Kun for lukket front)

**865** justerbar hodestøtte



Justerbar i høyde, tilt og i bakover og framover posisjon. (Kun for Åpen front Grillo)

**919** Korsryggstøtte



(kun for Åpen front Grillo størrelse Small (OneTwo) og Medium (ThreeFour))

**918** Klappsete



Klappsete kan justeres i høyden. Det kan brukes på størrelser OneTwo og ThreeFour, både som bekkenstøtte og korsryggstøtte. Det gir en sikker støtte ved behov, og kan klappes sammen under gange.

**815** Nedfellbar sal



Høyde regulerbar

**927** Avtakbare håndtak



(Kun for Åpen front Grillo) Justerbare håndtak. Uavhengig regulerbare.

**809** Armstøtte



regulerbar i høyde, bredde, dybde, tilt og retning. Den kan også plasseres på den ytre delen av håndtaket

justerbar i dybden, tilt, justerbar retning, høyde og bredde

**939** Ergonomisk håndtak




**928** Bakhjul for bredde-reduisering, med pedaler for parkeringsbrems



(Kun for Grillo størrelse ThreeFour og Five) KUN FOR INNENDØRS BRUK

Sammenkoblingen av fast Ø200 hjul, med pedaler for parkeringsbrems + gaffer.  
Rammebredde reduseres:  
- Størrelse Medium (ThreeFour) går fra 76 cm til 68,5 cm  
- Størrelse Large (Five) går fra 80 cm til 72.5 cm

**929** Pedaler for parkeringsbrems

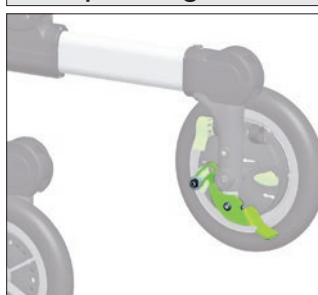

**810** Vekt / lodd (Ekstra)




Grillo Small (OneTwo) + 2,6 kg. x 2  
Grillo Medium (ThreeFour) og Large (Five) + 3,4 kg. x 2



**923** Ledsager håndtak



**890** Bendeler med lårstropp

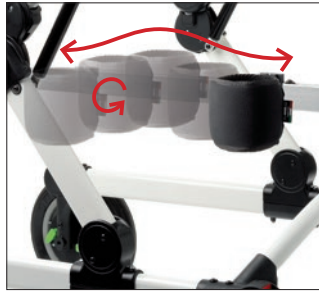


De er plassert over knærne, hindrer kryssing av ben og sørger for normal benstilling. De leder stegene i riktig mønster og gjør bevegelser lettere til å gå. Er justerbar i høyde og omkrets for å passe til den enkelte bruker. Steglengde kan reguleres. Takket være det innovative design, tilbyr lår stropper tre muligheter for tilpassing: lengde, vertikalt og rotasjonsindusert. De går sammen med de naturlige fysiologiske bevegelser ved gange.



**Dimensions and weights**

FRONT DRIVE Small (OneTwo)	FRONT DRIVE Medium (ThreeFour)	FRONT DRIVE Large (Five)
Total weight kg. 16,2 - MAX LOAD Kg. 45	Total weight kg. 19,5 - MAX LOAD Kg. 90	Total weight kg. 23 - MAX LOAD Kg. 110
POSTERIOR DRIVE Small (OneTwo)	POSTERIOR DRIVE Medium (ThreeFour)	POSTERIOR DRIVE Large (Five)
Total weight kg. 15,7 - MAX LOAD Kg. 45	Total weight kg. 17,7 - MAX LOAD Kg. 90	Total weight kg. 22 - MAX LOAD Kg. 110

**USER DIMENSIONS:** USER HEIGHT (C):  
 cm 90 -135 GRILLO Small (OneTwo)  
 cm 110-165 GRILLO Medium (ThreeFour)  
 cm 150-190 GRILLO Large (Five)

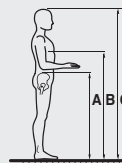

**IMPORTANT:**  
 Make sure that measures A and B indicated in the figure do not exceed the suggested range indicated for the supports

AVAILABLE SIZES ▶	FRONT DRIVE		POSTERIOR				
	- Small (OneTwo) - Medium (ThreeFour) - Large (Five)	- Small (OneTwo) - Medium (ThreeFour) - Large (Five)	- Small (OneTwo) - Medium (ThreeFour) - Large (Five)	- Small (OneTwo) - Medium (ThreeFour) - Large (Five)	- Small (OneTwo) - Medium (ThreeFour) - Large (Five)	- Small (OneTwo) - Medium (ThreeFour) - Large (Five)	- Small (OneTwo) - Medium (ThreeFour) - Large (Five)
VERSIONS ▶							
COMPONENTS ▼	<b>PT</b> INCLUDING: TRUNK SUPPORT, PELVIC SUPPORT, ERGONOMIC HARNESS, HANDLEBAR.	<b>PA</b> INCLUDING: PELVIC SUPPORT, ERGONOMIC HARNESS, ARM SUPPORTS.	<b>PT</b> INCLUDING: TRUNK SUPPORT, PELVIC SUPPORT, ERGONOMIC HARNESS, HANDLES.	<b>PA</b> INCLUDING: PELVIC SUPPORT, ERGONOMIC HARNESS, ARM SUPPORTS.	<b>SA</b> INCLUDING: ARM SUPPORTS, LUMBAR SUPPORT, FOLDING SEAT.	<b>P</b> INCLUDING: PELVIC SUPPORT, ERGONOMIC HARNESS, HANDLES.	<b>L</b> INCLUDING: LUMBAR SUPPORT, HANDLES.

<b>865</b> adjustable headrest		ND	ND	○	○ <i>Available in combination with trunk support only</i>	○ <i>Available in combination with trunk support only</i>	○ <i>Available in combination with trunk support only</i>	○ <i>Available in combination with trunk support only</i>
<b>925</b> Trunk support		●	○	●	○	○	○	○
<b>924</b> Pelvic support		●	●	●	●	○	●	○
<b>930</b> Ergonomic harness		●	●	●	●	○ <i>Available in combination with pelvic support only</i>	●	○ <i>Available in combination with pelvic support only</i>
<b>926</b> Handlebar		●	○	NA	NA	NA	NA	NA
<b>809</b> Arm supports		○	●	○	●	●	○	○
<b>939</b> Ergonomic Handles		○	●	○	●	●	○	○
<b>919</b> Lumbar supports		NA	NA	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	●	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	●
<b>918</b> Folding seat		NA	NA	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	●	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	○
<b>815</b> Saddle		○	○	○	○	○	○	○
<b>927</b> Removable grip handles		NA	NA	●	○	○	●	●
<b>890</b> Leg divider with thigh straps		○	○	○	○	○	○	○
<b>810</b> Weight bars		○	○	○	○	○	○	○
<b>923</b> Pushing handlebar for care givers		○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	○	○ <i>only for Grillo S (OneTwo) and M (ThreeFour)</i>	○
<b>928</b> Rear wheels for narrow base with pedals for parking brakes. ONLY FOR INDOOR USE		○ <i>only for Grillo M (ThreeFour) and L (Five)</i>	○ <i>only for Grillo M (ThreeFour) and L (Five)</i>	○ <i>only for Grillo M (ThreeFour) and L (Five)</i>	○ <i>only for Grillo M (ThreeFour) and L (Five)</i>	○	○ <i>only for Grillo M (ThreeFour) and L (Five)</i>	○
<b>929</b> Pedals for parking brakes		○	○	○	○	○	○	○
<b>824</b> Bord		○	○	○	○	○	○	○

● = INCLUDED

○ = ACCESSORY

NA = NOT AVAILABLE

# Gå- og ståtreningshjelpemiddel

Grillo er prisforhandlet "Ganghjelpemidler - gåtreningshjelpemidler" beskrevet av NAV i anbud av 2020 delleveranse 16.

Brukere av gå- trenings- og aktiviseringshjelpemidler er barn og voksne med nedsatt selvstendig gå- og ståfunksjon. Brukerne kan ha nedsatt motorisk kontroll, for eksempel på grunn av hyper- og hypotoni, ufrivillige bevegelser, nedsatt muskelkraft eller nedsatt koordinasjonsevne. Mange har utviklet feilstillinger og asymmetrier i overkropp og/eller underkropp, og mange av brukerne har nedsatt kognitiv funksjon. De fleste brukere vil ha behov for assistanse av en hjelper for å benytte produktet, men noen vil kunne betjene treningshjelpemiddelet helt eller delvis selv.



HMS nr. 234982 Grillo Liten  
HMS nr. 234983 Grillo Medium  
HMS nr. 234984 Grillo Stor



Grillo mini lukket front  
HMS nr. 239691



Grillo mini åpen front  
HMS nr. 267431

**TILBEHØR**, Grillo mini  
se side 3

**TILBEHØR**, se side 16 og 17

Autorisert forhandler Norge

# ronda

hjelpemidler

Ronda AS, Randabergveien 308, 4070 RANDABERG NORWAY  
T +47 51 58 87 80 www.ronda.no Mail: post@ronda.no

Skandinavisk distributør

**Bjørn Nielsen**  
Rehab & Hospitalsartikler A/S

**ORMESA** s.r.l.  
Via A. Da Sangallo,1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY  
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637  
info@ormesa.com-www.ormesa.com



COMPANY WITH QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY  
= ISO 9001 =