


StimuLITE®

CONTOURED SITTEPUTE



StimuLITE® (honeycomb) Contoured setepute anbefals for tetraplegiker og paraplegiker som trenger stabilisering utifrå for å sitte oppreist og andre mennesker som trenger god posisjonering og er i høy risiko for å utvikle trykksår eller har sår opp til grad 3. Puten er sammensatt av ulike harde og myke lag som tilpasser seg kroppens behov. Sittegruppen er formet for å gi bekkenet en god plassering, god stabilitet og holdning. Sittegruppen er også utstyrt med en mykere lag som omgir sittebenknuten og halebenet og sikrer at brukeren ikke "sitter gjennom". Jo mykere lag blir gradvis til en fastere lag som fordeler trykket fra sittebenknuten og trochanterna til lårene. Pommel og lår støtter holde beina på plass. Sidevegger i StimuLITE® materialet i bikubestruktur er perforert noe som gjør at luften kan sirkulere og fuktighet å fordampe. StimuLITE® sitteputer

hindrer trykket, reduserer skjær og forebygge problemer i fuktig hud. En luftgjennomtrengelig trekk med ventilasjon på sidene kompletterer StimuLITE® ventilasjonssystem og holder brukeren kjølig og tørt. Ved å mestre temperatur og luftfuktighet hindrer StimuLITE® puter hud skjørhet. StimuLITE® sitteputer er de eneste sitteputer som hindrer alle årsaker til trykksår ved å ta hensyn til trykkavlastning, skjær og friksjon og hud skjørhet. Vekten er ca. 1,5 kg, puten er lett å bruke og krever ikke ekstra vedlikehold. Trekket er utstyrt med en lomme som kan plasseres under puten. Puten og trekket er maskintvätt- og torktumlingsbara. Brukervekt 25 - 130 kg.

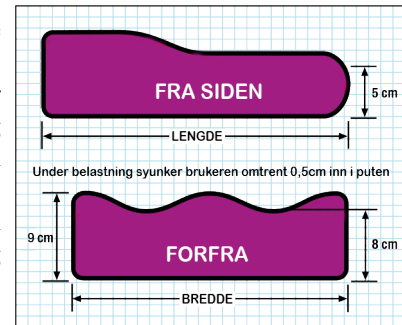

StimuLITE® Contoured kommer i to konfigurasjoner:

- Contoured Standard (Modell CD)
- Contoured Bredere Sittegroup (Modell CDBB)



Bunnen av sittegruppen i Modell CDBB er 3 cm bredere enn i Modell CD og anbefales for brukere som føler sittegruppen i Modell CD for smal.

Puten StimuLITE® Contoured Standard (Modell CD) anbefales for brukere som er ute etter maksimal stabilitet kombinert med utmerket trykkavlastning og ventilasjon. Trykkfølsomme brukere som søker god stabilitet og ventilasjon er anbefalt å prøve ut StimuLITE® Contoured Ekstra Myk (Modell CDXS) eller StimuLITE® Contoured Ekstra Myk Bredere Sittegroup (Modell CDBBXS).

Total Pressure Management™

Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufte ut fuktighet og holder huden tørt. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørt.

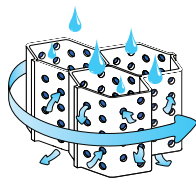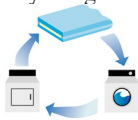


Puster og fordamp fuktighet

Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet

StimuLITE® sitteputen Contoured Standard og Contoured Bredere Sittegroup består av tre lag med ulik hardhet, og reduserer trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdel. StimuLITE® sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stillning samtidig som den omfordeler trykk.

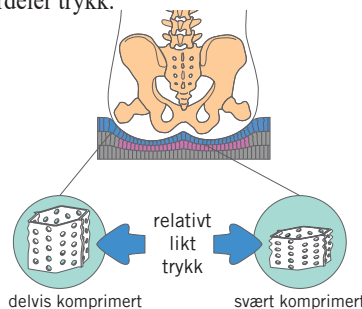

Fordeler trykk etter kroppsform

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.



Diffus lateral skyvekraft





STIMULITE®: CONTOURED SITTEPUTE

Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. Rund bunn anbefals for rullestol med hengekøye dypere enn 2,5 cm.

StimulITE® Contoured Standard (med bredere sittegrupp +3 cm vedlegg BB, f.ex. CDBB1516, samme trekk passer til CD og CDBB)

Størrelse	Pute med flat bunn				Pute med avrundet bunn				Passer alla puter	
	Pute (*)		Tilbehør: Ull trekk		Pute (*)		Tilbehør: Ull trekk		Ekstra Inkontinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.
b36 d36 h8	CD1414	207683	WCOVCD1414	207545	CD1414S	207684	WCOVCD1414S	207546	IN1414	207498
b36 d41 h8	CD1416	207685	WCOVCD1416	207547	CD1416S	207686	WCOVCD1416S	207548	IN1414	207498
b36 d46 h8	CD1418	207687	WCOVCD1418	207549	CD1418S	207688	WCOVCD1418S	207550	IN1414	207498
b36 d51 h8	CD1420	207689	WCOVCD1420	207551	CD1420S	207690	WCOVCD1420S	207552	IN1414	207498
b38 d41 h8	CD1516	207691	WCOVCD1516	207553	CD1516S	207692	WCOVCD1516S	207554	IN1616	207499
b38 d43 h8	CD1517	207693	WCOVCD1517	207555	CD1517S	207694	WCOVCD1517S	207556	IN1616	207499
b38 d46 h8	CD1518	207695	WCOVCD1518	207557	CD1518S	207696	WCOVCD1518S	207558	IN1618	207500
b38 d51 h8	CD1520	207697	WCOVCD1520	207559	CD1520S	207698	WCOVCD1520S	207560	IN1618	207500
b41 d41 h8	CD1616	207699	WCOVCD1616	207561	CD1616S	207700	WCOVCD1616S	207562	IN1616	207499
b41 d43 h8	CD1617	207701	WCOVCD1617	207563	CD1617S	207702	WCOVCD1617S	207564	IN1616	207499
b41 d46 h8	CD1618	207703	WCOVCD1618	207565	CD1618S	207704	WCOVCD1618S	207566	IN1618	207500
b41 d51 h8	CD1620	207705	WCOVCD1620	207567	CD1620S	207706	WCOVCD1620S	207568	IN1618	207500
b43 d41 h8	CD1716	207707	WCOVCD1716	207569	CD1716S	207708	WCOVCD1716S	207570	IN1616	207499
b43 d43 h8	CD1717	207709	WCOVCD1717	207571	CD1717S	207710	WCOVCD1717S	207572	IN1616	207499
b43 d46 h8	CD1718	207711	WCOVCD1718	207573	CD1718S	207712	WCOVCD1718S	207574	IN1618	207500
b43 d51 h8	CD1720	207713	WCOVCD1720	207575	CD1720S	207714	WCOVCD1720S	207576	IN1618	207500
b46 d41 h8	CD1816	207715	WCOVCD1816	207577	CD1816S	207716	WCOVCD1816S	207578	IN1816	207501
b46 d43 h8	CD1817	207717	WCOVCD1817	207579	CD1817S	207718	WCOVCD1817S	207580	IN1816	207501
b46 d46 h8	CD1818	207719	WCOVCD1818	207581	CD1818S	207720	WCOVCD1818S	207582	IN1818	207502
b46 d51 h8	CD1820	207721	WCOVCD1820	207583	CD1820S	207722	WCOVCD1820S	207584	IN1818	207502
b51 d41 h8	CD2016	207723	WCOVCD2016	207585	CD2016S	207724	WCOVCD2016S	207586	IN1816	207501
b51 d46 h8	CD2018	207725	WCOVCD2018	207587	CD2018S	207726	WCOVCD2018S	207588	IN1818	207502
b51 d51 h8	CS2020	207727	WCOVCD2020	207589	CD2020S	207728	WCOVCD2020S	207590	IN2020	207503

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, trenger dispens

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, trenger dispens

(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

Tilbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilstøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207544)



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: 48 50 32 97

email: ordre@rehabshop.com

www.rehabshop.as



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved.
U.S. Patent #51,80,619; U.S. Patent #5,444,881 and other
patents pending worldwide. Total Pressure Management
is a trademark and Stimulite and Supracor are registered
trademarks of Supracor Systems, Inc.