



# StimuLITE®


## CLASSIC EKSTRA MYK SITTEPUTE

### STABILITET OG TRYKKAVLASTNING MED EKSTRA MYK KOMFORT



StimuLITE® Classic Ekstra Myk putte (Modell CLXS) har en myk øverste laget av bormbar Honeycomb (cellene i bokubestruktur struktur) for personer med følsom hud. Classic Ekstra Myk gir total trykkavlastning – trykkfordeling og redusert skjær og friksjon. Putens unike ventilasjonen avleder varme og fuktighet, en viktig faktor i å forebygge og lindre trykksår. Den lette puten er laget av medisinsk godkjent materiale (TPU) som er antibakteriell og hindrer soppvekst. Forblir luktfri etter regelmessig rengjøring. Puten kan vaskes i maskin (vedlagt vaskepose brukes) som gjør det lettere å holde huden ren og sunn. StimuLITE® Honeycomb celler i bikubestruktur er formbare (anisotropisk) og fordelene av vekt og press samtidig som det gir god

stabilitet. Honeycombceller i samsvar med trekket og er fleksible i bevegelse, for å dempe støt og skader på vev. Putens celler er perforert for å tillate luft sirkulasjon og avleder fuktighet. Takket være sin konstruksjon i honeycomb struktur består StimuLITE® Classic Ekstra Myk putte av 93% luftvolum slik at kontaktflaten mellom puten og huden er minimal. Spesielt for smertefølsomme pasienter og de med høyt trykksårerisiko eller akutte sår kan da redusere stress av å sitte på kroppen. StimuLITE® Classic Ekstra Myk putte består av tre lag av fleksible sveisede celler. Cellelag har forskjellig stivhet til sittbenknølerne – uavhengig – kan synke ned i formen mens omkringliggende huden og vevet støttes. Fastere celler som anvendes for å gi større sideveis stabilitet. En pustende trekk sammen med de perforerte cellene gjør at brukeren føler seg kjølig og behagelig. Ideell for personer med følsom hud. Den flate seteflate letter sidebevegelser. StimuLITE® Classic Ekstra Myk putte endrer ikke egenskapene ved ekstreme temperaturer, som for eksempel vilje puten ikke bli hard hvis du har glemt den i bilen over natten. Maks. brukervekt 130 kg. Min. brukervekt 25 kg.

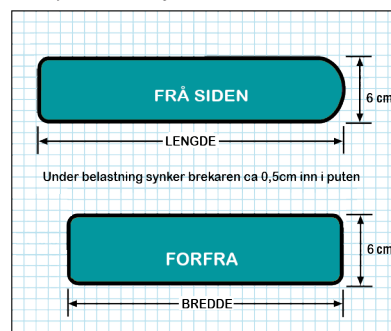

### Total Pressure Management™

#### Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppsvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår.

StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.





Puster og fordamp fuktighet



Komplett ventilasjonssystem

#### Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Classic Ekstra Myk består av tre lag med ulik hardhet, og reduserer trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. StimuLITE sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stilling samtidig som den omfordeler trykk.

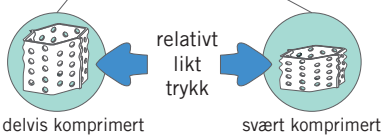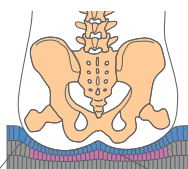

Fordeler trykk etter kroppens form

#### Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITEs bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelse i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

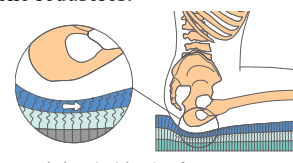

minimal skjærkraft mot venene  
Diffus lateral skyvekraft



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 NESBRU, Besøksadresse: Vogellund 31 1394 NESBRU

Tel: 48 50 32 97

email: [ordre@rehabshop.com](mailto:ordre@rehabshop.com) [www.rehabshop.as](http://www.rehabshop.as)





# STIMULITE®: CLASSIC EKSTRA MYK SITTEPUTE

Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. Rund bunn anbefals for rullestol med hengekøye dypere enn 2,5 cm.

## Stimulite® Contoured BBXS (Ekstra Myk Brederer Sittegrupp)

Størrelse	Pute med flat bunn			Pute med avrundet bunn			Passer alla puter			
	Pute (*)	Ekstra Cordura Trekk	Tillbehør: Ull trekk	Ekstra Cordura trekk	Tillbehør: Ull trekk	Ekstra Inkontinlegg	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.
b36 d36 h8	CLXS1414	207591	WCOVCL1414	207591	CLXS1414S	COVCL1414S	207592	WCOVCL1414S	IN1414	207498
b36 d41 h8	CLXS1416	207593	WCOVCL1416	207593	CLXS1416S	COVCL1416S	207594	WCOVCL1416S	IN1414	207498
b36 d46 h8	CLXS1418	207595	WCOVCL1418	207595	CLXS1418S	COVCL1418S	207596	WCOVCL1418S	IN1414	207498
b36 d51 h8	CLXS1420	207597	WCOVCL1420	207597	CLXS1420S	COVCL1420S	207598	WCOVCL1420S	IN1414	207498
b38 d41 h8	CLXS1516	207599	WCOVCL1516	207599	CLXS1516S	COVCL1516S	207600	WCOVCL1516S	IN1616	207499
b38 d43 h8	CLXS1517	207601	WCOVCL1517	207601	CLXS1517S	COVCL1517S	207602	WCOVCL1517S	IN1616	207499
b38 d46 h8	CLXS1518	207603	WCOVCL1518	207603	CLXS1518S	COVCL1518S	207604	WCOVCL1518S	IN1618	207500
b38 d51 h8	CLXS1520	207605	WCOVCL1520	207605	CLXS1520S	COVCL1520S	207606	WCOVCL1520S	IN1618	207500
b41 d41 h8	CLXS1616	207607	WCOVCL1616	207607	CLXS1616S	COVCL1616S	207608	WCOVCL1616S	IN1616	207499
b41 d43 h8	CLXS1617	207609	WCOVCL1617	207609	CLXS1617S	COVCL1617S	207610	WCOVCL1617S	IN1616	207499
b41 d46 h8	CLXS1618	207611	WCOVCL1618	207611	CLXS1618S	COVCL1618S	207612	WCOVCL1618S	IN1618	207500
b41 d51 h8	CLXS1620	207613	WCOVCL1620	207613	CLXS1620S	COVCL1620S	207614	WCOVCL1620S	IN1618	207500
b43 d41 h8	CLXS1716	207615	WCOVCL1716	207615	CLXS1716S	COVCL1716S	207616	WCOVCL1716S	IN1616	207499
b43 d43 h8	CLXS1717	207617	WCOVCL1717	207617	CLXS1717S	COVCL1717S	207618	WCOVCL1717S	IN1616	207499
b43 d46 h8	CLXS1718	207619	WCOVCL1718	207619	CLXS1718S	COVCL1718S	207620	WCOVCL1718S	IN1618	207500
b43 d51 h8	CLXS1720	207621	WCOVCL1720	207621	CLXS1720S	COVCL1720S	207622	WCOVCL1720S	IN1618	207500
b46 d41 h8	CLXS1816	207623	WCOVCL1816	207623	CLXS1816S	COVCL1816S	207624	WCOVCL1816S	IN1816	207501
b46 d43 h8	CLXS1817	207625	WCOVCL1817	207625	CLXS1817S	COVCL1817S	207626	WCOVCL1817S	IN1816	207501
b46 d46 h8	CLXS1818	207627	WCOVCL1818	207627	CLXS1818S	COVCL1818S	207628	WCOVCL1818S	IN1818	207502
b46 d51 h8	CLXS1820	207629	WCOVCL1820	207629	CLXS1820S	COVCL1820S	207630	WCOVCL1820S	IN1818	207502
b51 d41 h8	CLXS2016	207631	WCOVCL2016	207631	CLXS2016S	COVCL2016S	207632	WCOVCL2016S	IN1816	207501
b51 d46 h8	CLXS2018	207633	WCOVCL2018	207633	CLXS2018S	COVCL2018S	207634	WCOVCL2018S	IN1818	207502
b51 d51 h8	CLXS2020	207635	WCOVCL2020	207635	CLXS2020S	COVCL2020S	207636	WCOVCL2020S	IN2020	207503

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

(\*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

Tillbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilistøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207544)



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S  
Postboks 157 1378 Nesbru  
Tel: 48 50 32 97  
email: ordre@rehabshop.com  
www.rehabshop.as

Alle Stimulite sitteputer er  
branntestet og godkjent i henhold til  
ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006,  
NS-EN 597:2015 og CE-merket.



Copyright, 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved.  
U.S. Patent #5,180,619; U.S. Patent #5,444,881 and other  
patents pending worldwide. Total Pressure Management  
is a trademark and Stimulite and Supracor are registered  
trademarks of Supracor Systems, Inc.