



medemagruppen



Medemagruppen
Fitform 576 Nordic2
- stoler med oppreisningsfunksjon 2018

Fitform 576 Nordic2

- Stolserie med spesielt sikker oppreisningsfunksjon, og med komfort og tilpasningsmuligheter i særklasse



Ny svingfunksjon med lettbetjent løsehendel som kan justeres i ønsket vinkel. Kan monteres på motsatt side.

- Nyutviklede sete- og ryggputer gir mykere og mer stabil sittekomfort
- Manuelt regulerbar korsryggstøtte med håndpumpe som også kan høydereguleres
- Transporthjul for enklere flytting av stolen
- Unik og spesielt sikker oppreisningsfunksjon som skiller seg fra andre stoler i markedet
- Meget robust og stabil stol med meget høyt sikkerhetsnivå
- Alle sitte og liggeposisjoner mulige, separat regulering av oppreisningsfunksjon, setetilt, ryggregulering og benstøtte
- Svært omfattende tilpasningsmuligheter på alle stoler med justerbar setehøyde, setedybde, lengde og vinkel på benstøtte, vinkling av toppdel på rygg, armlenshøyde og ulike løftevinkler inkl rettløft.
- Tiltfunksjon helt opptil 35 grader med mulighet for sjokkleie
- Leveres i mange størrelser (sb45,51,57,63,69,75,81,87cm) og svært omfattende sete-, rygg- og tilbehørsprogram. Kan tilpasses enhver kroppsbygning
- For lange personer mulighet for ekstra dyp setedybde 49-59cm (evt. med tilbehørsats), ekstra lang benstøtte med benstøtteforlenger, samt ulike rygg høyder (72,84,94 eller 104cm)
- Seterotasjon manuelt låsbar med hendel, alt med automatisk låsing. Kan også leveres elektrisk betjent.
- Mulighet for avanserte og trykkforebyggende sitteløsninger ved hjelp av tilbehør bl. a nye FIT-MOTION (se s 5)
- Mulighet for ulike mykheter på sete- og ryggpolstring

Fitform 576 Nordic2

Setebredde standard størrelser	45, 51, 57, 63cm
Setebredde spesialstørrelser	69, 75, 81, 87cm
Setedybde std modeller	43-53cm (38-59cm m tilbehør)*
Setedybde dyp modell	49-59cm (evt. m tilbehør)
Setehøyde u rotasjon	40-60cm (fra 36cm m tilbehør)
Setehøyde m rotasjon	41-61cm (fra 37cm m tilbehør)
Rygg høyde	84cm (72,94,104cm m tilbehør)
Rygg høyde modell Mini	72cm
Armlenshøyde regb u verktøy	15-29cm (fra 12cm m tilbehør)
Benstøttelengde (justerbar)	44-55cm (+8cm m tilbehør)
Maks høyde benstøtte fra gulv	83-103cm (avhengig av sh)
Høyde rettløft oppreist	59-79cm (avhengig av sh)
Høyde skråløft oppreist	60-80cm (avhengig av sh)
Maks brukervekt sb45 og 51	150kg
Maks brukervekt sb57	175kg
Maks brukervekt sb63-87	250kg
Tilt	5-35 grader
Ryggvinkling	95-135 grader
Rotasjon	Manuelt låsbar m hendel, alt med automatisk låsing
Ryggoverdel	regulerbar u verktøy (evt el betjent)
Trekk std	grått stoff / sort hud
Nakkepute	std (m fiberfyll)

* Kortere setedybde på forespørsel



Fitform Nordic

- sitte på sunt grunnlag

Hvilestilling

Ved å tilte setet og regulere ryggen ytterligere bakover, kommer man i hvilestilling. I denne stillingen er belastningen på ryggraden minimal. Kroppsvekten blir optimalt fordelt og man oppnår behagelig avslapning av kroppen. Siden benene kan komme høyere enn hjertet, avlastes blodløpet. (såkalt sjokkleieposisjon).



Sittestilling

Det å sitte rett opp stiller de høyeste kravene til stillingen til ryggraden. Ettersom lenestolen passer til brukerens kroppsbygning, har bekkenet riktig stilling, ryggraden blir fullstendig støttet, samtidig som benene avlastes. Slik oppnås en avslappet sitteholdning.



Oppreisningsstilling

Unik oppreisningsfunksjon som skiller seg fra andre stoler i markedet. Under løfteprosessen dreier setet litt bakover slik at man får satt benene godt under seg når man skal reise seg. Dette gjør oppreisning meget sikker og god, forebygger fare for uhell.



Avslapningsstilling

Ved hjelp av reguleringen av setetilt og fotbrett, og til slutt fininnstilling av ryggvinkel kommer du i en ideell avslapningsstilling hvor kroppsfunksjonene kan ta seg opp igjen.

Ryggraden avlastes i høy grad og musklene, senene og leddene er avslappet.

Kroppsvekten fordeles over større flate og dette reduserer faren for lokalt trykk og eventuelt trykksår. Ved primært å utnytte tiltfunksjonen blir reguleringen mest mulig behagelig og samtidig er det lettere for bruker å opprettholde ønsket sittebalanse og sittestilling



Fitform 576 Nordic2

-ulike størrelser og modeller

Vi har en størrelse som passer!

En forutsetning for at en løfte- hvilestol skal fungere optimalt, er at den må passe godt til brukeren.

Den bør ha både riktig setebredde, setedybde, setehøyde og armlenshøyde for at oppreising skal kunne gjøres best mulig og at stolen samtidig skal gi god støtte og avslappet sitte- og hvilestilling. I avslapning- og hvilestilling bør man også ha god støtte og avlastning under benene. Det er derfor en stor fordel å kunne justere benstøtten etter brukers lengde.

Et viktig valg er riktig setebredde og avstand mellom armene. Dette er viktig for at bruker best mulig skal kunne utnytte sin armkraft ved oppreising, og samtidig kunne sitte stabilt og komfortabelt.

Vi tilbyr derfor stolene i ulike setebredder (45,51,57, 63, 69, 75, 81 og 87cm) for for å sikre at alle får en stol som passer optimalt, uansett om man er stor eller liten.

Stolene har videre omfattende tilpasningsmuligheter slik at man kan justere inn ønsket setehøyde, setedybde, armlenshøyde, lengde og vinkel på benstøtte samt ønsket løftevinkel.

Vi anbefaler primært å benytte tiltfunksjonen ved regulering av sittestillingen, dette er oftest mest behagelig for brukeren og det som best opprettholder ønsket sittebalanse og sittestilling.

Bruk av tilt er også beste måte å sørge for trykkavlastning og dermed beskyttelse mot trykksår.

Tiltfunksjonen gir også mulighet for å komme i såkalt sjokkleie, hvor benene kommer høyere enn hjertet. Innstillingen av benstøtte, tilt og rygg er videre uavhengige slik at man kan fininnstille ønsket sittestilling.

Det lagt stor vekt på at all bruk skal være både enkel og sikker. Stolene er svært stabile og er videre utstyrt med en rekke sikkerhetsdetaljer.

Alle modellene kan leveres med eller uten rotasjon, med eller uten tilt og med trekk i stoff eller hud.

Alternative farger, stoff og større størrelser (sb69,75 og 81cm) samt spesialløsninger kan leveres på bestilling. Ved privatkjøp av avvikende stoler kreves et depositum på 25%.

Post	Stoler med tilt og uten rotasjon	Mål *	Vare nr		Vare nr	
			stol m stoff	HMS art nr	stol m hud	HMS art nr
6	Fitform Nordic2 Tilt Mini	sb45 sd43-53 sh40-60 rh72	1100-1076	241046	1100-1077	24047
6	Fitform Nordic2 Tilt Smal	sb45 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1078	241048	1100-1079	241049
6	Fitform Nordic2 Tilt Std	sb51 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1082	241052	1100-1083	241053
6	Fitform Nordic2 Tilt Dyp	sb51 sd49-59 sh40-60 rh84	1100-1080	241050	1100-1081	241051
6	Fitform Nordic2 Tilt Bred	sb57 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1084	241054	1100-1085	241055
7	Fitform Nordic2 Tilt Xbred	sb63 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1086	241056	1100-1087	241057
Post	Stoler uten tilt, med rotasjon	Mål *	Vare nr		Vare nr	
			stol m stoff	HMS art nr	stol m hud	HMS art nr
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Mini	sb45 sd43-53 sh40-60 rh72	1100-1064	241058	1100-1065	241059
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Smal	sb45 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1066	241060	1100-1067	241061
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Std	sb51 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1070	241064	1100-1071	241065
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Dyp	sb51 sd49-59 sh40-60 rh84	1100-1068	241062	1100-1069	241063
8	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Bred	sb57 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1072	241066	1100-1073	241063
9	Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Xbred	sb63 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1074	241068	1100-1075	241067
Post	Stoler med tilt og rotasjon	Mål*	Vare nr		Vare nr	
			stol m/stoff	HMS art nr	stol m hud	HMS art nr
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Mini	sb45 sd43-53 sh40-60 rh72	1100-1088	241070	1100-1089	241071
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Smal	sb45 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1090	241072	1100-1091	241073
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Std	b51 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1094	241076	1100-1095	241077
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Dyp	sb51 sd49-59 sh40-60 rh84	1100-1092	241074	1100-1093	241075
10	Fitform Nordic2 Swing Tilt Bred	sb57 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1096	241078	1100-1097	24179
11	Fitform Nordic2 Swing Tilt Xbred	sb63 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1098	241080	1100-1099	241081
Ekstra brede stoler		Mål	Vare nr		Vare nr	
			stol m/stoff	HMS art nr	stol m hud	
	Fitform 570 Tilt 2xbred	sb69 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1002		på forespørsel	
	Fitform 570 Tilt 3xbred	sb75 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1001		på forespørsel	
	Fitform 570 Tilt 4xbred	sb81 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1100		på forespørsel	
	Fitform 570 Tilt 5xbred	sb87 sd43-53 sh40-60 rh84	1100-1100		på forespørsel	

* setedybde mulig 37-59 cm, setehøyde 36-61 cm, benstøttelengde opptil hele 63 cm og ryggghøyde 72-104 cm med tilbehør

Stolene leveres standard i grått stoff eller sort hud inkl. nakkepute, to sidelommer og korsryggstøtte med håndpumpe og manuelt regulerbar i høyden.

Alternative farger/større størrelser kan leveres på bestilling.

Ved privatkjøp/bestilling av avvikende stoler, ser vi oss nødt til å be om et depositum på 25% av kjøpesummen. Depositumet må være innbetalt før produktet bestilles/produseres. Kostbare produkter skal være betalt før utlevering. Produktet er Medema-gruppens eiendom inntil full betaling kan dokumenteres. Spesialbestilte produkter tas ikke i retur.



Vanlig oppreisingfunksjon



Rettløft

FIT-MOTION NYHET

- Innovativt dynamisk sitte- og antidecubitussystem


FIT-MOTION er et innovativt bevegelsessystem som nå kan leveres til Fitform løfte- og hvilestoler. Systemet blir aktivisert automatisk når man setter seg i stolen, men kan om man ønsker det deaktiveres ved hjelp av stolens betjeningsboks.

FIT-MOTION består av to bevegelsesmoduler:

TRYKKAVLASTING: Denne bevegelsesmodulen blir automatisk satt i gang når man sitter med benene på gulvet (benstøtten kjørt ned). Hvert minutt tiltes stolen 2x2grader bakover, og deretter 2x2grader tilbake igjen til utgangsposisjonen. Dette gjentar seg kontinuerlig.



SLOW MOTION GYNGEFUNKSJON: Denne bevegelsesmodulen blir automatisk aktivisert når benstøtten er kjørt opp. Stolen varsler da hvert 15 minutt med et vibrasjonssignal at bevegelse settes i gang. Man kan da velge å bruke stolens oppreisningsfunksjon og reise seg selv. Skjer ikke dette setter stolens tiltfunksjon i gang en langsom gyngebevegelse, med 30% av vanlig hastighet på motorene. Stolens ryggvinkel forblir uendret. Slow-motion bevegelsen kan man selv sette i gang eller deaktivere med betjeningsboksen.

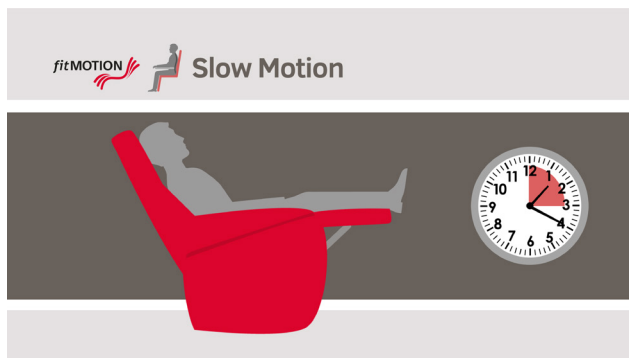

Se video av FIT-MOTION på vår hjemmeside medema.no

Hvorfor FIT-MOTION

Det er alltid sunnere for kroppen med bevegelse enn å sitte stille og med FIT-MOTION får brukere som kanskje ellers sitter svært mye stille bevegelse med faste tidsintervaller. FIT-MOTION har vist seg å ha positiv effekt på blodomløp og surstoffopptak i huden. Slow-motion funksjonen bidrar også til å forhindre hevelser i benene. Bevegelsene bidrar også til trykkforandring som kan ha positiv effekt ved forebygging og leging av trykksår. Gyngebevegelsene med FIT-MOTION (og andre tilsvarende stoler med gyngebevegelse) har også vist seg å ha beroligende effekt på bl.a. demente og personer med smerte. FIT-MOTION's positive effekter er vitenskapelig underbygget. (bl.a. Roessingh Research & Development, Enschede og Dr. Ir. D. van Deursen en Dr. L.L.J.M. van Deursen)

Fit-Motions teknikk

Stoler med FIT-MOTION er utstyrt med spesiell elektronikk og betjeningsboks som avviker fra stolens standardutrustning. Elektronikken er programmert slik at den gjenkjenner i hvilken posisjon brukeren befinner seg, og starter stolens bevegelser basert på dette. Man kan alltid selv sette i gang / deaktivere bevegelsene med betjeningsboksen.



Vi gjør oppmerksom på at Fit-Motion ikke kan kombineres med batteridrift, trådløs betjening, elektrisk regulering av korsryggstøtte og toppdel på rygg, setebredde over 63cm og setedybde over 55cm, samt coxittsete.



Trykktavlastning

Slow motion gyngefunksjon

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1105-1028	241132	Sitte/antidecubitussystem dynamisk Fit-Motion Fitform fabrikkmontert

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic2 løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Balanseproblemer, stort behov for posisjonering i stolen	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt • ILPM/ILPM Plus tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) • Elektrisk regulering av ryggoverdel samt elektrisk regulerbar korsryggstøtte (1118-1004) • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd)
Balanseproblemer og kyfose	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt • ILPM/ILPM Plus tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) • Nakkepute nr 5 dråpeformet (1113-1026) • Elektrisk regulering av ryggoverdel (1118-1004)
Balanseproblemer , mindre behov for posisjonering	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt • ILP rygg (skumbasert med mulighet for individuell plassering av sidestøtter) • Multitilpasningsrygg med sidestøtte
Kyfose	<ul style="list-style-type: none"> • ILPM/ILPM Plus rygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) • Multitilpasningsrygg med sidestøtte • Nakkepute nr 5 dråpeformet (1113-1026)
Scoliose / feilstillinger	<ul style="list-style-type: none"> • ILPM/ILPM Plus rygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)
Trykksår sete (EPUAP grade 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) med Uniform eller Sarcotex trekk • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd) med Uniform eller Sarcotex trekk • Fit-Motion dynamisk sitte/antidecubitussystem (1105-1028) • Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning.
Risiko for trykksår sete	<ul style="list-style-type: none"> • Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering (leveres med ROHO Quadro justerbar flerkammerpute innbygd) • Trykkavlastende sittepute med minneskum • Uniform eller Sarcotex trekk • Fit-Motion dynamisk sitte/antidecubitussystem (1105-1028) • Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning
Risiko for trykksår rygg (nedre del)	<ul style="list-style-type: none"> • Rygg med lag av minneskum (tilpasning) (1122-1029) • IPPM/multitilpasningsrygg med sidestøtte • APPR-rygg luftregulert
Risiko for trykksår på ben / legger	<ul style="list-style-type: none"> • Benstøtte med ekstra minneskum (tilpasning) (1122-1027)
Risiko for trykksår på underarmer	<ul style="list-style-type: none"> • Armlener med ekstra minneskum (tilpasning) (1122-1029)
Ingen håndfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> • Stolen kan klargjøres med spsialelektronik for f.eks øyestyring eller andre former for spesialstyringer. Be om mer informasjon
Inkontinens og risiko for trykksår	<ul style="list-style-type: none"> • Inkontinenstrekk evt Sarcotex trekk • Hele stol levert med "Stamskin" trekk • Trykkavlastende puter i skum, intelligel eller luft (APPR) med Sarcotex trekk
Store personer med høy brukervekt	<ul style="list-style-type: none"> • Setebredde 57cm med max brukervekt 175kg (std størrelse) • Setebredde 63cm med max brukervekt 250kg (std størrelse) • Spesialbestilt stol med setebredde 69, 75, 81 eller 87cm (250kg brukervekt)

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic2 løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Lange personer	<ul style="list-style-type: none"> Ekstra dyp stol sd49-59cm (sb51) (stol har tilstrekkelig setehøyde justering sh40-60cm) Ombyggingsett ekstra setedybde med sd 49-59cm (øvrige setebredder) Alternativ rygg med høyere rygghøyde 94 eller 104cm Benstøtteforlenger (+8cm)
Små/korte personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med rygghøyde 72cm Ekstra lav setehøyde 36, 37, 38, 39cm (ved bruk av ekstra lav setepute med Intelligel) Armlen Vario (lavere) (1113-1010/1113-1012) Ekstra kort setedybde fra 38cm (1118-1005) (Rygg med 2 alt 6cm tykkere polstring) - kortere sd på forspørsel Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)
Smale/tynne personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med setebredde 45 (viktig med riktig setebredde)
Mentalt nedsatt (alzheimer, parkinson)	<ul style="list-style-type: none"> Easy versjon med sammenkoblede elfunksjoner og kun 2 knapper på håndkontroll (1105-1002)
Nakkeproblemer	<ul style="list-style-type: none"> Nakkepute med meget mykt fyll Elektrisk regulering av ryggoverdel (1118-1004)
Behov for bredere armlener , problem med at armene faller ned	<ul style="list-style-type: none"> Bredere armlener (+ 2-4-6cm innover eller utover) (tilpasning)
Behov for å bli kjørt i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Hjulsett Safety (automatisk bremsefunksjon) (1103-1005)
Behov for å flytte stolen i rommet (uten bruker i)	<ul style="list-style-type: none"> Transporthjul (u brems, krever at stolen balanseres) std på stol Hjulsett Safety (automatisk bremsefunksjon) (1103-1005)
Behov for varme	<ul style="list-style-type: none"> Varme i sete og rygg (1105-1035) evt. som del av vårt Memory Kit (1118-1004)
Behov for å arbeide, lese eller spise i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Ulike bordløsninger og lys
Behov for mer/bedre støtte for ben / heler	<ul style="list-style-type: none"> Benstøtteforlenger Sammenhengende trekk for sete og benstøtte Ekstra polstring på benstøtte (f.eks med minneskum eller latex)
Dårlig håndfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> Håndkontroll Light Touch (1105-1004) Trådløs IR løsning betjent med lettbetjent håndkontroll eller nettbrettløsning Elektrisk betjent svingfunksjon (1105-1004). Ulike spesialstyringer (be om info)
Stiv hofte / problem med å bøye hofte / kne	<ul style="list-style-type: none"> Coxittsete (1121-1068)
Risiko strømbrudd og for å snuble i kabler	<ul style="list-style-type: none"> Batteridrift (1123-1003) Batteri back up (1123-1001)
Ønske om myk sittekomfort	<ul style="list-style-type: none"> Setepute ekstra myk (latex) Ekstra myk rygg alternativt multitolpasningsrygg eller ILPM rygg (vår mykeste rygg)
Ønske om korrekt korsryggstøtte	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar korsryggstøtte , manuell (std) eller elektrisk betjent (1113-1016)
Ekstra følsom hud på sete og lår	<ul style="list-style-type: none"> Setepute ekstra myk (latex)
Ekstra følsom hud på armer/albuer	<ul style="list-style-type: none"> Armlen trukket med latex (1122-1025) Trekk med skinn (1122-1030)
Ekstra følsom hud på rygg	<ul style="list-style-type: none"> Rygg ekstra myk eller tilpasning med ekstra latexlag på rygg (1122-1029)
Ekstra følsom hud på legger og knehase	<ul style="list-style-type: none"> Sammenhengende trekk på sete og benstøtte. Ekstra lag med latex på benstøtte
Forflytning til/fra rullestol, sideveis forflytning	<ul style="list-style-type: none"> Sidevanger oppfellbare, manuelt betjent (1113-1030 / 1113-1031) Alt el-betjent (1113-1028/1113-1029)
Problemer med å betjene svingfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> Elektrisk betjent svingfunksjon (1105-1004)
Ryggproblemer, smerter i korsrygg	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar korsryggstøtte , manuell (std) eller elektrisk betjent (1113-1016 / 1118-1004) RCPM sattesystem (dynamisk sitteenhet)

ILPM og ILP

- Våre avanserte tilpasningsrygger



Det medfølger et sett med ulike sidestøtte puter som enkelt kan plasseres der man ønsker

ILPM-Den ultimate tilpasningsryggen som klarer det meste

Ryggen som gjør det mulig å gi stabil og komfortabel sittekomfort til de aller fleste personer med balanseproblemer og behov for posisjonering i stolen, f.eks ved feilstillinger pga kyfose, scoliose etc.

Ryggene har funksjonaliteten fra vår multitilpasningsrygg med leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar rem-regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter. Med hver rygg følger i tillegg med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Med ILPM ryggen følger også manuell luftregulerbar korsryggpute, som også enkelt kan reguleres i høyden. Velg mellom std trekk i stoff eller hud, alternativt spesialstoffene Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) med mye stretch

Som tilbehør kan ryggen også leveres med vårt Memorykit, som inneholder elektrisk regulering av toppdelen på ryggen, varme, minnefunksjon (x2) og elektrisk regulert korsryggstøtte. (1118-1004). Det gir de beste muligheter for selv å kunne endre på sittestilling og alltid kunne oppnå ønsket støtte. Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.


ILP-rygg

En enklere variant uten multitilpasningsfunksjonen. Leveres med manuell justerbar korsryggstøtte med håndpumpe. Og fortsatt med med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Varenr	HMS art nr	Rygg u trekk (inkl regulerbar korsryggstøtte)
1118-1039	196606	ILPM rygg sb45 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1038	206870	ILPM rygg sb45 rh72 multijusterbar u trekk
1118-1041	200015	ILPM rygg sb51 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1040	241120	ILPM rygg sb51 rh72 multijusterbar u trekk
1118-1042	241121	ILPM rygg sb57 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1043	241122	ILPM rygg sb63 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1059		ILPM rygg sb69 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1035	195701	ILP rygg sb45 rh84 u trekk
1118-1034	241115	ILP rygg sb45 rh72 u trekk
1118-1036	195702	ILP rygg sb51 rh84 u trekk
1118-1037	195703	ILP rygg sb57 rh84 u trekk
1118-1063	241116	ILP rygg sb63 rh84 u trekk
Varenr	HMS art nr	Trekk til ILPM og ILP rygger
1122-1181	241261	Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb45 rh84
1122-1182	241259	Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb45 rh72
1122-1183	241265	Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb51 rh84
1122-1184	241263	Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb51 rh72
1122-1185	241267	Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb57 rh84
1122-1186	241269	Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb63 rh84
1122-1187	241260	Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb45 rh84
1122-1188	241258	Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb45 rh72
1122-1189	241264	Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb51 rh84
1122-1190	241262	Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb51 rh72
1122-1191	241266	Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb57 rh84
1122-1192	241268	Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb63 rh84
1122-1193	241202	Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb45 rh84
1122-1194	241200	Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb45 rh72
1122-1195	241206	Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb51 rh84
1122-1196	241204	Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb51 rh72
1122-1197	241208	Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb57 rh84
1122-1198	241210	Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb63 rh84
1122-1211	241150	Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb45 rh84
1122-1212	241148	Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb45 rh72
1122-1213	241154	Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb51 rh84
1122-1214	241152	Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb51 rh72
1122-1215	241156	Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb57 rh84
1122-1216	241158	Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb63 rh84



ILPM-ryggen har ekstra mykt skum i senter av rygg

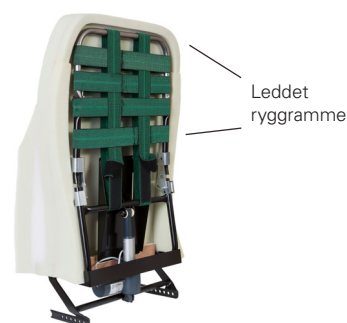

ILPM-ryggen har leddet ryggramme som kan vinkles to steder på hver side kombinert med justerbar rem regulering

ILPM PLUS

– med ekstra stabile sidestøtter - når behov for fastere tilpasning **NYHET**

Ny avansert tilpasningsrygg fra Fitform, med egenskapene til ILPM ryggen men i tillegg med ekstra avstivede og stabile sidestøtter, som enkelt kan høydereguleres ved hjelp av ratt bak på ryggen. Man kan også velge tykkelse på sidestøttepolstrene. Velg mellom spesialstoffene Uniform og Sarcotex (inkosikkert) som har mye stretch. Kan ikke leveres med std stoff eller hud.



NYHET ILPM PLUS – med ekstra stabile sidestøtter


Varenr	HMS art nr	Varenavn
1118-1055	241117	Rygg ILPM PLUS sb45 rh84 u trekk
1118-1056	233724	Rygg ILPM PLUS sb51 rh84 u trekk
1118-1057	241118	Rygg ILPM PLUS sb57 rh84 u trekk
1118-1064	241119	Rygg ILPM PLUS sb63 rh84 u trek
1122-1217	241213	Trekk ILPM Plus rygg sb45 rh84 spesialstoff Uniform mye stretch grå
1122-1219	241215	Trekk ILPM Plus rygg sb51 rh84 spesialstoff Uniform mye stretch grå
1122-1221	241216	Trekk ILPM Plus rygg sb57 rh84 spesialstoff Uniform mye stretch grå
1122-1222	241217	Trekk ILPM Plus rygg sb63 rh84 spesialstoff Uniform mye stretch grå
1122-1223	241160	Trekk ILPM Plus rygg sb45 rh84 spesialstoff Sarcotex mye stretch sort
1122-1225	241162	Trekk ILPM Plus rygg sb51 rh84 spesialstoff Sarcotex mye stretch sort
1122-1227	241163	Trekk ILPM Plus rygg sb57 rh84 spesialstoff Sarcotex mye stretch sort
1122-1228	241164	Trekk ILPM Plus rygg sb63 rh84 spesialstoff Sarcotex mye stretch sort
Varenr	HMS art nr	Tilbehør til ryggene
1118-1004		Elektrisk regb toppdel rygg, el korsryggstøtte og 2x minne
1118-1002		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg
1113-1016		Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform
1106-1008	241092	Ombyggingsats økt setedybde sd49-59 sd45
1106-1004	241093	Ombyggingsats økt setedybde sd49-59 sd51
1106-1009	241094	Ombyggingsats økt setedybde sd49-59 sd57
1106-1005	241095	Ombyggingsats økt setedybde sd49-59 sd63

Rygg APPR luftregulert

Avansert løsning for optimal trykkavlastning og samtidig muligheter for posisjonering av ryggen. Dette gjøres med et sett av ulike luftputer som bygges inn i ryggen. Bør for optimal effekt brukes i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) spesialtrekk med mye stretch og pustende egenskaper og gjene sammen med APPR luftbasert sittepute. (s.12) Leveres kun ferdig fabrikkmontert i valgt rygg.

Bak glidelåsen bak på ryggen finner du da 4 ulike slanger/ventiler med 4 ulike farger:

- Den gul-grønne ventilen er for justering av korsryggstøtten
- Den blå ventilen er for å justere sidestøtte.
- Den brune slangen er for å justere den øvre delen av ryggen (f.eks støtte ved kyfose)
- Den sorte ventilen er for puten i front av ryggen. Trykket i de ulike putene/kammerene endres ikke raskt. Det er imidlertid viktig å sjekke hyppig at innstillingene fortsatt er riktige for brukeren.

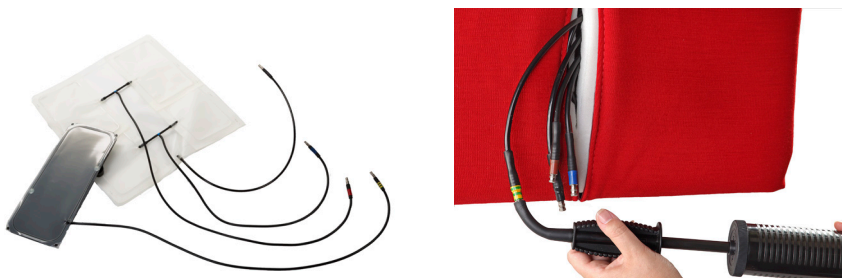

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1118-1084	241110	Rygg APPR sb 45 rh 72 luftregulert u trekk
1118-1085	241111	Rygg APPR sb 45 rh 84 luftregulert u trekk
1118-1086	241112	Rygg APPR sb 51 rh 84 luftregulert u trekk
1118-1087	241113	Rygg APPR sb 57 rh 84 luftregulert u trekk
1118-1088	241114	Rygg APPR sb 63 rh 84 luftregulert u trekk

Trekk, se bestillingsdata

Fitform 576 Nordic2

- Rygg multilpasning / kyfose, med og uten sidetøtte

Spesielt egnet ved kyfose, men også for brukere med avvikende kroppsform og moderat behov for støtte.

Ryggene har leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar rem-regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter. (Se fotos s.8) Dette gir mulighet for å forme ryggen etter brukers rygg, og sørger for støtte til hele ryggen. Leveres standard med regulerbar korsryggstøtte med håndpumpe.

Rygg multilpasning med sidestøtte

Rygg med ryggskum med sidestøtte. For brukere med moderat behov for sidestøtte. Ved behov for mer støtte anbefales våre ILPM eller ILPM Plus rygger.



Leddet ryggramme

Leddet ryggramme som kan vinkles to steder på hver side kombinert med justerbar rem regulering

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1118-1011	195707	Rygg sb45 rh84 multilpasning/kyfose korsryggstøtte u.trekk
1118-1017	195713	Rygg sb51 rh84 multilpasning/kyfose korsryggstøtte u.trekk
1118-1023	195719	Rygg sb57 rh84 multilpasning/kyfose korsryggstøtte u.trekk
1121-1112	241272	Trekk sb45 rh84 rygg multilpasning stoff
1121-1113	241276	Trekk sb51 rh84 rygg multilpasning stoff
1122-1047	241285	Trekk sb45 rh84 rygg multilpasning hud
1122-1062	24186	Trekk sb51 rh84 rygg multilpasning hud
1121-1115	241288	Trekk sb57 rh84 rygg multilpasning hud
1121-1114	241280	Trekk sb57 rh84 rygg multilpasning stoff
1118-1010	195708	Rygg sb45 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte korsryggstøtte u.trekk
1118-1016	195714	Rygg sb51 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte korsryggstøtte u.trekk
1118-1022	195720	Rygg sb57 rh84 multilpasning/kyfose m sidestøtte korsryggstøtte u.trekk
1121-1109	241273	Trekk sb45 rh84 rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte stoff
1121-1109	241277	Trekk sb51 rh84 rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte stoff
1121-1109	241281	Trekk sb57 rh84 rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte stoff
1122-1045	241284	Trekk sb45 rh84 rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte hud
1122-1060	241287	Trekk sb51 rh84 rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte hud
1122-1073	241289	Trekk sb57 rh84 rygg m sidestøtte/multilpasning m sidestøtte hud
1113-1016		Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform
1118-1004		Elektrisk regb toppdel rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte og varme
1118-1002		Elektrisk regulerbar toppdel på rygg



Rygg med sidestøtte

Rygg myk (med regulerbar korsryggstøtte)

Valget for dem som ønsker en mykere sitte-komfort.

Alternative rygg høyder 72, 94 eller 104 cm,

For lange personer kan det leveres alternativ rygg høyde 94 eller 104cm, for små personer 72cm. Standard rygg høyde er 84cm. Bestillingsdata, se nedenunder.

Rygg for ekstra kort setedybde (fra sd37cm)

Gjøres ved å legge på et ekstra lag med skum i ryggen (+2 eller 6cm) Oppgi ønsket sd, samt bredde på stol. Enda kortere setedybde på forespørsel.

Varenr 1118-1005 HMS 195704 Rygg kortere setedybde etter mål (fra sd37), inkl tilpasset stofftrekk.

Rygg for ekstra trykkavlastning

Ved behov for ekstra trykkavlastning kan vi levere ryggene med et topplag med minneskum (memoryfoam) 1122-1029 Alternativt med latexskum ved ønske om ekstra myk komfort 1122-1028 Bestilles som tillegg til valgt rygg.

Varenr	HMS art nr	Rygg ekstra myk
1118-1006	241124	Rygg sb45 rh72 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk
1118-1007	195705	Rygg sb45 rh84 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk
1118-1013	195711	Rygg sb51 rh84 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk
1118-1020	195718	Rygg sb57 rh84 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk
1118-1091	241126	Rygg sb63 rh84 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk
Varenr	HMS art nr	Trekk til rygg ekstra myk
1122-1165	241251	Trekk sb45 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1164	241249	Trekk sb45 rh72 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1166	241253	Trekk sb51 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1167	241255	Trekk sb57 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1168	241257	Trekk sb63 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1170	241250	Trekk sb45 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
1122-1169	241248	Trekk sb45 rh72 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
1122-1171	241252	Trekk sb51 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
1122-1280	241254	Trekk sb57 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
1122-1172	241256	Trekk sb63 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
Varenr	HMS art nr	Rygg lav og ex høy
1118-1008		Rygg sb45 rh72 lav m korsryggstøtte u trekk
1118-1014		Rygg sb51 rh72 lav m korsryggstøtte u trekk
1118-1019		Rygg sb51 rh94 ex høy m korsryggstøtte u trekk
1118-1025		Rygg sb57 rh94 ex høy m korsryggstøtte u trekk
Varenr	HMS art nr	Trekk til rygg lav og ex høy
1122-1164		Trekk sb45 rh72 rygg lav m korsryggstøtte stoff grå
1122-1273		Trekk sb51 rh72 rygg lav m korsryggstøtte stoff grå
1122-1277		Trekk sb51 rh94 rygg ex høy m korsryggstøtte stoff
1122-1281		Trekk sb57 rh94 rygg ex høy m korsryggstøtte stoff
1122-1269		Trekk sb45 rh72 rygg lav m korsryggstøtte hud sort
1122-1274		Trekk sb51 rh72 rygg lav m korsryggstøtte hud sort
1122-1278		Trekk sb51 rh94 rygg ex høy m korsryggstøtte hud
1122-1282		Trekk sb57 rh94 rygg ex høy m korsryggstøtte hud
1122-1100		Trekk Sarcotex rygg etter mål
1122-1009		Tillegg for polstring rygg med topplag med minneskum
1122-1028		Tillegg for polstring rygg med latexskum

* Andre størrelser på forespørsel

Fitform 576 Nordic2

- Alternative seteløsninger

Korsryggstøtte og varme

Manuelt betjent korsryggstøtte med håndpumpe og som også kan høydereguleres, er standard på nye Fitform 576 Nordic2, og inngår også på de fleste av våre spesialrygger. Leveres alternativt elektrisk betjent eller som del av vårt Memory Kit.

Varenr	Varenavn
1113-1016	Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform (fabrikkmontert)
1118-1004	Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte(Memory-kit) og varme.
1105-1035	Varme i sete og rygg (195789)

Elektrisk regulerbar toppdel på rygg og Memory-kit

Toppdelen på ryggen kan leveres med elektrisk regulering betjent med separat håndkontroll. Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.

Kan også leveres som del i vårt Memory-kit sammen med minnefunksjon (x2) og elektrisk regulerbar korsryggstøtte samt varme.

Med minnefunksjonen kan to ulike innstillinger lagres, og betjenes som følger:

Innstill først stolen i ønsket posisjon. Trykk MEM til de hører en pipetone og trykk så 1 (eller 2) for å lagre denne posisjonen.

Varenr	Varenavn
1118-1002	Elektrisk regulerbar toppdel på rygg Fitform
1118-1004	Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte.(Memory-kit) og varme

Ombyggingsett for økt setedybde 49-59cm for lange personer

Ved behov for setedybde utover det som er std på stolene (44-54cm) kan leveres ombyggingsett som gir mulighet for setedybde opptil 59cm.

Stol med setebredde 51cm leveres for øvrig ferdig i dyp modell med setedybde 49-59cm .

Ombyggingsettet kan brukes for å oppnå setedybde opptil 59cm også på øvrige setebredder. (setebredde må oppgis ved etterbestilling)

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1106-1008	241092	Ombyggingsett økt setedybde sd49-59cm sb45
1106-1004	241093	Ombyggingsett økt setedybde sd49-59cm sb51
1106-1009	241094	Ombyggingsett økt setedybde sd49-59cm sb57
1106-1005	241095	Ombyggingsett økt setedybde sd49-59cm sb63

Benstøtteforlenger +8cm for lange personer (opptil hele 63 cm)

Gir mulighet for god støtte under hele legg/fothæl også for lange personer.

Forlengelsen felles automatisk inn når benstøtten senkes mot gulv og forhindrer at benstøtten går i gulvet, noe som kan skade stolen.

Dette innebærer at benstøtten kan forlenges uten konflikt med ønsket setehøyde

Varenr	Varenavn
1108-1005	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb45 (195665)
1108-1006	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb51 (195666)
1108-1007	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb57 (195667)
1108-1013	Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb63 (241088)

Ekstra polstring benstøtte, og sammenhengende heldekkende trekk sete/ benstøtte

Benstøtten kan ved nylevering bestilles med ekstra polstring , enten med minneskum, dersom ekstra trykkavlastning ønskes f.eks ved risiko for trykksår.

Alternativt med latex, hvis ekstra myk komfort ønskes, f. eks ved ekstra følsom hud.

Kombineres med alternativt sammenhengende heldekkende trekk sete-benstøtte, som også ved bruk alene gir en mykere komfort enn standard løsning.

Varenr	Varenavn
1122-1027	Ekstra polstring med minneskum på benstøtte (krever trekk FN620-sb)
1122-1026	Ekstra polstring med latex på benstøtte (krever trekk FN620-sb)
1121-1116	Trekk sb45 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1117	Trekk sb51 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1118	Trekk sb57 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1119	Trekk sb63 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1120	Trekk sb45 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1121	Trekk sb51 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1122	Trekk sb57 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1123	Trekk sb63 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud

Kan også leveres med trekk i Sarcotex eller Uniform (se bestillingsdata)



Stol med benstøtteforlenger



Trekk benstøtte-sete sammenhengende

Fitform 576 Nordic2

- Alternative sitteløsninger

Sete APPR luftbasert for trykkavlastning og posisjonering.

Vår mest avanserte løsning for optimal trykkavlastning og muligheter for posisjonering. Høyrisikoputesom anbefales ved trykksår og risiko for trykksår.

Leveres med innebygget Roho flerkammerpute i ramme av skum, som sørger for at puten fungerer optimalt funksjons- og sikkerhetsmessig også når stolens funksjoner benyttes. Flerkammerløsningen gir også muligheter for posisjonering. Bør for optimal effekt brukes i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) spesialtrekk med mye stretch og pustende egenskaper.

Varenr	HMS art nr	Pute uten trekk
1121-1043	241127	Pute sete APPR sb45 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget u trekk
1121-1044	241128	Pute sete APPR sb51 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget u trekk
1121-1045	241129	Pute sete APPR sb57 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget u trekk
1121-1070	241130	Pute sete APPR sb63 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget u trekk
Varenr	HMS art nr	Trekk till APPR pute
1121-1100	241219	Trekk spesial Uniform sb45 for APPR sete grå
1121-1101	241226	Trekk spesial Uniform sb51 for APPR sete grå
1121-1102	241234	Trekk spesial Uniform sb57 for APPR sete grå
1121-1103	241241	Trekk spesial Uniform sb63 for APPR sete grå
1121-1104	241220	Trekk spesial Uniform sb45 for APPR sete sort
1121-1105	241227	Trekk spesial Uniform sb51 for APPR sete sort
1121-1106	241235	Trekk spesial Uniform sb57 for APPR sete sort
1121-1107	341242	Trekk spesial Uniform sb63 for APPR sete sort
1121-1092	241166	Trekk spesial Sarcotex sb45 for APPR sete inkosikkert grå
1121-1093	241173	Trekk spesial Sarcotex sb51 for APPR sete inkosikkert grå
1121-1094	241181	Trekk spesial Sarcotex sb57 for APPR sete inkosikkert grå
1121-1095	241189	Trekk spesial Sarcotex sb63 for APPR sete inkosikkert grå
1121-1096	241167	Trekk spesial Sarcotex sb45 for APPR sete inkosikkert sort
1121-1097	241174	Trekk spesial Sarcotex sb51 for APPR sete inkosikkert sort
1121-1098	241182	Trekk spesial Sarcotex sb57 for APPR sete inkosikkert sort
1121-1099	241188	Trekk spesial Sarcotex sb63 for APPR sete inkosikkert sort



Setepute APPR luftbasert




Setepute Intelligel

Gelbasert pute med meget gode trykkavlastende egenskaper. Anbefales brukt i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex trekk med mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker). Leveres også i lav utførelse som muliggjør setehøyde fra 36cm.

Varenr	HMS art nr	Pute uten trekk
1121-1026	195685	Setepute Intelligel sb45 m gel, u.trekk
1121-1027	195686	Setepute Intelligel sb51 m gel, u.trekk
1121-1028	195687	Setepute Intelligel sb57 m gel, u.trekk
1121-1029	196521	Setepute Intelligel sb63 m gel, u.trekk

Trekk, se neste side

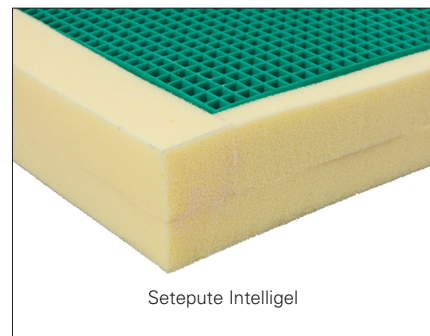


Setepute Intelligel

Setepute Intelligel for ekstra lav setehøyde

Varenr	HMS art nr	Pute uten trekk
1121-1047	195727	Setepute Intelligel ekstra lav sb45 (sh fra 36cm)
1121-1048	195728	Setepute Intelligel ekstra lav sb51 (sh fra 36cm)
1121-1049	241108	Setepute Intelligel ekstra lav sb57 (sh fra 36cm)
1121-1050	241109	Setepute Intelligel ekstra lav sb63 (sh fra 36cm)

Trekk, se neste side

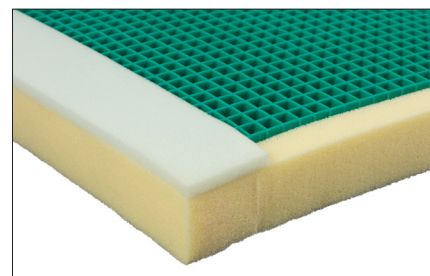

Setepute Intelligel ekstra lav

Setepute myk Latex

Setepute av latex som gir klart mykere sittekomfort enn standardputen. Kan med fordel kombineres med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) trekk som har mye stretch.

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1121-1014	195688	Setepute myk latex sb45 (u trekk)
1121-1018	195692	Setepute myk latex sb51 (u trekk)
1121-1022	195696	Setepute myk latex sb57 (u trekk)

Trekk, se lenger ned på siden

Setepute trykkavlastning skumbasert

Avanserte lagdelte skumputer med ulike fastheter tilpasset ulik brukervekt. Anbefales brukt i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) trekk med gode pustende egenskaper og mye stretch.

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1121-1016	195691	Setepute skumbasert sb45 trykkavlastning myk <70kg
1121-1020	195695	Setepute skumbasert sb51 trykkavlastning myk 70-90kg
1121-1024	195697	Setepute skumbasert sb57 trykkavlastning relativt fast >90kg
1121-1025	195699	Setepute skumbasert sb63 trykkavlastning relativt fast >90kg

Setepute trykkavlastning skumbasert med minneskum, ekstra myk

Avanserte skumbaserte puter med topplag med minneskum, som leveres i 3 ulike fastheter tilpasset ulik brukervekt, hvit/gul for opptil 70kg (til sb45), rød/grønn for 70-90kg (til sb51), og Gul/grønn for over 90kg til sb57 og større.

Andre kombinasjoner skum/størrelser leveres på forespørsel. (hvit/gul er mykest)

Anbefales brukt i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) trekk med mye stretch og gode pustende egenskaper.

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1121-1015	195690	Setepute sb45 trykkavlastning ex myk m minneskum <70kg (u.trekk)
1121-1019	195694	Setepute sb51 trykkavlastning ex myk m minneskum 70-90kg (u.trekk)
1121-1023	195692	Setepute sb57 trykkavlastning ex myk m minneskum >90kg (u.trekk)

* Andre kombinasjoner av skum kan leveres på forespørsel

Plansete

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1121-1007	195675	Plansete etter mål
1121-1008	195676	Plansete etter mål m kant

Coxittsete

Her kan høyre og venstre setehalvdel vinkles uavhengig av hverandre.

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1121-1068		Coxittsete

Spesialtrekk Uniform og Sarcotex for trykkavlastende puter og mykere komfort

Spesialtrekk med spesiell god stretch og gode pustende egenskaper. Gir mykere sittekomfort enn std trekkene. Sarcotex er i tillegg inkontinenssikkert. Anbefales for optimal effekt ved bruk av trykkavlastende puter. Kan på forespørsel også leveres til rygg og andre deler på stolen. Vi kan også levere andre typer spesialtrekk, f. eks spesialtrekk med antibakteriell beskyttelse

Varenr	HMS art nr	Spesialtrekk til trykkavlastende puter
1121-1100	241221	Trekk Uniform sb45 for setepute trykkavlast grå
1121-1101	241228	Trekk Uniform sb51 for setepute trykkavlast grå
1121-1102	241236	Trekk Uniform sb57 for setepute trykkavlast grå
1121-1103	241243	Trekk Uniform sb63 for setepute trykkavlast grå
1121-1104	241222	Trekk Uniform sb45 for setepute trykkavlast sort
1121-1105	241229	Trekk Uniform sb51 for setepute trykkavlast sort
1121-1106	241237	Trekk Uniform sb57 for setepute trykkavlast sort
1121-1107	241244	Trekk Uniform sb63 for setepute trykkavlast sort
1121-1087	241168	Trekk Sarcotex sb45 for setepute trykkavlast grå inkosikkert
1121-1088	241175	Trekk Sarcotex sb51 for setepute trykkavlast grå inkosikkert
1121-1089	241183	Trekk Sarcotex sb57 for setepute trykkavlast grå inkosikkert
1121-1090	241190	Trekk Sarcotex sb63 for setepute trykkavlast grå inkosikkert
1122-1002	241169	Trekk Sarcotex sb45 for setepute trykkavlast sort inkosikkert
1122-11114	241176	Trekk Sarcotex sb51 for setepute trykkavlast sort inkosikkert
1122-1106	241184	Trekk Sarcotex sb57 for setepute trykkavlast sort inkosikkert
1122-1091	241191	Trekk Sarcotex sb63 for setepute trykkavlast sort inkosikkert
1122-1100		Trekk Sarcotex rygg etter mål

Standardtrekk sete i stoff og hud

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1122-1252	241382	Trekk setepute sb45 Fitform Nordic2 stoff grå
1122-1253	241388	Trekk setepute sb51 Fitform Nordic2 stoff grå
1122-1254	241394	Trekk setepute sb57 Fitform Nordic2 stoff grå
1122-1255	241400	Trekk setepute sb63 Fitform Nordic2 stoff grå
1122-1256	241381	Trekk setepute sb45 Fitform Nordic2 hud sort
1122-1257	241387	Trekk setepute sb51 Fitform Nordic2 hud sort
1122-1258	241393	Trekk setepute sb57 Fitform Nordic2 hud sort
1122-1259	241399	Trekk setepute sb63 Fitform Nordic2 hud sort
1121-1116	241271	Trekk sb45 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1117	241275	Trekk sb51 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1118	241279	Trekk sb57 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1119	241283	Trekk sb63 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1120	241270	Trekk sb45 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1121	241274	Trekk sb51 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1122	241278	Trekk sb57 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1123	241282	Trekk sb63 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud



Myk Latex



Ekstra myk < 70kg



Ekstra myk 70-90kg



Ekstra myk < 90kg



Plansete



Coxittsete



Spesialtrekk Sarcotex med mye stretch (inkosikkert)

Fitform 576 Nordic2

- Diverse sitteløsninger

Seterotasjon, manuell eller elektrisk betjent

Fitform leveres i standardutførelser både med og uten seterotasjon. Vår mest brukte løsning låser rotasjonen automatisk når man begynner å regulere oppreisningsfunksjonen. Dette gir maksimal sikkerhet ved at man ikke kan utløse rotasjonen under oppreising. Den kan alternativt leveres manuelt låsbar med hendel/håndgrep dersom man ønsker lås også i nederste stilling. Svingskive/ seterotasjon kan enkelt ettermonteres på alle stoler.

Seterotasjonen kan også leveres elektrisk betjent via en håndkontroll.

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1102-1011	207217	Seterotasjon sb45 manuell med automatisk låsing
1102-1012	202648	Seterotasjon sb51 manuell med automatisk låsing
1102-1013	213253	Seterotasjon sb57 manuell med automatisk låsing
1102-1014	159379	Seterotasjon sb63 manuell med automatisk låsing
1102-1015	241290	Seterotasjon sb45 manuell med lås man m hendel
1102-1016	241291	Seterotasjon sb51 manuell med lås man m hendel
1102-1017	241292	Seterotasjon sb57 manuell med lås man m hendel
1102-1018	241293	Seterotasjon sb63 manuell med lås man m hendel
1102-1004		Sving/seterotasjon el Fitform merpris på stol med rotasjon
1102-1005		Sving/seterotasjon el+IR Fitform merpris på stol m rotasjon



Seterotasjon



Sidevange oppfellbar, manuelt betjent

Sidevange oppfellbar, manuell eller elektrisk betjent

En meget god løsning for sideveis forflytning inn og ut av stolen, f. til/fra rullestol. Her er det lett å komme til og nå armlenet på motsatt side av stolen. Sidevangen svinges enkelt bakover, og kan også leveres med elektrisk betjening via separat håndkontroll.

Kan leveres på en eller begge sider av stolen.

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1113-1030	195730	Sidevange Fitform fellbar man høyre
1113-1031	195731	Sidevange Fitform fellbar man venstre
1113-1028	201847	Sidevange Fitform fellbar el høyre
1113-1029	200239	Sidevange Fitform fellbar el venstre

Alternative armlensløsninger

Armlenene på Fitform stolen kan reguleres i høyden uten bruk av verktøy, og låses med et ratt bak en glidelås på sidevangen. Kan polstres ekstra med minneskum f.eks ved risiko for trykksår eller med myk latex f.eks ved ømfintlig hud, da gjerne kombinert med trekk i myk hud. Som tilpasning kan armlenene breddes 2,4 eller 6cm innover eller utover.

Varenr	HMS nr	Varenavn
1113-1049	195656	Armlen Vario hø stoff (ca 2cm lavere enn std armlen)
1113-1048	195654	Armlen Vario ve stoff (ca 2cm lavere enn std armlen)
1113-1009	195653	Armlen Vario hø hud (ca 2cm lavere enn std armlen)
1113-1011	195655	Armlen Vario ve hud (ca 2cm lavere enn std armlen)
1113-1046	195650	Armlen Vario bred hø stoff (+2cm innover)
1113-1047	195652	Armlen Vario bred ve stoff (+2cm innover)
1113-1001	195649	Armlen Vario bred hø hud (+2cm innover)
1113-1002	195651	Armlen Vario bred ve hud (+2cm innover)
1122-1025		Ekstra polstring med minneskum, pr armlen
1122-1024		Ekstra polstring med myk latex, pr armlen
1122-1030	241405	Trekk armlen i hud stk



Sidevange oppfellbar, elektrisk betjent



Armlen bred



Hjulsett Safety

(for kjøring med bruker i stol)

En meget sikker løsning ved at hjulene kun aktiviseres når man skyver ned skyvebøylen bak på ryggen. Stolen står støtt når ikke bøylen skyves ned. Velegnet for bruk med bruker i stolen. Kan ikke kombineres med seterotasjon/svingskive/multitilpasningsrygg. Passer kun med ny modell 576 Nordic2. Etterlevering til eldre stoler, bruk varenr 1103-1001.



Transporthjul

Transporthjul montert bak på stolens føtter. Krever at stolen bikkes bakover og balanseres når stolen skal flyttes. Stolen står støtt når dette ikke gjøres. Leveres nå standard på stoler både med og uten sving.

Varenr	HMS art nr	Varenavn
1113-1005	241089	Hjulsett Safety fabrikkmontert
1113-1006	241090	Hjulsett Safety for ettermontering

NB. Ved ettermontering av hjulsett på eksisterende stol kreves bytte til ryggramme og ryggtrekk, som er forberedt for hjulsett mekanisme (mont. på spesialrygg, kun etter avtale).



Bord Fellbart og svingbart

Regulerbart i høyde, dybde og vinkel

1114-1002 HMS art nr 195661 Bord fellbart svingbart hdvreg (høyre mont)

1114-1002 HMS art nr 241086 Bord fellbart svingbart hdvreg (venstre mont)



Bord transparent svingbart

1114-1006 HMS 195664 Bord transparent



Bord tre svingbart

1114-1007 HMS art nr 241087 Bord tre svingbart



Bord frittstående

1114-1004 HMS art nr 195670 Bord frittstående hvreg, stillbart til ulike setebredder



Batteri Back Up

Passer stoler med Linak og Ciar elektronikk (1123-1001 HMS art nr 195657). Stolen kan også leveres med batteridrift (1123-1003 HMS art nr 195658).

Fitform 576 Nordic2

- Diverse sitteløsninger

Nakkeputer

Std.

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5



1113-1036 Std stoff
1113-1037 Std hud
m/fiberfyll



1113-1038 Liten stoff
1113-1019 Liten hud
m/fiberfyll, formbar



1113-1039 Stor stoff
1113-1021 Stor hud
m/fiberfyll, formbar



1113-1040 M bånd stoff
1113-1023 M bånd hud
1113-1041 M bånd Uniform
1113-1042 M bånd Sarcotex
m/fiberfyll, formbar



1113-1043 Dråpeform stoff
1113-1025 Dråpeform hud
1113-1041 Dråpeform Uniform
1113-1042 Dråpeform Sarcotex
m/fiberfyll, formbar



Hodestøtte med sidestøtte formbar skum
1113-1034 Stoff grå
1113-1033 Sarcotex sort
1113-1035 Uniform
1113-1032 Sort hud



Sidestøtte rygg
1121-1060 Sidestøtte rygg, par
(bruk alt. IPLM PLUS rygg som gir større
mulighet for tilpasning, og er en bedre
løsning)



Plansete
1121-1007 Plansete Fitform etter mål
1121-1008 Plansete Fitform m kant
etter mål



Inkontinenstrekk
1122-1177 Inkotrekk sete sb45
1122-1178 Inkotrekk sete sb51
1122-1179 Inkotrekk sete sb57
1122-1180 Inkotrekk sete sb63
1122-1014 Inkotrekk rygg etter mål
Trekk sete Sarcotex inkosikkert, se side 13.



Inkontinenstrekk
1122-1173 Inkotrekk sete og benstøtte sb45
1122-1174 Inkotrekk sete og benstøtte sb51
1122-1175 Inkotrekk sete og benstøtte sb57
1122-1176 Inkotrekk sete og benstøtte sb63



IR-styring
1105-1001 Betjningsboks til IR styring Fitform trådløs
lettbetjent mod Gewa
(krever 1105-1018)
1105-1018 Tillegg CIAR elektronikk for IR styring
Fitform Nordic (kun fabrikkmontert)
FN-NETT B Nettbrett til IR styring Fitform
(krever FN-IR) inkl programmering
Stolen kan også styres med omgivelseskontroll
f.eks Rolltalk, spesialstyringer som f.eks
øyestyling etc. Be om mer info.



Betjeningsboks standard
1105-1005 Betjeningspanel std stol m tilt
1105-1003 Betjeningspanel std stol u tilt



Betjeningsboks lettbetjent
Svært lettbetjent betjeningspanel
1105-1004 HMS 195659 Betjeningsboks
Light Touch Fitform lettbetjent (Linak)



Betjeningsboks Easy
1105-1002 Betjeningsboks Easy m 2
knapper og sammenkoblede elfunksjoner
For brukere som synes det er forvirrende
med mange knapper på betjeningsboksen.
Kan den leveres i en Easy-utgave med kun
2 knapper. Da blir oppreisningsfunksjon,
setetilt og benstøtteregulering sammen-
kople. Ryggreguleringen bortfaller (gjelder
kun ved nyl levering, kan ikke etterbestilles).

Fitform 576 Nordic2 - ordreguide (NAV-kontrakt fom 010518)													
Komplette stoler													
	sb45 Smal rH84 s043-53 art nr	sb45 Mini rH72 s043-53 art nr	sb51 Std rH84 s043-53 art nr	sb51 Dypp rH84 s043-53 art nr	sb57 Bred rH84 s043-53 art nr	sb63 Xbred rH84 s043-53 art nr		sb45 Smal rH84 s043-53 art nr	sb45 Mini rH72 s043-53 art nr	sb51 Std rH84 s043-53 art nr	sb51 Dypp rH84 s043-53 art nr	sb57 Bred rH84 s043-53 art nr	sb63 Xbred rH84 s043-53 art nr
Fitform 576 Nordic2 Tilt (uten swing) Post 6 og 7	stoff	hud	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff
Fitform 576 Nordic2 Swing Tilt Post 10 og 11	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff
Fitform 576 Nordic2 Swing (uten tilt) Post 8 og 9	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff
Bredere stoler, se helt nederst													
Tilbehør													
Sitte-/antidecubussytem dynamisk FIT-MOTION fabrikkmontert													
Sitte-/antidecubussytem dynamisk FIT-MOTION ettermontering													
Armlen Vario Fitform Nordic2 h0 hud sort (2cm lavere enn std)	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud
Armlen Vario Fitform Nordic2 h0 stoff grå (2cm lavere enn std)	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff
Armlen Vario Fitform Nordic2 ve hud sort (2cm lavere enn std)	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud
Armlen Vario Fitform Nordic2 ve stoff grå (2cm lavere enn std)	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff
Armlen bred Fitform Nordic2 +2cm innover h0 hud sort	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud
Armlen bred Fitform Nordic2 +2cm innover h0 stoff grå	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff
Armlen bred Fitform Nordic2 +2cm innover h0 hud sort	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud	hud
Armlen bred Fitform Nordic2 +2cm innover h0 stoff grå	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff	stoff
Tillegg polstring armlen med trykkavlastende minneskum sk													
Tillegg polstring armlen med trykkavlastende minneskum sk													
Tillegg polstring benstøtte med trykkavlastende minneskum sk													
Tillegg polstring benstøtte med mykt latex-skumsk													
Batteridrift stol oppreis Fitform Nordic2 (Lunak)													
Batteri Back Up (passer til Lunak og Gar)													
Betjings lettbeint Fitform Nordic2/Nordic Light (Lunak)													
Betjings lettbeint Fitform Nordic2/Nordic Light Touch (Lunak)													
Betjings lettbeint Fitform Nordic2 venstre montert (på ny stol)													
Tillegg betjings EASY 2kn (lør el løft+tilt+benst samkopl)kun fabmont													
Tillegg IR-styring (trådløs) Fitform Nordic2 Gar-ehnikk (kun fab mont)													
Betjings 10kn IR-styring Fitform trådløs lettbeint (1105-1018)													
Bord stol Fitform Nordic2/Nordic felbart svingbart h0reg (h0-mont)													
Bord stol Fitform Nordic2/Nordic felbart svingbart h0reg (ve-mont)													
Bord stol Fitform Nordic hvreg frittsstående													
Bord stol Fitform Nordic transparent													
Bord stol Fitform Nordic tre													
Førlønger benstøtte Fitform +8cm automatisk felbart													
Hjulsett Safety Fitform Nordic2 skivebryte løsning stol m/brukerfabmont													
Hjulsett Safety Fitform Nordic2 skivebryte løsning stol m/brukerfabmont													
Inkotrekk spesial Sarcotex GRÅ f sete nye stretch (h0dekkende)													
Inkotrekk spesial Sarcotex SORT f sete nye stretch (h0dekkende)													
Inkotrekk rygg Fitform2 eller mål													
Korsryggsette elektrisk Fitform Nordic kun fabmont													

Bestillingsdata

	1118-1004	1106-1008	241092	1118-1004	1106-1008	241092	1118-1004	1106-1004	241093	1118-1004	1106-1004	241093	1118-1004	1106-1004	241093	1118-1004	1106-1009	241094	1118-1004	1106-1005	241095
korsryggetøtte el-ryggoverdel el-memory x2 Fitform kun fabmont																					
Ombyggingsett Fitform Nordic2/Nordic. Økt seteybde sd49-59cm																					
Ombyggingsett Fitform Nordic2/Nordic.brattre t ryggvinkel																					
Plansest stol oppreis Fitform Nordic etter mål																					
Plansest stol oppreis Fitform Nordic med kant etter mål																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr2 lynn formbar fiberfyll hud																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr2 lynn formbar fiberfyll hud																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr2 lynn formbar fiberfyll stoff																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr3 tykk formbar fiberfyll hud																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr3 tykk formbar fiberfyll hud																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr3 tykk formbar fiberfyll stoff																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr4 bånd formbar fiberfyll hud																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr4 bånd formbar fiberfyll stoff																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr4 bånd formbar fiberfyll Sarcotex																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr4 bånd formbar fiberfyll Uniform																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr5 dråpeformet formbar fiberfyll hud																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr5 dråpeformet formbar fiberfyll hud																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr5 dråpeformet formbar fiberfyll stoff																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr5 dråpeformet formbar fiberfyll Sarcotex																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr5 dråpeformet formbar fiberfyll Uniform																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr11 m sidedøtte stoff																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr11 m sidedøtte hud sort																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr11 m sidedøtte Sarcotex sort																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr11 m sidedøtte Uniform lys grå																					
Pute nakke Fitform Nordic2 nr11 m sidedøtte Uniform lys grå																					
Ryggoverdel elektrisk beitet Fitform (kun fabmont)																					
Ryggoverdel el-korsryggetøtte el-varme-memory x2 kun fabmont																					
Sidewange Fitform Nordic2 felbar hør																					
Sidewange Fitform Nordic2 felbar hør																					
Sidewange Fitform Nordic2 felbar ve																					
Sidewange Fitform Nordic2 felbar elektrisk hør																					
Sidewange Fitform Nordic2 felbar elektrisk ve																					
Sidewange Fitform Nordic2 rygg set/par. bruk alt iUPM Plus rygg)																					
Sidewange Fitform Nordic2 rygg set/par. bruk alt iUPM Plus rygg)																					
Varme stol oppreis Fitform Nordic sete-rygg fabmont																					
evt frair																					
Boyle Fitform Nordic2 svingbart manuell låsar (svingskive)																					
Understell Fitform Nordic ekstra for feste av bejbooks på motsatt side																					
Understell Fitform Nordic svingbart automatisk låsbar (svingskive)																					
Sving/jeterotasjon elektrisk Fitform (NB krever stol med sving)																					
Imstilling av stol Fitform Nordic e. brukers mål (sd,sh etçlang)																					
Imstilling til rettliet stol oppreis Fitform Nordic																					
Tilllegg annen farge Fitform Nordic stoff Geiranger																					
Tilllegg annen farge Fitform Nordic hud (sammne kvalitet)																					
Seter (husk trekk)																					
	sb45 Smal	sb45 Mini	sb45 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp	sb51 Stå	sb51 Dyp
Pute sete APPR Fitform Nordic luftreg.f.posisjonering,nytkvæst u trekk																					
Trekk spesial Sarcotex f APPR sete inkosikert grå																					
Trekk spesial Sarcotex f APPR sete inkosikert sort																					
Trekk spesial Uniform f APPR sete inkosikert grå																					
Trekk spesial Uniform f APPR sete inkosikert sort																					
Pute sete Intelligel Fitform trykkavlastning m gel u trekk																					
Pute sete Fitform myk latex u trekk																					
Pute sete Fitform trykkavlastning u trekk																					
Pute sete Fitform trykkavlastning myk u trekk																					

Bestillingsdata

	sb45 Smal	sb45 Mini	sb51 Std	sb51 Dyp	sb57 Bred	sb63 Xbred			
Pute sete Fitform trykkavlastning ex myk minneskum u trekk	1121-1015	195690	1121-1015	195694	1121-1019	195694	1121-1023	195698	1121-1144
Pute sete Fitform Nordic ekstra lav sh fra 36cm intelligel u trekk	1121-1047	195727	1121-1047	195728	1121-1048	195728	1121-1049	241108	1121-1050
Trekk Fitform Nordic2 sete std stoff grå	1122-1252	241382	1122-1252	241388	1122-1253	241388	1122-1254	241394	1122-1255
Trekk Fitform Nordic2 sete std hud sort	1122-1256	241381	1122-1256	241387	1122-1257	241387	1122-1258	241393	1122-1259
Trekk spesial Sarcotex GRÅ f trykkavlast sete myk stretch inkosikkert	1121-1087	241168	1121-1087	241175	1121-1088	241175	1121-1089	241183	1121-1090
Trekk spesial Sarcotex SORT f trykkavlast sete myk stretch inkosikkert	1122-1002	241169	1122-1002	241176	1122-1104	241176	1122-1106	241184	1121-1091
Trekk spesial Uniform lys grå nye stretch f trykkavlast puter	1121-1100	241221	1121-1100	241228	1121-1101	241228	1121-1102	241236	1121-1106
Trekk spesial Uniform SORT nye stretch f trykkavlast puter	1121-1116	241271	1121-1116	241275	1121-1117	241275	1121-1118	241279	1121-1119
Trekk Fitform Nordic benstøtter-sete sammenheng heldekk stoff	1121-1120	241270	1121-1120	241274	1121-1121	241274	1121-1122	241278	1121-1123
Trekk Fitform Nordic benstøtter-sete sammenheng heldekk hud	1121-1126	241218	1121-1126	241225	1121-1127	241225	1121-1128	241233	1121-1129
Trekk Fitform Nordic benstøtter-sete sammenheng heldekk Sarcotex	1121-1130	241165	1121-1130	241172	1121-1131	241172	1121-1132	241180	1121-1133
Sete oxitt etter mål (kun fabrikkmontert)	1121-1068		1121-1068		1121-1068		1121-1068		1121-1068
Rygg (inkl trekk) gjelder alle tilbehørsrygger									
Rygg LP Fitform posisjonering rh84 korsryggsatte u trekk	1118-1035	195701	1118-1034	195702	1118-1036	195702	1118-1037	195703	1118-1063
Rygg LPM multiplpass/kyfose+korsryggsatte Fitform rh84+trekk	1118-1039	196606	1118-1039	200015	1118-1041	200015	1118-1042	241121	1118-1043
Trekk Fitform Nordic2 rygg LP/LPM rh84 lys grå stoff	1122-1181	241261	1122-1182	241265	1122-1183	241265	1122-1185	241267	1122-1186
Trekk Fitform Nordic2 rygg LP/LPM rh84 sort hud	1122-1187	241260	1122-1188	241264	1122-1189	241264	1122-1191	241266	1122-1192
Trekk spesial Sarcotex Fitform Nordic2 rygg LP/LPM lys grå	1122-1205	241149	1122-1206	241153	1122-1207	241153	1122-1209	241155	1122-1210
Trekk spesial Sarcotex Fitform Nordic2 rygg LP/LPM sort	1122-1211	241150	1122-1212	241154	1122-1213	241154	1122-1215	241156	1122-1216
Trekk spesial Uniform Fitform Nordic2 rygg LP/LPM lys grå	1122-1193	241202	1122-1194	241202	1122-1195	241206	1122-1197	241208	1122-1198
Trekk spesial Uniform Fitform Nordic2 rygg LP/LPM sort	1122-1199	241203	1122-1200	241203	1122-1201	241207	1122-1203	241209	1122-1204
Sidestøtter kpl sett til LP/LPM rygg Fitform (cuplring)	1121-1041	241347	1121-1041	241347	1121-1041	241347	1121-1041	241347	1121-1041
Rygg LPM multiplpass/kyfose+korsryggsatte Fitform rh72 utrekk	1118-1038	206870	1118-1038	241120	1118-1040	241120			
Trekk Fitform Nordic2 rygg LP/LPM rh84 lys grå stoff rh72	1122-1182	241259	1122-1182	241263	1122-1184	241263			
Trekk Fitform Nordic2 rygg LP/LPM rh84 sort hud rh72	1122-1188	241258	1122-1188	241262	1122-1190	241262			
Trekk spesial Sarcotex Fitform Nordic2 rygg LP/LPM lys grå rh72	1122-1206	241147	1122-1206	241151	1122-1208	241151			
Trekk spesial Sarcotex Fitform Nordic2 rygg LP/LPM sort rh72	1122-1212	241148	1122-1212	241152	1122-1214	241152			
Trekk spesial Uniform Fitform Nordic2 rygg LP/LPM lys grå rh72	1122-1194	241200	1122-1194	241204	1122-1196	241204			
Trekk spesial Uniform Fitform Nordic2 rygg LP/LPM sort rh72	1122-1200	241201	1122-1200	241205	1122-1202	241205			
Rygg LPM PLUS m stabile hreg sidestøtter korsryggsatte trekk	1118-1055	241117	1118-1055	233724	1118-1056	233724	1118-1057	241118	1118-1064
Trekk spesial Uniform Fitform Nordic2 rygg LPM Plus lys grå	1122-1217	241213	1122-1217	241215	1122-1219	241215	1122-1221	241216	1122-1222
Trekk spesial Sarcotex Fitform Nordic2 rygg LPM Plus sort	1122-1223	241160	1122-1223	241162	1122-1225	241162	1122-1227	241163	1122-1228
Sidestøtter kpl sett til LPM PLUS rygg Fitform (cuplring)	1121-1086	241348	1121-1086	241348	1121-1086	241348	1121-1086	241348	1121-1086
Rygg Fitform xnyk utrekk rh84 korsryggsatte luft hdreg	1118-1007	195705	1118-1007	195711	1118-1013	195711	1118-1020	195718	1118-1091
Trekk Fitform Nordic2 rygg ex myk stoff grå	1122-1165	241251	1122-1165	241253	1122-1166	241253	1122-1167	241257	1122-1168
Trekk Fitform Nordic2 rygg ex myk hud sort	1122-1170	241250	1122-1170	241252	1122-1171	241252	1122-1092	241254	1122-1172
Trekk spesial Sarcotex Fitform Nordic2 rygg ex myk	1122-1159	241143	1122-1159	241144	1122-1161	241144	1122-1162	241145	1122-1163
Trekk spesial Uniform Fitform Nordic2 rygg ex myk	1122-1155	241196	1122-1155	241197	1122-1156	241197	1122-1157	241198	1122-1158
Rygg Fitform Nordic xnyk lav utrekk rh72 korsryggsatte luft hdreg	1118-1006	241124	1118-1006	241125	1118-1090	241125			
Trekk Fitform Nordic rygg myk/korsryggsatte rh72 hud sort	1122-1164	241249	1122-1164	241249					
Trekk Fitform Nordic rygg myk/korsryggsatte rh72 stoff grå	1122-1169	241248	1122-1169	241248					
Rygg Fitform Nordic xnyk utrekk rh94 korsryggsatte luft hreg									
Trekk Fitform Nordic2 rygg xnyk rh94 stoff grå									
Trekk Fitform Nordic2 rygg xnyk rh94 hud sort									
Rygg Fitform Nordic multiplpassing/kyfose korsryggsatte utrekk rh84	1118-1011	195707	1118-1011	195717	1118-1019	195717	1118-1025	195723	
Trekk Fitform Nordic rygg multiplpassing rh84 stoff grå	1121-1112	241272	1121-1112	241276	1122-1113	241276	1122-1305	241137	
Trekk Fitform Nordic rygg multiplpassing rh84 hud sort	1122-1047	241285	1122-1047	241286	1122-1062	241286	1122-1304	241136	

Bestillingsdata

Stoler med oppreisingsfunksjon
Fitform 576 Nordic2

	sb45 Sml		sb45 Mini		sb51 Std		sb51 Dyp		sb57 Bred		sb63 Xbred	
	art nr	bjmnr	art nr	bjmnr	art nr	bjmnr	art nr	bjmnr	art nr	bjmnr	art nr	bjmnr
Rygg Fitform Nordic multitilpassing/kylose/sidestøtte u trekk rH64	1118-1010	195708	1118-1010	195708	1118-1010	195714	1118-1016	195714	1118-1022	195720		
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg multitilpass m sidestøtte stoff grå	1121-1109	241273	1121-1110	241277	1122-1110	241287	1122-1110	241277	1122-1111	241281		
Trekk Fitform Nordic sb45 rygg multitilpass m sidestøtte hud sort	1122-1045	241284	1122-1045	241284	1122-1060	241287	1122-1060	241287	1122-1073	241289		
Rygg APPR Fitform Nordic2 luftregulert u trekk	1118-1085	241111	1118-1084	241110	1118-1086	241112	1118-1086	241112	1118-1087	241113	1118-1088	241114
Trekk stoff lys grå	1122-1270	241380	1122-1275	241376	1122-1275	241386	1122-1275	241386	1122-1279	241392	1122-1283	241398
Trekk sort hud	1122-1271	241379	1122-1269	241375	1122-1276	241385	1122-1276	241385	1122-1280	241391	1122-1284	241397
Trekk Sarcotex	1122-1143	241171	1122-1142	241170	1122-1145	241178	1122-1145	241178	1122-1147	241185	1122-1149	241192
Trekk Uniform	1122-1135	241224	1122-1134	241223	1122-1137	241231	1122-1137	241231	1122-1139	241238	1122-1141	241245
Rygg trykkløst Fitform Nordic2 e mål (fra s38) tilleg	1118-1089	241123	1118-1089	241123	1118-1089	241123	1118-1089	241123	1118-1089	241123	1118-1089	241123
Tillegg for poltring av rygg med topplag av trykkavlastende minneskum	1122-1029		1122-1029		1122-1029		1122-1029		1122-1029		1122-1029	
Tillegg for poltring av rygg med topplag av mykt latexskum	1122-1028		1122-1028		1122-1028		1122-1028		1122-1028		1122-1028	
Trekk rygg Sarcotex inkosikkert etter mål	1122-1100		1122-1100		1122-1100		1122-1100		1122-1100		1122-1100	
Trekk setebestøtte Sarcotex inkosikkert	1121-1130	241165	1121-1130	241165	1121-1131	241172	1121-1131	241172	1121-1132	241180	1121-1133	241187
Trekk Fitform Nordic berstøtte+sete sammenheng heldekk Uniform	1121-1126	241218	1121-1127	241218	1121-1127	241225	1121-1127	241225	1121-1128	241233	1121-1129	241240
Trekk armen Sarcotex inkosikkert etter mål	1122-1099		1122-1099		1122-1099		1122-1099		1122-1099		1122-1099	
Trekk sidevange høy Sarcotex inkosikkert	1122-1152	241193	1122-1152	241193	1122-1152	241193	1122-1152	241193	1122-1152	241193	1122-1152	241193
Trekk sidevange høy Sarcotex inkosikkert	1122-1153	241194	1122-1153	241194	1122-1153	241194	1122-1153	241194	1122-1153	241194	1122-1153	241194
Fliseringsstør												
Universarbeide Bodypoint m elastikk str L br110m -husk forl.stropp	2012-1237	149512	2012-1237	149512	2012-1237	149512	2012-1237	149512	2012-1237	149512	2012-1237	149512
Universarbeide Bodypoint m elastikk str XL br 50m -husk forl.stropp	2012-1239	231155	2012-1239	231155	2012-1239	231155	2012-1239	231155	2012-1239	231155	2012-1239	231155
Forlengesstropp til Universalbette str L 110m bredde	2012-1341		2012-1341		2012-1341		2012-1341		2012-1341		2012-1341	
Forlengesstropp til Universalbette str XL 150m bredde	2012-1378		2012-1378		2012-1378		2012-1378		2012-1378		2012-1378	
Hoftebelte Bodypoint 2pkt Medium ett drag fra midten	2012-1250	146986	2012-1250	146986	2012-1250	146986	2012-1250	146986	2012-1248	156252	2012-1248	156252
Hoftebelte Bodypoint 2pkt Large ett drag fra midten	2012-1248	156252	2012-1248	156252	2012-1248	156252	2012-1248	156252	2012-1248	156252	2012-1248	156252
Hoftebelte Bodypoint 4pkt Medium ett drag fra midten	2012-1260	203805	2012-1260	203805	2012-1260	203805	2012-1260	203805				
Hoftebelte Bodypoint 4pkt Large ett drag fra midten	2012-1258	066872	2012-1258	066872	2012-1258	066872	2012-1258	066872	2012-1258	066872	2012-1258	066872
Fratrekk (kun ved byte til annen type del)												
Fratrekk std rygg Fitform Nordic2 (ryggepute m trekk-ryggegramme)	1118-1003		1118-1003		1118-1003		1118-1003		1118-1003		1118-1003	
Fratrekk std sete Fitform Nordic2	1121-1002		1121-1002		1121-1002		1121-1002		1121-1002		1121-1002	
Fratrekk std nakkepute Fitform Nordic2	1113-1014		1113-1014		1113-1014		1113-1014		1113-1014		1113-1014	
Fratrekk std armen Fitform Nordic2 (stk)	1113-1013		1113-1013		1113-1013		1113-1013		1113-1013		1113-1013	
Fratrekk std betjokks Fitform Nordic2	1105-1013		1105-1013		1105-1013		1105-1013		1105-1013		1105-1013	
Fjølmer												
Timepris reparasjon Fitform Nordic2	1199-1005	195700	1199-1005	195700	1199-1005	195700	1199-1005	195700	1199-1005	195700	1199-1005	195700
Enhetspris gjenbruk Fitform Nordic2	1199-1010	195668	1199-1010	195668	1199-1010	195668	1199-1010	195668	1199-1010	195668	1199-1010	195668
Timepris individuell tilpassning	1199-1007	195672	1199-1007	195672	1199-1007	195672	1199-1007	195672	1199-1007	195672	1199-1007	195672
Materiell system angi beløp:												
Materiell teknisk angi beløp:												
Kjøpetid pr time (NB avrundet til hele timer)	1199-1014	241414	1199-1014	241414	1199-1014	241414	1199-1014	241414	1199-1014	241414	1199-1014	241414
km (statens satser 2018 kr 4,10)	9999-1003		9999-1003		9999-1003		9999-1003		9999-1003		9999-1003	
Instilling av stol oppreis Fitform Nordic etter brukers mål (sh etc)	1099-1011		1099-1011		1099-1011		1099-1011		1099-1011		1099-1011	
Instilling til rett løst stol oppreis Fitform Nordic	1199-1004		1199-1004		1199-1004		1199-1004		1199-1004		1199-1004	
Økt brukt til 175kg Fitform Nordic sb51												
Div varer fra Welico (angi vare og pris)	div-52477		div-52477		div-52477		div-52477		div-52477		div-52477	
	div-52477		div-52477		div-52477		div-52477		div-52477		div-52477	

Bestillingsdata

Støtte/ytelse/nakketepe skal også medfølge	div-52477		div-52477		div-52477		div-52477		div-52477	
	1199-1013	1199-1013	1199-1013	1199-1013	1199-1013	1199-1013	1199-1013	1199-1013	1199-1013	1199-1013
Viktigste deler	sbk5 Smal		sbk5 Mini		sbk5 Dyp		sbk5 Bred		sbk5 Xbred	
	Gjenbrukssett 1 (alle trekk-makkepeutens-kum til sete+rygg) stoff lysgrå	1122-1290	241297	1122-1289	241295	1122-1291	241299	1122-1292	241301	1122-1293
Gjenbrukssett 1 (alle trekk-makkepeutens-kum til sete+rygg) hud	1122-1295	241296	1122-1294	241294	1122-1296	241298	1122-1297	241300	1122-1298	241302
Gjenbrukssett 3 (alle trekk) stoff lysgrå	1122-1242	241378	1122-1241	241374	1122-1243	241384	1122-1244	241384	1122-1245	241384
Gjenbrukssett 3 (alle trekk) hud	1122-1247	241377	1122-1246	241373	1122-1248	241383	1122-1249	241383	1122-1250	241384
Seteputer stoff u trekk	1122-1237	241337	1122-1236	241337	1122-1238	241340	1122-1239	241340	1122-1240	241346
Trekk Fitform Nordic2 sete stoff	1122-1252	241382	1122-1251	241382	1122-1253	241388	1122-1254	241388	1122-1255	241400
Trekk Fitform Nordic2 sete stoff hud sort	1122-1256	241381	1122-1255	241381	1122-1257	241387	1122-1258	241393	1122-1259	241399
Rygg stoff u trekk	1118-1028	241380	1118-1027	241376	1118-1030	241386	1118-1031	241392	1118-1032	241398
Trekk sort hud	1122-1271	241379	1122-1269	241375	1122-1272	241385	1122-1276	241391	1122-1284	241397
Skumpolstring (ryggepute) rygg stoff m korsryggstøtte (u trekk)	1121-1082	241368	1121-1081	241367	1121-1083	241369	1121-1084	241370	1121-1085	241371
Nakketepe stoff	1113-1036	241334	1113-1036	241334	1113-1036	241334	1113-1036	241334	1113-1036	241334
Nakketepe stoff hud	1113-1037	241333	1113-1037	241333	1113-1037	241333	1113-1037	241333	1113-1037	241333
Benstøtte mekanisme (u trekk)	1108-1001	241307	1108-1001	241307	1108-1002	241308	1108-1003	241309	1108-1004	241310
Trekk + skum benstøtte stoff kpl	1122-1260	241407	1122-1260	241407	1122-1261	241409	1122-1262	241411	1122-1263	241413
Trekk + skum benstøtte hud kpl	1122-1264	241406	1122-1264	241406	1122-1265	241408	1122-1266	241410	1122-1267	241412
Fotplater, stor og liten	1108-1008	241317	1108-1008	241317	1108-1009	241318	1108-1010	241319	1108-1014	241320
Sikkerhetsklær benstøtte	1101-1001	241366	1101-1001	241366	1101-1001	241366	1101-1001	241366	1101-1001	241366
Armlen stoff u trekk	1113-1005	241304	1113-1005	241304	1113-1005	241304	1113-1005	241304	1113-1005	241304
Armlen stoff u trekk	1113-1006	241305	1113-1006	241305	1113-1006	241305	1113-1006	241305	1113-1006	241305
Trekk armlene stoff stoff sk (trenger 2 stk pr stol)	1122-1251	241372	1122-1251	241372	1122-1251	241372	1122-1251	241372	1122-1251	241372
Trekk armlene stoff hud sk (trenger 2 stk pr stol)	1122-1030	241405	1122-1030	241405	1122-1030	241405	1122-1030	241405	1122-1030	241405
Trekk sidevange stoff hud	1122-1285	241402	1122-1285	241402	1122-1285	241402	1122-1285	241402	1122-1285	241402
Trekk sidevange stoff ve	1122-1288	241404	1122-1288	241404	1122-1288	241404	1122-1288	241404	1122-1288	241404
Trekk sidevange hud ve	1122-1286	241401	1122-1286	241401	1122-1286	241401	1122-1286	241401	1122-1286	241401
Beljeningspanel stol oppreis Fitform Nordic Tilt 3motors	1105-1030	241314	1105-1030	241314	1105-1030	241314	1105-1030	241314	1105-1030	241314
Beljeningspanel stol oppreis Fitform Nordic uten Tilt 3motors	1105-1031	241313	1105-1031	241313	1105-1031	241313	1105-1031	241313	1105-1031	241313
Fish eyes for betjnings Fitform (6 knapper) stoff på stol - supplering	1135-1001	241316	1135-1001	241316	1135-1001	241316	1135-1001	241316	1135-1001	241316
Elektronikk stol oppreis Fitform Nordic kpl	1104-1002	217192	1104-1002	217192	1104-1002	217192	1104-1002	217192	1104-1002	217192
Motor Fitform Nordic lys	1104-1003	211295	1104-1003	211295	1104-1003	211295	1104-1003	211295	1104-1003	211295
Motor Fitform Nordic benstøtte	1104-1001	215769	1104-1001	215769	1104-1001	215769	1104-1001	215769	1104-1001	215769
Nettkabel	1105-1016	241330	1105-1016	241330	1105-1016	241330	1105-1016	241330	1105-1016	241330
Understell Fitform Nordic2 svingbart manuelt låsbar (svingskive)	1102-1015	241290	1102-1015	241290	1102-1016	241291	1102-1017	241292	1102-1018	241293
Understell Fitform Nordic svingbart automatisk låsing monsett	1102-1011	207217	1102-1011	207217	1102-1012	202648	1102-1012	202648	1102-1014	159379
Håndgrep svingskive manuell oppreis Fitform Nordic2	1131-1009	241321	1131-1009	241321	1131-1009	241321	1131-1009	241321	1131-1009	241321
Kabel kpl m utløser og håndgrep svingskive manuell oppreis Fitform Nordic2	1131-1008	241322	1131-1008	241322	1131-1008	241322	1131-1008	241322	1131-1008	241322
Kabel kpl m utløser svingskive automatisk oppreis Fitform Nordic	1131-1007	241323	1131-1007	241323	1131-1007	241323	1131-1007	241323	1131-1007	241323
Passbrett med skiver, foring og mutter stol oppreis Fitform Nordic2	1131-1002	241331	1131-1002	241331	1131-1002	241331	1131-1002	241331	1131-1002	241331
Ben metall leng Fitform Nordic2 m hjul	1102-1019	241306	1102-1019	241306	1102-1019	241306	1102-1019	241306	1102-1019	241306
Propp plastlensstopper fitot stol oppreis Fitform Nordic2	1131-1006	241332	1131-1006	241332	1131-1006	241332	1131-1006	241332	1131-1006	241332
Ekstra brede stoler: (mod 570 Vario)	sbk9		sb75		sb81		sb87			
Fitform 570 Vario Tilt (u sving) max brukervekt 250kg	1100-1002		1100-1001		FN-81		FN-87			
Understell svingbart	FN120-69									
Ombygdsett Fitform Nordic økt setedybde sds5-59cm	FN129-69									
Pute sete Geltec/ Intelligel Fitform trykkavlastning m gel u trekk	1121-1030									
Trekk spesial SarcoTex GRÅ Frykkavlast sette mykere mer stretch inksikkert	FN149-69									
Kommentarer:										

Fitform Saliro

- lettbetjent og prisgunstig løfte- hvilestol med synkron-funksjon



Ny modell fra Fitform til en svært hyggelig pris. Saliro kjennetegnes av høy komfort og er svært lettforståelig og enkel å betjene. Stolen har synkronfunksjon, dvs. at oppreisningsfunksjon, benstøtte, tilt og rygg er sammenkoblet slik at de enkelt kan betjenes med en håndkontroll med bare to knapper. Ønsker man separat regulering av disse funksjonene anbefaler vi modellen Fitform Nordic

Stolen har faste mål, men kan leveres i flere størrelser, i stoff eller skinn, se bestillingsdata.

Saliro kan leveres med varme i sete og rygg, behagelig luksus i lange vinter-kvelder! Andre tilbehør/tilvalg er nakkepute, hjulsystem og batteridrift.



Hjulsystem Fitform Saliro



Betjeningspanel med kun to knapper

pr. 3. april 2018



STANDARDSTOL	Varenr	pris ex mva	pris inkl mva
Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 grå Geiranger stoff	FS-49M	12 316	15 395
ANDRE UTFØRELSE - BESTILLINGSVARE	Varenr	pris ex mva	pris inkl mva
Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 grå Geiranger stoff	FS-49P	12 316	15 395
Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 grå Geiranger stoff	FS-49G	12 316	15 395
Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 sort skinn	FS-49P-HUD	16 396	20 495
Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 sort skinn	FS-49M-HUD	16 396	20 495
Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 sort skinn	FS-49G-HUD	16 396	20 495
TILBEHØR	Varenr	pris ex mva	pris inkl mva
Nakkepute Fitform Saliro stoff	FS-NP	976	1 220
Nakkepute Fitform Saliro hud	FS-NP-HUD	1 116	1 395
Hjulsystem Fitform Saliro	FS-WHEEL	2 636	3 295
Varme sete og rygg Fitform Saliro	FS-HEAT	2 676	3 345
Batteridrift Fitform Saliro	FS-BATT	2 676	3 345

Vi tar forbehold om evt. pris og produktendringer



medemagruppen

Stoler med oppreisningsfunksjon 2018

Medema Norge AS - Stamveien 6 - 1481 Hagan - tlf 67 06 49 00 - www.medema.no