

Netti[®]
BY ALU REHAB



Netti Family
Komfortrollestolene
med flest
muligheter

Enable joy of life

Best på komfort Best på trykkavlastning Best på stabilitet

- Den letteste komfortstolen
- Svært god sittepute bygd opp av 4 ulike skumtyper med elastisk og ventilerende yttertrem
- 170 mm dype sidevanger på ryggpute gir den beste stabiliteten
- Rygghøyde fra 450 til 750 mm
- Komfortplate
- Halvbord eller bord gir ekstra stabilitet til sidevangene
- Stort tilbehørsprogram
- 400-550 mm setedybde
- 350-500 mm setebredde



Setebredde
350-500 mm
(525 mm med
tilbehør)



Setedybde
400-550 mm



Rygghøyde
450-650 mm
(550-750 mm)



Setehøyde
445-475 mm
(380-515 mm)
Uten puter



Max.
Belastning
145 kg



Vekt
Fra 31,4 kg
Bredde 40: 32,6 kg



Tilt
25°-45°
-9° - +16°



Rygg
86°-133°



Kollisjonstestet
ISO 7176-19
Max. Belastning 136 kg



BREDDE	DYBDE	HMS NR.	ART NR.
350 mm	400-550 mm	276997	46604
380 mm	400-550 mm	277000	46607
400 mm	400-550 mm	277007	46614
430 mm	400-550 mm	277014	46621
450 mm	400-550 mm	277021	46628
500 mm	400-550 mm	277028	46635


Stabilitet i sitteenheten



Ryggpute med god støtte standard

Netti Stabil ryggpute med 170 mm dype sidevanger og ventilerende 3D-trekk er standard. Rygghøyde kan tilpasses trinnløst i høyden fra 450 mm til 650 mm. Med høy rygg og ryggforlenger er rygghøyden fra 550-750 mm. Ryggputen har integrert lumbalstøtte. Se også Netti Kyphotic ryggpute side 11 for brukere med kyfose.

Setebredde 350-500 mm
Setedybde 400-550 mm

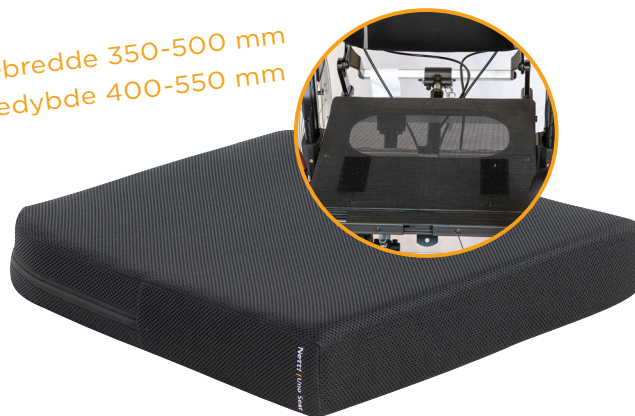

42 setebredde/dybde kombinasjoner

Netti III fås i hele 42 forskjellige størrelser så den kan tilpasses den enkelte bruker. Seteputen Netti Uno er svært god - bygd av 4 ulike skumtyper med et elastisk og ventilerende 3D-trekk, som sikrer en god mikroklima - og dermed bidrager til å forebygge trykksår.

Netti III leveres med komfort seteplate som standard. Denne understøtter seteputens trykkavlastende effekt og gir økt innsynkning. Dermed stabiliseres sittestillingen og fremoverglidning i setet forebygges.

Ekstra støtte og stabilitet

Halvbord eller standard bord er med på å forsterke den veldig gode stabiliteten som oppnås ved bruk av alle våre ryggputer.



Beste tilpasning til brukeren

Netti tilbyr et stort utvalg av tilbehør, som gir mulighet for optimal tilpasning til den enkelte brukeren. Feks.:

- Elektriske funksjoner på benstøtter, rygg, og tilt
- Easy Wheel - Hjulet med gir som gjør det veldig lett å ta seg frem
- 45° tilt
- Kyfoserygg
- Super Stabil ryggpute med regulerbar korsryggstøtte
- Fotkasse
- Stort utvalg av hodestøtter
- Utbyggersett for armlen (øker sittebredde med 25 mm)
- Brukerregulering av tilt og rygg
- Helpolstrede armlen




STORT UTVALG AV
TILBEHØR TIL NETTI
RULLESTOLENE



45 graders tilt

For brukere som trenger mer tilt for høyere grad av stillingsendring og trykkfordeling. Større tilt gir svært god avlastning på sårutsatte områder. 45 graders tilt bidrar også til bedre stabilitet i sitteenheten.

Se artnr. i Netti katalogen på side 25 - last ned på www.my-netti.no.

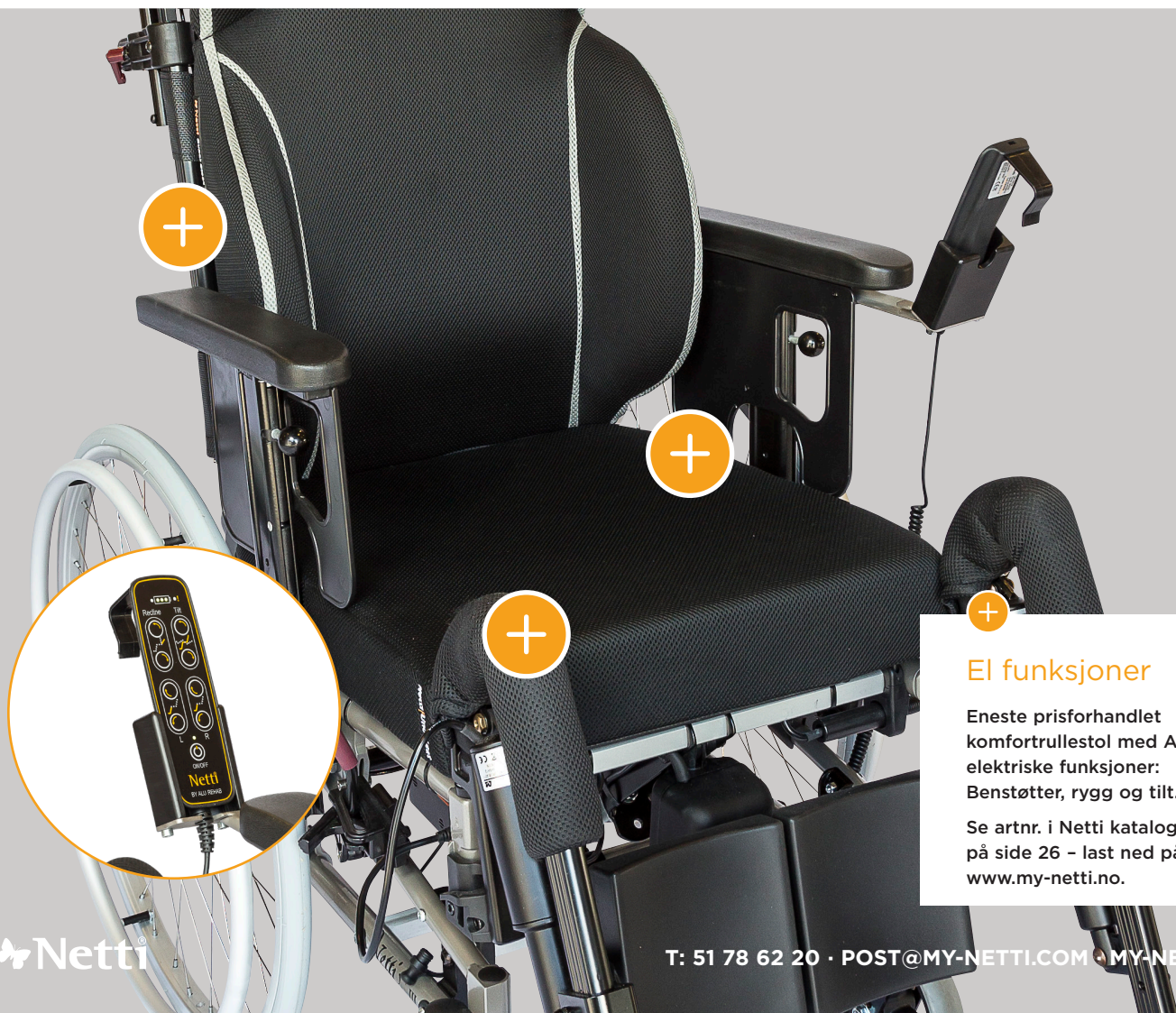

El funksjoner

Eneste prisforhandlet komfortstol med ALLE elektriske funksjoner: Benstøtter, rygg og tilt.

Se artnr. i Netti katalogen på side 26 - last ned på www.my-netti.no.

- Muskelsvake får dobbel styrke
- Frihet til å klare seg selv
- Kan brukes på alle typer rullestol



Easy Wheel

Hjulet med gir som gjør det veldig lett å ta seg frem.

Easy Wheel

Anbefales til brukere med liten kraft i armene, da fremdrift krever 50% mindre energi enn ordinære hjul. Kan brukes på alle typer rullestoler. Gir brukeren bedre mulighet for å klare seg selv. EasyWheel anbefales også til stoler som er utstyrt med elektriske funksjoner på tilt, rygg og benstøtter.

EasyWheel er en lettere måte å komme seg fram på, og passer utmerket for muskelsvake og andre som gjerne vil klare seg selv, men som finner kjøring av rullestol utfordrende. Mekanisk utveksling gjør kjøring og manøvrering av rullestolen dobbelt så lett. Dette gir mulighet for en mer mobil og aktiv livsstil for den enkelte. Et tilnærmet vedlikeholdsfritt system som gir lang levetid og få bekymringer. EasyWheel er velegnet til bruk på alle typer underlag.

EasyWheel har et mekanisk nav med en utveksling som aktiveres av drivringene. Giringen i navet er koblet til drivringene. Når drivringene føres fremover aktiveres giringen og hjelper brukeren med å kjøre stolen. Med en

mekanisk utveksling 2:1 mellom drivring og drivhjul, tar EasyWheel over ca 50% av den energien som kreves for å kjøre rullestolen.

EasyWheel passer mange rullestolsmodeller som er på markedet i dag. Kontakt oss for mer informasjon.

Som standard kan EasyWheel leveres i 22" x 1" og 24" x 1" med PU dekk med fiskebeinsmønster. På spesialbestilling kan vi levere med andre typer dekk samt 26".


Se artnr. i Netti katalogen på side 35 - last ned på www.my-netti.no.

Stort utvalg av hodestøtter

Les mere om hver enkel hodestøtte i
Netti katalogen på side 17 - last ned
på www.my-netti.no



Hodestøtte A

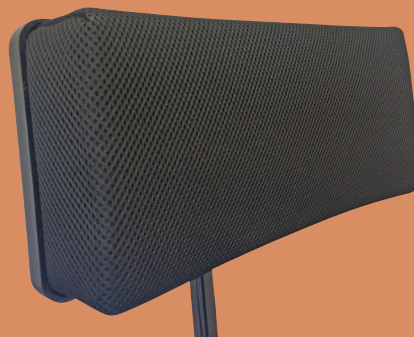

Hodestøtte C



Pute




Hodestøtte E



Hodestøtte F



Hodestøtte Savant

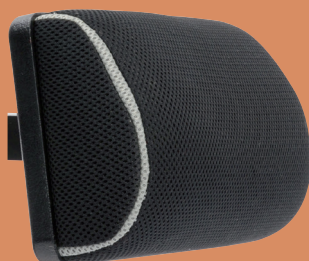

Hodestøtte D



Pute



Axion



Super Stabil ryggpute til brukere som trenger ekstra stabilitet. Sidevangene er forsterket og puten har regulerbar korsryggstøtte. Kommer standard med 2 stk lumbalstøtter i skum, men kan leveres med korsryggstøtte i luft på forespørsel. For ytterligere beskrivelse og informasjon se i Netti katalogen på side 46 - last ned på www.my-netti.no.



Se artnr. i Netti katalogen på side 46 - last ned på www.my-netti.no.

Super Stabil ryggpute for ekstra stabilitet


- Alltid klar til bruk!
- Gir økt komfort og stabilitet
- Flere skumlag - økt innsynkning
- 170 mm sidestøtte for økt stabilitet
- God i kombinasjon med mekanisk sidestøtte
- Tilpasses individuelt trinnløst i høyden
- Rygghøyde fra 450 mm til 650 mm er standard. Ryggputen festes med velcro og tilpasses trinnløst i høyden.
- Leveres med to pads som gir mulighet for justering av korsryggstøtte, sidestøtte og tilrettelegging for lettere skoliose
- Ventilerende 3D yttertremk

Netti kyphotic

Netti Kyphotic er laget for brukere med kyfose og behov for optimal stabilisering av den krumme ryggen. Puten er konstruert for å følge ryggens kurvatur, gi støtte og stabilitet, og maksimal trykkavlastning. Den har et meget elastisk tekstil på midten og et ventilerende tekstil på sidene som sikrer god komfort. Ryggputen gir sammen med Netti stolryggens velcrobånd mulighet for en mer oppreist sittestilling. Dette gir bedre næringsopptak, respirasjon og økt aktivitetsnivå.

Lave sidevanger med ventilerende 3D tekstil sikrer god komfort og bevegelsesfrihet for armene.

Unikt design sikrer bevegelsesfrihet for skuldrene.

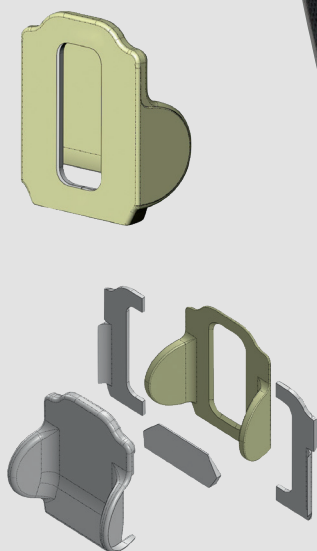

Ergonomisk utformet for å følge ryggens kurvatur ved kyfose. Midtre delen er utsparte for å gi maksimal trykkavlastning for ryggens krumning. Designet for å gi støtte for nedre del av ryggens krumning og dens kurvatur.

Nedre del av basen er fjernet, slik at puten kan settes helt ned mot rammen, og kant i kant med sitteputen.

Se artnr. i Netti katalogen på side 43 – last ned på www.my-netti.no.



Stort utvalg av benstøtteløsninger.
Se artnr. i Netti katalogen på side
27-23 - last ned på www.my-netti.no.




Fotkasse

Fotkasse som tilbehør til både Netti III og Netti III HD - her vist med Grandis benstøtte.

Det er også mulighet for fotkasse med elektrisk regulering.

Se artnr. i Netti katalogen på side 32 - last ned på www.my-netti.no.

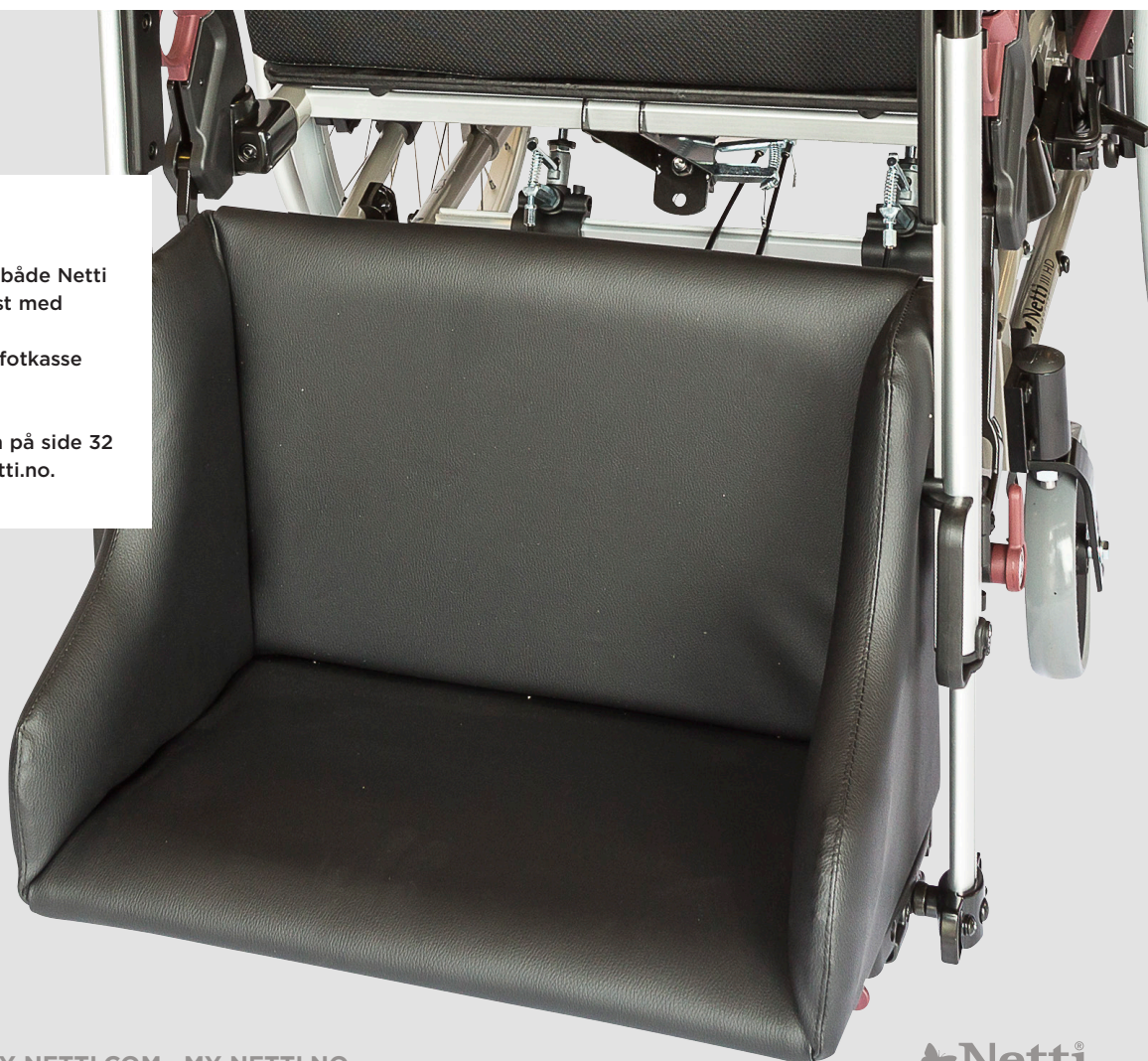

Netti[®]
BY ALU REHAB

KONTAKT OSS:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp stasjon

T: 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Last ned Netti katalogen
på www.My-Netti.no

Enable joy of life



My-Netti.no